

機械器具 (1 2) 理学診療用器具
管理医療機器 非血管系手術向け超音波診断用プローブ 40770002
特定保守管理医療機器 術中電子コンベックス探触子 UST-987-7.5

【禁忌・禁止】

次の部位には使用しないこと

- ・心臓 (直接接触)
[マイクロショックの恐れ]
- ・眼球
[音響出力による眼球への影響]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- ① 先端部
 - ② ケーブル
 - ③-1 コネクタ
 - ③-2 防水対応コネクタ (工場オプション対応)
 - ④ 超音波放射面
- 付属品 (収納ケース)

2. オプション


- ⑥ 防水カバー MP-2790

防水対応コネクタに装着することでプローブ全体の液体による洗浄・消毒・滅菌を可能にするカバー

3. 体液に接触する部分の原材料

先端部：変性ポリフェニレンオキシド
超音波放射面：シリコンゴム
接着部：シリコンゴム

4. 外観図及び寸法

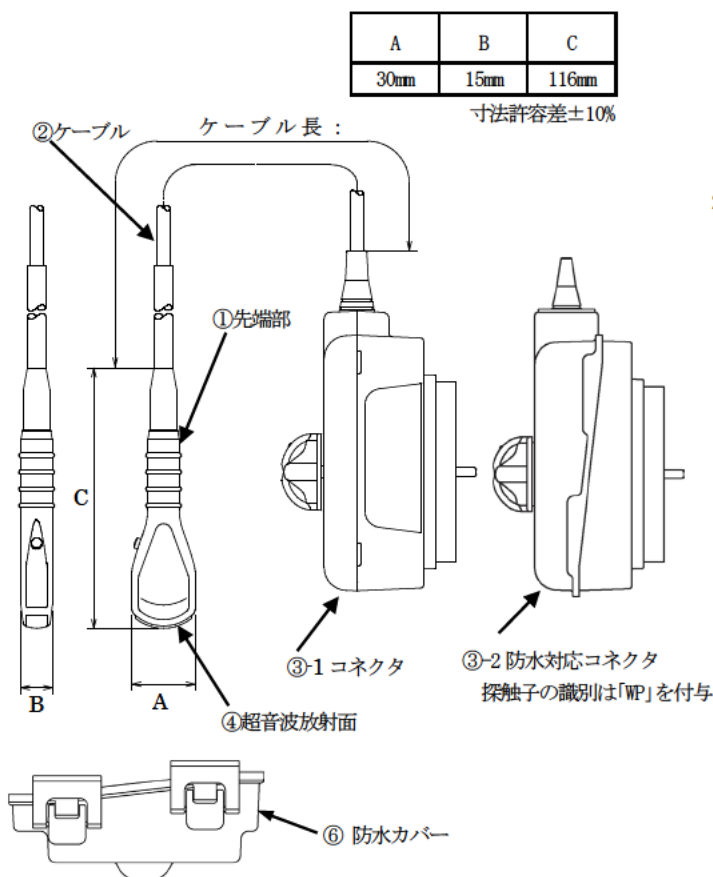

5. 動作原理

- (1) 探触子の振動子へ送信機から電気パルス信号を加えると、振動子は電気振動を機械振動エネルギーに変換する働きをし、振動子に接する生体または、液体などの媒質中へのパルス状の超音波を放射する。
- (2) 発射された超音波は生体内の音響特性 (音響インピーダンス) の異なる境界で反射される。
- (3) 振動子は、超音波反射波の受信にも使用される。振動子は、超音波振動によって機械的に振動し、機械電気変換作用によって電気エネルギーに変換する働きをして受信するものである。受信されたエコーは再び電気信号に変換され、電気パルスは輝度変調により明暗の輝度に変換され画像化される。

【使用目的又は効果】

超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する装置に使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 日常の始業点検 (外観検査等を行う)
- (2) 機器の消毒・滅菌を行う。(取扱説明書を参照)
 - ①消毒
薬液もしくはホルマリンガスを適用
 - ②滅菌
エチレンオキシドガス、低温プラズマもしくは薬液を適用。
- (3) 探触子を当該超音波画像診断装置の所定の接栓座へ接続する。
- (4) 当該超音波画像診断装置の操作方法に従って適切な動作状態に調整する。
- (5) 観測したい被検者の部位へ探触子の超音波放射面を当てる。
- (6) 穿刺適用時は、取扱説明書に従い使用すること。

【使用方法に関連する使用上の注意】

60℃を超える高温での消毒・滅菌は行わないこと。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本探触子は、以下の超音波画像診断装置と接続して使用のこと。

販売名	*認証番号
エコーカメラ SSD-900	20900BZZ00860000
エコーカメラ SSD-1000	20900BZZ00201000
プロサウンド SSD-α5	21600BZZ00203000
プロサウンド SSD-4000	21200BZZ00300000
プロサウンド SSD-3500	21400BZZ00401000
プロサウンド 6	219AABZX00260000
プロサウンド α6	221AABZX00123000
超音波診断装置 F37	223AABZX00150000
超音波診断装置 F31	225AABZX00121000

** 製造販売業者：富士フイルム株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい。

穿刺適用時に使用する品目は下記を使用のこと。

販売名	*認証番号
穿刺アダプタ MP-2458	222AABZX00053000
穿刺アダプタ MP-2783	22000BZX00969000

** 製造販売業者：富士フイルム株式会社

MP-2783の穿刺ガイドライン表示可能な装置は SSD-3500、SSD-4000、SSD-α5、プロサウンド 6、プロサウンド α6、超音波診断装置 F37 です。

	販売名	*認証/届出番号
*	シブコ UP シリーズブラケット 614-068	13B1X00089040233
*	シブコ UP シリーズニードルガイド 610-608	231AFBZX00012000

製造販売業者：センチュリーメディカル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL:0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL:0570-02-7007 (ナビダイヤル)

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 消毒・滅菌を行なった上で使用すること。
2. 音響媒体が必要な場合には滅菌された生理食塩水を使うこと。
3. 本機器を高周波利用機器と共に使う場合、高周波電流の経路に探触子および操作者の手などがあった時に、探触子の損傷、患者・操作者が火傷をする恐れがあります。探触子に対する対極板およびそれらのコードの位置を工夫するなどして、慎重に使用すること。

〔その他の注意〕

1. 使用後は、速やかに機器を洗浄すること。
2. 落としたりぶつけたりしないこと。
3. 防水対応コネクタでエチレンオキシドガス滅菌、低温プラズマ滅菌、ホルマリン消毒などの圧力変化のある滅菌、消毒に使用する場合、防水カバーを使用しないこと。
4. 穿刺する際には使用前に 40℃の温水にて針エコーが穿刺ガイドラインと一致することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間：3 年（自己認証データによる）

【保守・点検に係る事項】

* 〈使用者による保守点検（日常点検）〉

1) 目視による点検

(1) 外観の確認

- プローブの外観に異常がないことを確認すること。
- ・ケーブル、付属品等に損傷や磨耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

- 清浄な状態であることを確認すること。
- ・プローブ、付属品の洗浄・消毒方法は、取扱説明書等の指示に従って行うこと。

2) 機能の確認

(1) プローブの正常状態の確認

- プローブの正常状態・正常動作を確認すること。
- ・プローブを診断装置に接続し、正常に動作すること。
 - ・異音、異臭がないことを確認すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

（業者による保守点検）

定期点検を弊社又は弊社の指定する業者に依頼すること。

点検項目	頻度
安全点検	1 回／年

詳細は取扱説明書を参照すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。