

\*\*2017年 8月改訂(第3版・新記載要領に基づく改訂)

\*2013年10月15日改訂(第2版)

機械器具 6 呼吸補助器  
一般医療機器 呼吸ガスミキサ(JMDNコード 70563000)  
**F & P デュアルフローアダプター**


再使用禁止

**\*\*【禁忌・禁止】**

再使用禁止。

**\*\*【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状

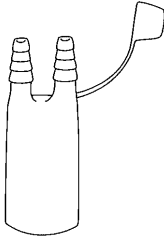

Part No. 900MR961

## 2. 動作原理

調整された濃度の2種類の医療用ガスを混合して調整する。

## 3. 仕様

医療用ガスの接続ポート : 外径 6mm, 7mm, 8mm, 9mm  
患者側接続ポート : 内径 22 mm

**【使用目的又は効果】**

2種類の医療用ガスを一定濃度に調整して患者に供給する。

**\*\*【使用方法等】**

調整された濃度の医療用ガスの供給チューブと患者に送気する  
人工呼吸器用呼吸回路などに接続する。

**使用方法等に関連する使用上の注意**

使用する前には、必ず目視で本品に損傷が無いことを確認する  
こと。

**\*\*【使用上の注意】****不具合・有害事象**

1. 重大な不具合  
閉塞、破損、ガスリーク
2. 重大な有害事象  
低酸素血症、呼吸不全

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**Fisher & Paykel**  
**HEALTHCARE**

**製造販売業者**

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社  
電話番号 03-5117-7110

**外国製造業者**

Fisher & Paykel Healthcare Limited  
フィッシャー・アンド・パイクел・ヘルスケア・リミテッド  
ニュージーランド

**[販売業者(販売店)]**

|  |
|--|
|  |
|--|