

2025年7月作成(第1版)

機械器具 6 呼吸補助器

一般医療機器 人工呼吸器用マスク(JMDNコード 70564000)

F & P ニヴァイロ シングルユースフルフェイスマスク

再使用禁止


RT057

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止[感染性物質の伝播、治療の中断、重篤な健康被害が発生するおそれがあるため]。
- ＜適用対象(患者)＞
以下のような患者には、使用しないこと。
- 心肺停止や血行動態が不安定な患者[本品では生命維持のための適切な換気動作が行えないため]。
- 意識不明、自発呼吸がない、非協力的、反応がないなどのマスクを外すことができない患者[気道の閉塞や窒息のおそれがあるため]。
- 胃食道逆流症、咳反射不全、裂孔ヘルニアなどの胃の内容物の逆流の可能性がある患者[逆流した胃の内容物の吸引により気道の閉塞や窒息のおそれがあるため]。
- 嚥下反応がない、嘔吐などの際に誤嚥の危険性がある、嘔吐する、吐き気を訴えている患者[気道の閉塞や窒息のおそれや、分泌物が呼吸ポートを塞ぐおそれがあるため]。
- 頭部または顔面に手術歴、外傷、または火傷がある、圧外傷、上部消化管に出血のある患者[症状が悪化するおそれがあるため]。

【形状・構造及び原理等】

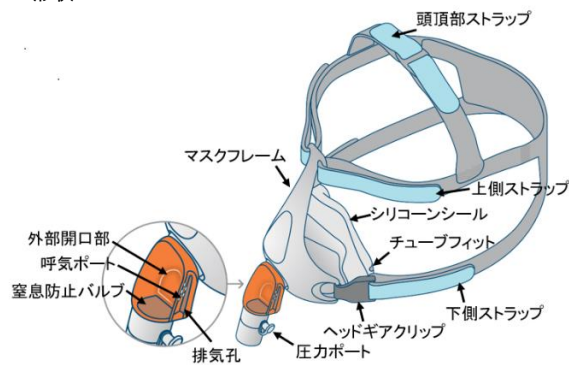1. 形状



本品には天然ゴムラテックスを使用していない。

2. 動作原理

本品を介して人工呼吸器等から送られてきたガスを患者に送る。

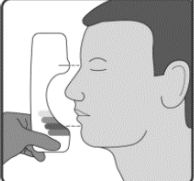
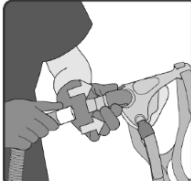
3. 仕様




作動圧範囲 : 4~25cmH₂O

【使用目的又は効果】


人工呼吸器等の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口を覆い、患者に人工呼吸器等から供給されるのガスを供給する。

【使用方法等】

1.  サイズガイドの青い直線が目の高さになるように顔の前であわせる。下唇の下に位置するマスクサイズ表示を確認し、正しいサイズのマスクを選択する。	2.  マスクを送気チューブのコネクターに接続する。
--	---

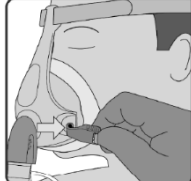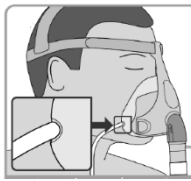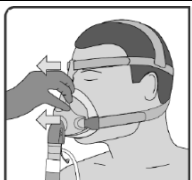3.  圧ラインを使用する際は、圧ラインポートに接続する。使用しない際は、圧力ポートに蓋をすること。	4.  緩めたヘッドギアを患者の頭に装着する。
5.  マスクにヘッドギアクリップを接続する。	6.  ヘッドギアの上側ストラップを調整する。
7.  胃管等のチューブが挿入されている場合は、胃管周辺での密閉性が保たれるように、マスクのチューブフィットにチューブを留置する。	8.  ヘッドギアの下側ストラップを調整する。
9.  ヘッドギアの頭頂部ストラップを調整する。	10.  マスクを手前に軽く引っ張り、顔にフィットするようにシール部を膨らませ、リークが最小限になるように調整する。

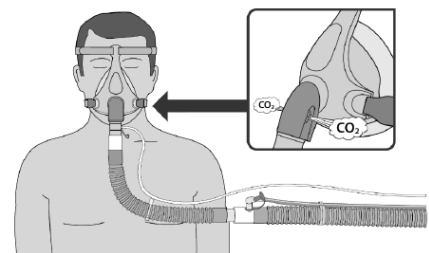
使用例



使用方法等に関連する使用上の注意

- 本品を加湿したガスと使用する際は、販売名「F&P 850 システム(認証番号: 220AABZX00338000)」または販売名「F&P 950 システム(認証番号: 304AABZX00061000)」と使用すること。
- 本品はシングル回路(本品には含まれない)を用い、人工呼吸器等の非侵襲的陽圧換気療法で使用すること。

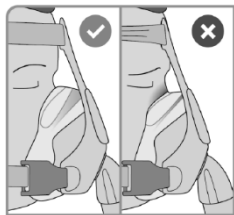3. 本品を使用の際は、呼吸ポート付アダプターを使用しないこと。
4. 加湿したガスを患者に送るためのパスオーバー式の加温加湿器と使用すること。
5. 窒息防止バルブの排気孔を塞がないこと。
6. 使用前に窒息防止バルブが正常に動くことを確認すること。
(人工呼吸器等からガスの流れがない場合は、窒息防止バルブの外部開口部から室内の空気がマスク内へ流入する仕組みになっている。人工呼吸器等からのガスの流れがある場合、窒息防止バルブの外部開口部が塞がり、送気されたガスがマスク内へ流入する。)
7. マスクの性能に支障をきたす場合があるため、本品のシリコンシーンを圧迫して使用しないこと。
8. ヘッドギアのストラップを締め付けすぎないようにすること。締め付けが強いと、患者が不快感を感じたり、褥瘡やリークが発生するおそれがある。



9. マスクフレームが額に直接当たらないよう注意すること。マスクフレームが額に当たっている場合は、ストラップを締めすぎているおそれがあるため調整すること。
10. 適切な密閉性を得るために、必要に応じてヘッドギアとマスクを再調節すること。
11. 人工呼吸器等から供給されるガスを使用すること。
12. 患者を適切にモニタリング可能な病院/医療施設内で使用すること。
13. 本品は窒息防止バルブを有するため、デュアル回路と使用する人工呼吸器で使用しないこと[デュアル回路を使用する人工呼吸器と併用すると、治療効果を損なうおそれがあるため]。
14. 呼吸ポートを塞いだり密封しないこと[過剰な二酸化炭素の再呼吸をまねくおそれがあるため]。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 患者に適切なサイズのマスクを使用すること。
2. マスクは併用している人工呼吸器等の医療機器が治療モードで動作している間のみ装着すること。
3. 本品の構成部品によるアレルギーが生じた場合には、専門医に相談すること。
4. 患者の顔を清潔に保ち、発赤や刺激、不快感の兆候がないか確認すること。これらの兆候が見られる場合は、専門医に相談すること。
5. 窒息防止バルブに不具合が生じたり、分泌物などで汚れた場合はマスクを交換すること。
6. 毛髪や欠損歯の有無、義歯、骨格がマスクの密着性に影響を及ぼすことがある。
7. 本品を使用する場合には患者が適切にモニタリングされていることを確認すること[モニタリングを怠ると、治療の中断、重篤な障害の原因になることがあるため]。
8. 使用前にすべてのアラームと安全システムを含む人工呼吸器等の治療装置が正しく機能し、適切な圧力を供給していることを確認すること。
9. 本品の長時間の使用により皮膚に刺激を認めた場合には、専門医に相談すること。
10. 本品を浸漬、洗浄、消毒/滅菌したり、アルコールを含む化学薬品、洗浄剤、手指消毒剤などを本品に接触させたりしないこと。
11. 火花や裸火の近くで使用しないこと[酸素供給機器の使用および酸素療法は火災のリスクを伴うため]。
12. 酸素療法中の喫煙は危険なため注意すること[火災による重症を負うおそれがあるため]。
13. 保湿剤や軟膏は酸素と併用可能と表記のあるもののみを使用すること[火災や火傷を負うおそれがあるため]。
14. 装着部、接続部、チューブまたはその他付属品に潤滑剤を塗布しないこと[火災や火傷を負うおそれがあるため]。

不具合・有害事象

1. その他の不具合
 - ・面ファスナー部の剥離、破損
 - ・面ファスナー部の接着力の低下
 - ・チューブフィット部分の破れ
 - ・ヘッドギアの破損
2. その他の有害事象
本品の使用において、次のような不具合・有害事象が発生した場合は直ちに適切な処置を行うこと。
 - ・皮膚の発赤、刺激、または不快感
 - ・異常な胸の不快感、呼吸困難、腹部膨満、げっぷ、激しい頭痛
 - ・歯や歯茎、顎の痛み、既存の歯の症状の悪化

妊婦、産婦、授乳婦及び小児への適用

本品は、体重 30kg 以上の患者を対象としている[体重が満たない患者に対する有効性・安全性の確認は実施されていない]。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管温度: -10～50℃

使用期間

1. 適切な保管方法で保管する時、製造日より 3 年(箱のラベルおよび直接の被包記載の製造年月日を参照)。
2. 本品は 14 日間を限度に新品と交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

製造販売業者

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社

電話番号 03-5117-7110

外国製造業者

Fisher & Paykel Healthcare Limited

フィッシャー・アンド・パイケル・ヘルスケア・リミテッド

ニュージーランド

Fisher & Paykel Healthcare S.A. de C.V.

フィッシャー・アンド・パイケル・ヘルスケア・エス・エー・デ・シー・ブイ
メキシコ合衆国

【販売業者(販売店)】

--