

機械器具 35 医療用はさみ
一般医療機器 歯科用金冠はさみ JMDN コード：31847000

S B カッティング シーザー

【禁忌・禁止】

ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療関係者及び患者には使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

形状、構造の違いにより以下の種類がある。


1. TC Smith カッティング シーザー



2. Beebee カッティング シーザー

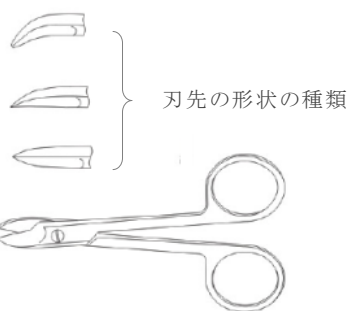

3. ユニバーサル カッティング シーザー

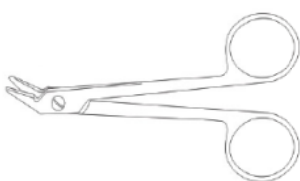

原材料：ステンレススチール

【使用目的又は効果】

直線又はカーブのついた短い刃を持つ歯科用の丈夫なはさみで、金属帯環、レジン材料やワイヤ等の歯科材料の切断に用いる。

【使用方法等】

1. 切断許容径

品番	切断許容ワイヤ径
SS-131-120TC	1.2mm (0.048") ソフトワイヤー

- 板状の金属製帯環を患者又は石膏模型の対象とする歯の外周に合わせて試適する。本品を用いて余剰部を切断して環状の帯環とする。
- レジン材料やワイヤ等で作成された歯列矯正用装置の余剰部を切断して仕上げの作業を行う。

【使用上の注意】

- 未滅菌の状態で納品されるので、使用前に必ず滅菌すること。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬すること。
- 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。また、ジョイント部やラックに過度の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管にあたっては、洗浄後の腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥後、乾いた場所に保管すること。
- 洗浄・滅菌済みの本品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検すること。
- 使用後は、直ちに洗浄液に浸漬して血液、体液、組織等の付着物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌すること。
- 汚染除去に用いる洗浄液は、pH が中性の洗剤もしくは溶液を、適正な濃度で使用する。

【洗浄】

- 洗浄前に余分な油分は使い捨てのペーパータオルでふき取ること。
- 洗浄は中性洗剤もしくは溶液を用いてブラシをかけ、本品の表面および接合部を十分行うこと。表面の状態を損ね、変色、錆、しみの原因となるおそれがあるため、インスツルメントの表面には研磨材入りクリーナーや剛毛ブラシは使用しないこと。また、腐食性洗浄剤は使用しないこと。
- 洗浄後は蒸留水で 3 分間すすぎ洗いし、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
- 自動洗浄機を使用する場合は、医療用器具等に適した洗浄機を使用すること。
- 自動洗浄後、本品に損傷もしくは腐食がないか確認すること。適切な専用オイルでジョイント部を潤滑しておくこと。

【滅菌】

- 複数の本品等の金属製品を滅菌する場合には、損傷の原因になることもあるので、互いに接触しないように注意すること。
- 132℃で 15 分のオートクレーブ滅菌を行うこと。温度は 137℃を超えないようにすること。
- 滅菌器メーカーの指示に従い滅菌器内に本品を配置すること。
- オートクレーブ滅菌の場合、使用する水の硬度を確認すること。過度の硬水は表面に沈着物を生じる場合があります。

【その他】

- 超音波洗浄器を使用する場合は、洗浄器メーカーや洗剤メーカーの使用説明書に従って使用すること。
- 一般的な潤滑オイルは使用せず専用のオイルを使用すること。
- 洗浄や消毒処理で長時間（夜通し・週末）放置しないこと。インスツルメント自体を損壊させるおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

フォレストデント・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂 2-10-12 生駒硝子ビル 2F
電話：03-6277-6980

製造業者：

ソビテック インスツルメント社（国名：パキスタン）
Sobytek Instruments Co.