

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 JMDN コード：70760000

S B インストルメント


【禁忌・禁止】

先鋭な形状であるため、取扱いに注意すること。


【形状・構造及び原理等】

本品の形状、構造は次のとおりである。

1. 石こう カーブ

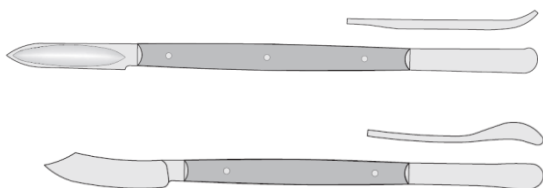

2. 石こう スパチュラ

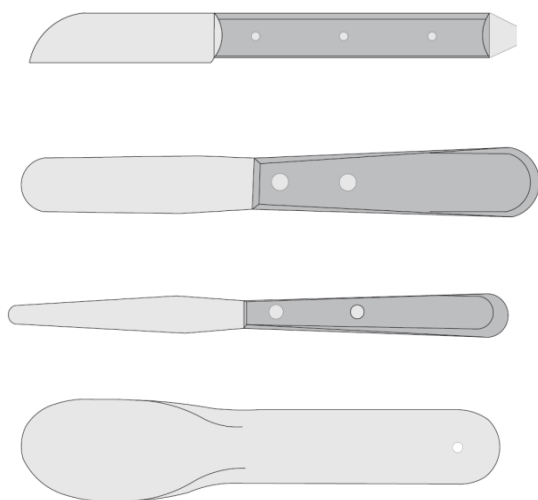

原材料：本品はステンレススチール製である。

【使用目的又は効果】

ワックス、石膏、レジン又はセラミックス等を築盛あるいは彫刻形成するために用いる器具。作業を容易にするために、補助的に種々の材料を併用することがある。

【使用方法等】

適切な種類のブレードを選択し、陶材を築盛あるいは彫刻形成する。

【使用上の注意】

1. 使用後は、薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬すること。
2. 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥後、乾いた場所に保管すること。
2. 洗浄・滅菌済みの本品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管をすること。

【保守・点検に係わる事項】

1. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検すること。
2. 使用後は、直ちに洗浄液に浸漬して血液、体液、組織等の付着物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌すること。
3. 汚染除去に用いる洗浄液は、pH が中性の洗剤もしくは溶液を、適正な濃度で使用する。

【洗浄】

4. 洗浄前に、余分な油分は使い捨てのペーパータオルでふき取ること。
5. 洗浄は中性洗剤もしくは溶液を用いてブラシをかけ、本品の表面および接合部を十分行うこと。表面の状態を損ね、変色、錆、しみの原因となるおそれがあるため、インストルメントの表面には研磨材入りクリーナーや剛毛ブラシは使用しないこと。また、腐食性洗剤は使用しないこと。
6. 洗浄後は蒸留水で 3 分間すすぎ洗いし、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
7. 自動洗浄機を使用する場合は、医療用器具等に適した洗浄機を使用すること。
8. 自動洗浄後、本品に損傷もしくは腐食がないか確認すること。

【滅菌】

9. 複数の本品等の金属製品を滅菌する場合には、損傷の原因になることもあるので互いに接触しないように注意すること。
10. 132℃で15分のオートクレーブ滅菌を行うこと。温度は137℃を超えないようにすること。
11. 滅菌器メーカーの指示に従い滅菌器内に本品を配置すること。
12. オートクレーブ滅菌の場合、使用する水の硬度を確認すること。過度の硬水は表面に沈着物を生じる場合があります。

【その他】

13. 超音波洗浄器を使用する場合は、洗浄器メーカーや洗剤メーカーの使用説明書に従って使用すること。
14. インストルメント自体を損壊させるおそれがあるため、洗浄や消毒処理で長時間（夜通し・週末）放置しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

フォレストudent・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F
電話：03-6277-6980

製造業者：

ソビテック インストルメント社（国名：パキスタン）
Sobytek Instruments Co.