

フォレストアデント ステンレススチール ワイヤ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品は以下の患者には使用しないこと：
 - ・ニッケル、クロムに敏感な患者
2. 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状


本品は、歯列矯正治療において歯牙のレベリングやアライメントの段階に応じて、予め設定されたアーチフォームを選択して、又は様々な形状に成型して使用する歯列矯正用ワイヤである。異なった形状があり、さらにラウンド、レクトなどの異なった断面プロファイルやサイズを有したものである。

原材料：ステンレススチール

1) アーチワイヤ

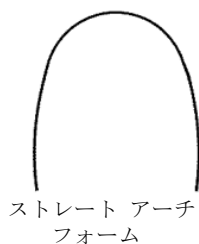

ストレート アーチ
フォーム

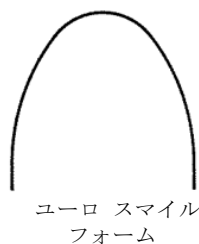

ユーロ スマイル
フォーム



ワイヤ アーチ
フォーム



スタンダード アーチ
フォーム

アーチ状のもの他にコイル状及びストレート（直線）状のものがある。

2) フォレストアデント プリフォーム アクセサリー




リテーナー クラスプ



ボールヘッドリテーナー
クラスプ



トライアングラー
クラスプ

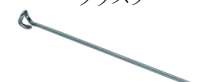


アイレット リテーナー
クラスプ



モラー リテーナー



プロトリュージョン
スプリング

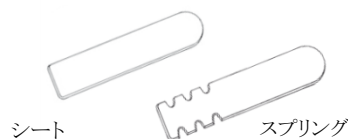

シート

スプリング

2. 構造

本品は歯列矯正治療においてその必要に応じて形状が選択され、ブラケットやバックルチューブ等と組み合わせて使用される。ワイヤは製造された本来の形状のままで、又は矯正歯科医によって個別の症例に合わせて変形させて装着される。また、補助的に他の矯正材料を保持するためにも装着される。ワイヤにより発現する矯正力が歯牙へ伝達されることで、患者の歯牙を正しい咬合位置に移動させることができる。

種類	断面	サイズ (インチ)
スチール アーチ	ラウンド スクエアー レクト	.016/.018
		.016x.016
		.016x.022/.017x.025
		.018x.025/.019x.025
フォレストフレックス	ラウンド スクエアー レクト	.015/.016/.018 .016x.016 .016x.022
フォレストアデント	ラウンド	.010/.020/.023/.028
		.031/.036/.039/.043
		.047
		.023/.028/.031/.036
フォレストアデント ニッケル フリー	ラウンド	.023/.028/.031/.036

アーチ状のワイヤの場合、装着時にワイヤの正中が確認できるようエッチングによる表示が施されている。

ワイヤ種類	上顎	下顎	表示
スチール アーチ	3点	1点	エッチング

3. 原理

本品は、ステンレススチール製の歯列矯正用ワイヤであり、不正咬合を治療改善する過程で歯牙を正しい咬合位置に移動するために、適切な形状のワイヤを選択し、設定された形状へ復元する力を矯正力としてブラケット等のアタッチメントに付与するために使用される。

【使用目的又は効果】*

歯の移動又は維持のために歯に力を加えること。

【使用方法等】＊

1. 歯面に固定されたブラケット、又はバックルチューブの種類、構造、スロットサイズ等を確認し、歯牙矯正治療のレベリングやアライニング等の進行状況に合ったワイヤーを選択する。
2. 必要に応じて矯正用プライヤー、カッター等を用いて選択したワイヤーを適切な形状に調整する。
3. ワイヤースロットへ矯正用プライヤーを用いて正しく装着する。
4. 必要に応じて結紮用材料によりワイヤーを固定する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - 2) 本品にはニッケル、クロム等が含まれており、ごく少数ですがこれらの金属に対してアレルギー反応を起こす人がいます。アレルギー反応が生じた場合、使用を中止し、直ちに患者に医師の診断を受けるように指示すること。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - 2) 本品は使用前、酸及びアルカリ類と一緒にしてはならない。
 - 3) 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - 4) 【貯蔵・保管方法】に記載されていない保管方法による製品の劣化、又は不具合の発生は、全て術者の責任となります。
 - 5) 【操作方法又は使用方法等】に記載されていない使い方による破損、欠け、脱落、錆、曲がり等の不具合の発生は、全て術者の責任となります。
 - 6) 誤ったサイズのワイヤーの使用により治療効果が得られない場合があるため、ワイヤーの装着前に必ず確認すること。

【保管方法及び有効期間等】＊

〔保管方法〕

1. 歯科の従事者以外が触れないよう術者の責任のもとに適切に保管・管理すること。
2. 水、湿度、塩分やイオン分を含んだ空気などにより、悪影響が生ずる恐れのない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売元：

フォレストudent・ジャパン株式会社
**東京都港区赤坂 2-10-12 生駒硝子ビル 2 階
**電話：03-6277-6980

製造元：

FORESTADENT Bernhard Forster GmbH
(フォレストudent バーンハー ドフォー スター社)
国名：ドイツ