

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント JMDN コード 41059000
フォレストデント クイックリアー ブラケット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本材はニッケル及びクロムを含有しています。ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品は、ブラケット本体とベース部で構成され、他の歯列矯正材料と用いて矯正力を付与するために、ワイヤースロット、クリップ、ウィング、フック（フックは無いものもある）を備えている。ブラケット本体には、ワイヤースロットに装着された歯列矯正用ワイヤを保持するための可動式クリップが組み込まれている。




以下の種類で構成される。

- (1) クイックリアーⅢ ロス システム *
- (2) クイックリアーⅢ M/B/T システム *
- (3) クイックリアーⅢ F A C E システム *

<カラーマーク> *

クイックリアーⅢ ロス システムはウィング間(点線枠内)に丸い(●)ドットにて表示
クイックリアーⅢ M/B/T システムはウィング間(点線枠内)に三角(▲)のドットにて表示
クイックリアーⅢ F A C E システムはドット表示なし

2. 原材料

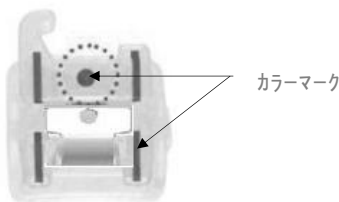

ブラケット本体：アルミナセラミックス
クリップ：コバルトクロム合金

3. 原理

本品は、セラミック製の歯列矯正用ブラケットであり、歯科用の接着材により歯牙表面に接着され、ワイヤースロットに装着された歯列矯正用ワイヤにより矯正力を助長することで歯牙を所定方向に移動させるものである。装着された歯列矯正用ワイヤは、結さつ材を用いずに組み込まれた金属製のクリップにより保持されることで、ワイヤースロットとの摩擦抵抗が軽減されるため、効率的な矯正力の伝達を可能にしている。

【使用目的又は効果】


歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

1. 患者に合ったブラケットを選択する。
2. 市販の歯科用接着剤の使用 방법에従い、歯面に直接接着する。
3. 接着材が十分に硬化した後、専用のクイックダイレクターを用いてスロットカバーを開け（以下の2種類の方法がある）、ブラケットスロット部にワイヤを通し、指でクリップをスライドさせて閉める。


開く方法①：

前庭側より、開閉孔に専用ツール等を引っ掛け、クリップをスライドさせて開ける

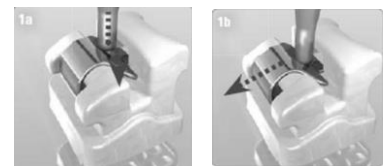

開く方法②：

歯肉側より、専用ツール等で突起を押しながらスライドさせて開ける

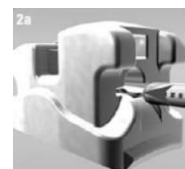

閉める方法：

指でクリップをスライドさせて押し込む



4. ブラケットの取り外し

- 1) ブラケットの取り外し方: 専用のディボンディングツール (品番: C501-0815*, 製造販売届出番号: 13B2X10094F00001) を使用して、ツールの柄が咬合面と平行になるようにしながら先端部のブラケット保持部をブラケットに差し入れ、ツールの遠心側の柄を歯面側へ倒して取り外す。

専用のディボンディングツール* 先端部のブラケット保



ツールの遠心側の柄を
ブラケットを保持した状
歯面側へ倒す



- 2) 残留接着材の除去: ブラケット撤去後に残った接着材を適切なバーを用いて低速で除去する。

[クリップ開閉時の注意事項]

- 1) 前庭側よりクリップの開閉孔を利用して開ける場合、歯面に対して上方にクリップを引き上げないこと。
- 2) 歯肉側より専用ツール等で突起を押して開ける場合、過度の力を加えないこと。クリップが脱落するおそれがあります。
- 3) ワイヤ交換をする際には、クリップの開閉作業を行う前にブラケットの清掃を行うこと。

【使用上の注意】

1. 部分が修復された歯牙、栓状歯、及び先天的にエナメル質が不完全な歯牙にブラケットを装着するとエナメル質に損傷を与える可能性が大きくなります。
2. 装着されたブラケットの取り外しは、破損、欠け、エナメル質損傷の原因となるため、専用のディボンディング ツールを使用し、指定された手順で正しく行うこと。
3. 治療効果が得られない、又は悪い結果を招くことがあるのでサイズの合わないワイヤー等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

フォレストアデント・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂二丁目10番12号
生駒硝子ビル2階
電話: 03-6277-6980

製造元:

FORESTADENT Bernhard Forster GmbH
(フォレストアデント バーンハーフォースター社)
国名: ドイツ