

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用エッチング材 JMDN コード 36153000

V-ETCH

再使用禁止 (先端チップ)

【禁忌・禁止】

- ・本材の、粘膜、皮膚及び眼への接触を避けること。
- ・再使用禁止 (先端チップ)

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状

1) シリンジパック



2) バルクパック (補充用)



(2) 構造

青色粘稠性の液体である。

(3) 原材料

本材は次の成分で構成される。

成分名：リン酸、精製水、ポリプロピレングリコール、その他。

(4) 原理

歯列矯正の際、本材により歯面のエナメル質を脱灰して粗造化した後、接着剤により歯面に歯列矯正用アタッチメント等の歯列矯正用具が合着される。

【使用目的又は効果】

歯又は歯科修復物のエッチング (技工専用を除く。) に用いること。

【使用方法等】

1. シリンジパック


- 1) 歯面を清掃し、水洗いする。
- 2) エアーで歯面を十分に乾燥させる。
- 3) 先端チップをシリンジに装着する。
- 4) 周囲の軟組織、歯牙にふれないよう、エッチングを行う部位に、直接本材をゆっくりと押し出し、15 秒間放置する。
- 5) 15 秒後、油分を含まない水で十分に水洗いする。
- 6) 油分や水分を含まないエアーで、エッチング部位を十分に乾燥させる。エッチングされた歯面が白濁していることを確認する。

(※)エッチング処理後に使用する接着材は、本品の対象範囲外である。


2. バルクパック

- 1) 術者は、保護メガネと保護手袋を着用する。
- 2) バルク容器のキャップを取る。
- 3) 図 1 のように、空のシリンジをバルク容器の先端に、時計回りに回転させながら、装着する。
- 4) 図 2 のように、空のシリンジの押し出し部をゆっくりと引き、バルク容器から本材を充填する。同時に、バルク容器の押し出し部を軽く押す。この時、シリンジに過剰に本材を充填しないこと。

【図 1】

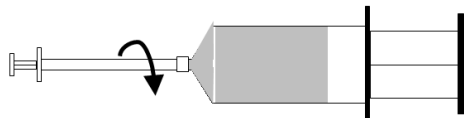

【図 2】

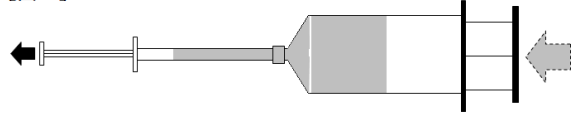

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 使用時、外観や形状等に異常がないことを確認し、使用すること。
- 2) エッチング後に歯面が唾液等で汚染されないように注意すること。汚染された場合は再度エッチングを行うこと。
- 3) エッチングが正しく行われた行われたかどうかを、処理部のエナメル質の白濁の有無で確認すること。必要に応じ、【使用方法等】の 1. 1) ～ 6) の手順を再度繰り返すこと。
- 4) 使用後は先端チップを取り外し、キャップを閉めて保存すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本材の使用により発疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 本品の接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、保護手袋や保護メガネの着用等、適切な防護処置を行うこと。
- 3) 本品が口腔軟組織・皮膚に付着したり、眼に入らないように注意すること。誤飲に注意すること。皮膚に付着した場合には、石鹸と水で洗浄すること。眼に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けさせること。
- 4) 先端チップは、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は 2 ～ 27℃ で、キャップを閉めて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように、術者の責任のもとに適切に保管・管理すること。
- 3) 温度が上昇する所、太陽光や強い光が当たる所には置かないこと。

【有効期間】

シリンジラベルに表示されている使用期限以内に使用すること。



※例) XXXX-YY-ZZ は、使用期限 XXXX 年 YY 月 ZZ 日を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

フォレストデント・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂二丁目 10 番 12 号
生駒硝子ビル 2 階
電話：03-6277-6980

製造業者：

Vericom Co. Ltd. (ヴェリコム社)
国名：韓国