

器51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 気管支バルーンカテーテル 17827000  
(管理医療機器 非コイル形換気用気管チューブ 140850320)

「気管支用止血バルーン」の付属品  
スタイレット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、気管支用止血バルーンの付属品である。

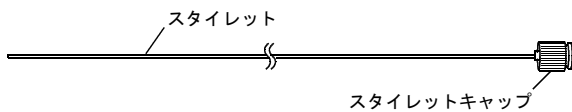

〈材質〉

| 各部の名称  | 原材料   |
|--------|-------|
| スタイレット | ステンレス |


本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

本品は、クライオ生検において止血を目的としたバルーン閉塞法に使用されるバルーン付きカテーテルである。さらに、気道の確保や吸入麻酔薬・医療用ガスの投与、換気などの目的で経口的に気管内に挿入して使用される。

【使用方法等】

1. 操作方法  
本品はディスポーザブル製品であり、一回限りの使用のみで再使用できない。
2. 一般的使用方法  
1) 滅菌包装より丁寧に取り出し、破損等が生じていないことを確認する。  
2) バルーンカテーテルの三方活栓より挿入し、標的となる気管支までの誘導性を考慮し、必要に応じてバルーンカテーテル先端側を30～40°程度屈曲させる。
3. 使用方法等に関連する使用上の注意  
1) スタイレットを抜去する場合は、目的位置への誘導後、閉塞用バルーンを拡張させる前に抜去すること。  
2) バルーンカテーテルの三方活栓には閉塞用バルーンのパルプが具備されているため、スタイレットを抜去した際は必ずコック操作を行い、コックの向きがスタイレット抜去時(下図参照)の位置になっていることを確認すること。[コック操作を行わず閉塞用バルーンを拡張させると、注入した空気が抜けてしまい、拡張状態を維持できない]

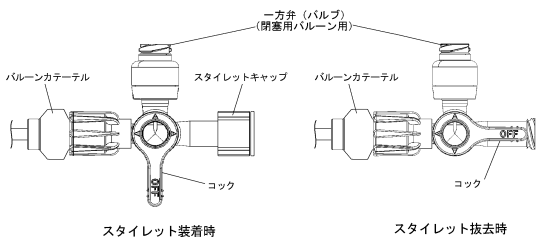

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
1) 本品は「気管支用止血バルーン」(承認番号:30800BZX00119000)と組み合わせて使用すること。[これ以外の組み合わせ、あるいは単体使用では機能しない]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間  
使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社  
TEL 03-5689-1927