


機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー (16350000)

ジーシー バイトトレー

【形状・構造及び原理等】

形状	カラー	材質
リップサポートを有する頬側部と、舌側部からなるプラスチック製トレー	白色	頬側部：ポリカーボネート 舌側部：ポリカーボネート ストッパー：シリコーン樹脂

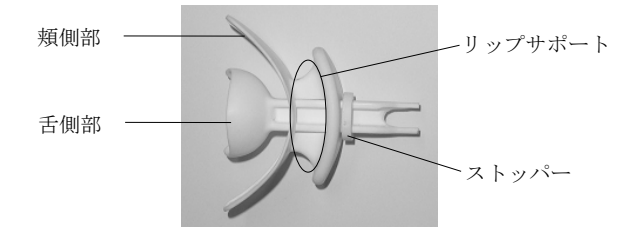

構造
ポリカーボネート製の頬側部と同材質の舌側部を有し、シリコーン樹脂製のストッパーを有する。

原理
頬側部と舌側部の間に印象材を盛り、口腔内の印象を採得する。

【使用目的又は効果】

印象採得（無歯顎）時に印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具である。

【使用方法等】

- 1) 使用前に必ず滅菌を行います。滅菌はオートクレーブ、ケミクレーブにて行います。オートクレーブは 115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分のいずれかの条件で行います。ケミクレーブは製造業者の指示に従って使用します。
- 2) トレー上に刻印された GC のロゴ面が上になるように、無歯顎の患者の口腔内にトレーを試適し、挿入位置を確認します。
- 3) ねつ和したパテタイプの印象材（ジーシー エクザファインパテタイプ等）を頬側部と舌側部の間に盛り付け、リップサポートが患者の唇の位置にくるよう口腔内に挿入します。
- 4) 次に患者に口を閉じてもらい、印象材が硬化した後、口腔内から撤去します。
上顎と下顎の印象を分けて行う場合は、上顎から最初に印象採得した後、下顎の印象を採得します。
- 5) 印象採得完了後、トレーを口腔内から撤去します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 患者の嘔吐反射をもたらし恐れがあるため、盛る印象材の量、緩さを適切にすること。また、印象採得中は患者の状態に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①使用前に必ず製品の点検をすること。
 - ②破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
 - ③破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。

- ④頬側部と舌側部をスライドさせた際、連結部などで、手指などを怪我しないように注意すること。
- ⑤印象材除去の際には、本品の表面に傷を付けないように行うこと。
- ⑥本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑦本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑧廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管する。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をする。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理する。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後、洗剤を用いて洗浄し、使用前と同条件で滅菌する。

【使用者による保守点検事項】

- ・再使用する際には、使用後できるだけ早く、清掃液を用いて付着物を除去し、滅菌を行う。
- ・乾熱滅菌、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤は使用しない。
- ・清掃液・滅菌器については、各製造業者の指示に従い、正しく使用する。
- ・使用後洗浄する際、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・頬側部、舌側部、ストッパーに分解してから、各々を洗浄、滅菌すること。
- ・洗浄後は精製水で充分すすぎ、乾燥させること。
- ・乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：プレミアムプラスジャパン株式会社

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480