


マイクロモーター (PRIME SENSE A7)

【禁忌・禁止】

埋込み型心臓ペースメーカーを装着している患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

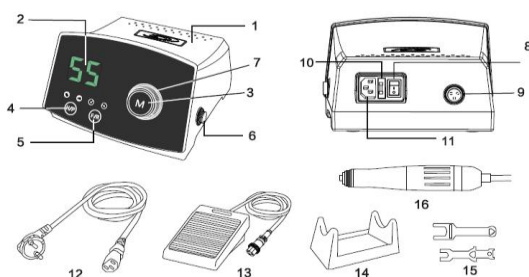

①	本体
②	RPM 表示
③	スピードコントロールダイヤル モーターON/OFF ボタン
④	マニュアル/フット切替ボタン
⑤	正逆回転切替ボタン
⑥	ハンドピース接続口
⑦	回転方向インジケータ
⑧	電源スイッチ
⑨	フットコントロール接続口
⑩	ヒューズホルダー
⑪	電源コード接続口
⑫	電源コード (PRIME SENSE A7 専用)
⑬	フットコントロール
⑭	ハンドピースホルダー
⑮	工具セット
⑯	ハンドピース

【使用目的又は効果】

歯科技工で用いる歯科用バー、リーマ等の回転器具を接続するための歯科用器具

【使用方法】

- ① 本体の電源が入っていないことを確認し、電源コード、フットコントロール、ハンドピースを接続する。
- ② 【マニュアルで操作するとき】
 - ・スピードコントロールダイヤル(③)を反時計回りに回し切って“0”にする。
 - ・電源スイッチを押すと、スイッチ部分が緑に光り、電源が ON になる。
 - ・ハンドピースをしっかりと把持しながら、右図のようにスイッチを右回転させてバーをロックする。

- ・マニュアル/フットスイッチ切替ボタン(④)でマニュアルモードになっていることを確認する。
- ・モーターON/OFF ボタン(③)を押して、モーターを起動します。
- ・正逆回転方向は、回転方向インジケータで確認する (⑦)。右回転の時は赤色、左回転の時は緑色に光ります。
- ・回転方向を変更する場合は、正逆回転切替ボタン(⑤)を押す。
- ・ゆっくりとスピードコントロールダイヤル(③)を回して回転速度をあげていく。

③ 【フットコントロールで操作するとき】

- ・スピードコントロールダイヤル(③)を時計回りに回し切る。
- ・電源スイッチを押すと、スイッチ部分が緑に光り、電源が ON になる。
- ・マニュアル/フットスイッチ切替ボタン (④) でフットコントロールモード になっていることを確認する。正逆回転方向は、回転方向インジケータで確認する (⑦)。右回転の時は赤色、左回転の時は緑色に光ります。
- ・回転方向を変更する場合は、正逆回転切替ボタン(⑤)を押す。
- ・フットコントロールをゆっくりと踏んで、回転速度を調整する。

(4) 使用後はハンドピースの回転を止めてから、本体の電源を切る。

**【使用上の注意】

- (1) 使用環境に注意して下さい。水でぬれている場所や湿度が高い場所また換気の悪い場所でハンドピースを使用しないこと。
- (2) 回転速度は、使用するバーの取扱い説明書に従うこと。
- (3) 回転速度を変更する時は、本体のスピードコントローラーをゆっくり回すこと。
- (4) まずは低速回転で異常がないことを確認した後に、回転速度を上げること。
- (5) 埋込み型心臓ペースメーカーを装着している患者には使用しないこと。
- (6) バーが回転時にバーの交換を行わないこと。
- (7) マイクロモーターを落とすなどして衝撃を与えないこと。
- (8) マイクロモーターが完全に止まってから置くこと。
- (9) 保護マスク及び保護眼鏡を着用して下さい。また、サクシジョンユニットやベンチレーターを併用して下さい。
- (10) 電源ケーブルや電源プラグ等に異常がある時は使用しないこと。
- (11) ハンドピース、フットスイッチは付属のものを使用すること。
- (12) 付属の電源コード以外は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水分(水漏れ)、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) ハンドピースを清掃する場合は、イソプロパノール等で拭くこと。液体を直接噴霧したり、液体に浸けたりしないこと。
- (2) 使用前に回転させ、振動・音・発熱等の異常がないことを確認すること。(毎回行うこと。)
- (3) 使用しない時もバー等を装着しておくこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：TIANJIN RENHE JUNCHENG TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,LTD
(国名：中国)

取扱説明書を必ずご参照ください