

器 48 注射筒
一般医療機器 歯科麻酔用注射筒 JMDN コード 35969000

カートリッジシリンジ

【警告】

本品は患者ごとに洗浄・滅菌すること。


【禁忌・禁止】

- (1) 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- (2) 本品の材質に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある医療従事者および患者への使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：

＜浸潤麻酔用＞

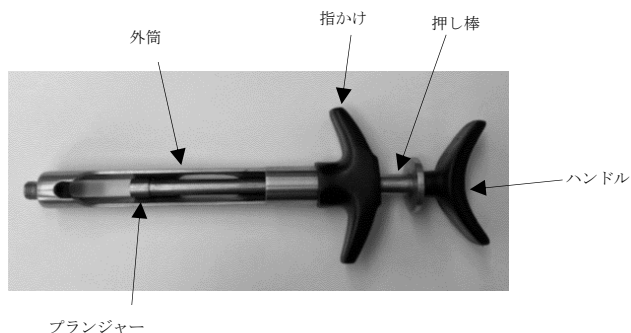

材質：黄銅、プラスチック

【使用目的又は効果】

プレフィルドカートリッジ及び滅菌針を用いて歯科用局所麻酔薬を投与するために用いる歯科用器具をいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- (1) 押し棒をいっぱい引き、外筒の挿入口後部からカートリッジを装填する。装填するカートリッジは後方から装填すること。
- (2) 注射針を装着する。
- (3) 液を 2～3 滴、滴下させた後、注射を行う。
- (4) 注射終了後、注射針を外す。ハンドルをいっぱい引き、カートリッジを取り出す。

【使用方法に関する使用上の注意】

- (1) 注射針又はカートリッジを確実に装着すること。本品に適合しないものは使用しないこと。
- (2) 洗浄液等が漏れていないことを確認すること。
- (3) 押し子はまっすぐ引き、まっすぐ押すこと。
- (4) 使用中も注射針又はカートリッジが適切に装着されていることを確認すること。
- (5) 使用前に押し棒がスムーズに動くこと、押し棒の先端がぶれずに動くことを確認すること。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に高圧蒸気滅菌すること。(134℃/4 分)
- (2) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (3) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- (4) 過度に圧をかけて使用しないこと。
- (5) 液漏れの原因となるので、押し子を引きすぎないこと。
- (6) 手袋を着用して使用すること。
- (7) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (8) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (9) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Metro Medical
(国名：パキスタン)