

レジンポリッシングストリップス

【禁忌・禁止】

レジンポリッシングストリップスの再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

【形状】

レジンポリッシングストリップス



レジンポリッシングストリップホルダー

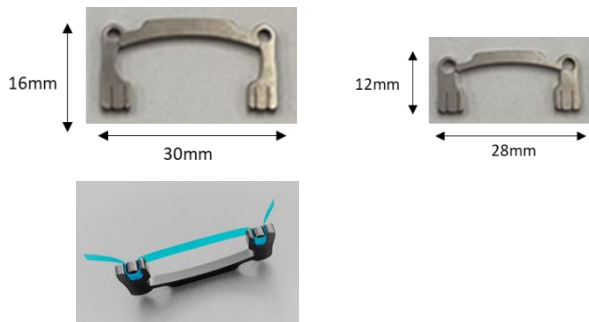

レジンポリッシングストリップス

タイプ	カラー	サイズ
ミディアム	ピンク	4 mm×6m
ファイン	ブルー	4 mm×6m
エクストラファイン	オレンジ	4 mm×6m
ミディアム	ピンク	2.5 mm×6m
ファイン	ブルー	2.5 mm×6m

【材質】

レジンポリッシングストリップス：

ポリエチレンテレフタレート、酸化アルミニウム、着色剤

レジンポリッシングストリップホルダー：

ステンレススチール

【使用目的または効果】

本品は、研削粒子が片面にコーティングされた歯科用ストリップスで、
歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

【使用方法等】

- ケースから必要な長さを引き出し、ハサミ等で切り取る。

- 歯牙の歯間部に挿入し、左右に動かし研削する。
- ホルダーを使用する場合、ホルダーのスリット部にストリップスを装着し、歯牙の歯間部に挿入し、左右に動かし研削する。ストリップスの装着が浅く短い場合、使用中に外れることがあるので、注意すること。

【使用上の注意】

<レジンポリッシングストリップス>

- 再使用禁止。
- 破損、劣化、変形がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

<レジンポリッシングストリップホルダー>

- 使用前に洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して形状変更等の二次加工を行うことは破損の原因になるので行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

<レジンポリッシングストリップス>

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

<レジンポリッシングストリップホルダー>

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中損傷しないように注意すること。
- 錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前は破損、ヒビ、劣化等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

<レジンポリッシングストリップホルダー>

- レジンポリッシングストリップホルダーの滅菌温度は 135℃以上にしなすこと。
- 滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。
- 洗浄の際、クレンザー、金ブラシ、金属ウールは、錆び、キズの原因となるので使用しなすこと。
- 超酸性水等は金属を腐食させることがあるため使用しなすこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社

電話番号 06-6845-0066

製造業者：Tangshan Zhengtong Exhibition Co., Ltd

(国名：中華人民共和国)