

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 JMDN コード 70459000

フレキシデュアルフローイリゲーションニードル

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

ない清潔な場所に保管すること。

(2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【形状・構造及び原理等】

形状：

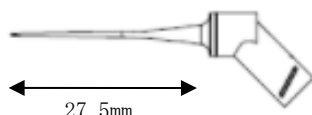

材質：ポリプロピレン

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Shenzhen Denco Medical Co., Ltd. Huizhou
branch
(国名：中華人民共和国)

【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の洗浄などに用いる。

【使用方法等】

- (1) 使用前に本品を洗浄、消毒する。
- (2) 本品をシリンジの先端に挿入し、確実に固定する。
- (3) シリンジから洗浄液を押出しながら、口腔、歯髄腔、根管等を洗浄する。

【使用方法に関する使用上の注意】

- (1) 洗浄する根管の長さを確認し、ニードルを適切な位置に配置するため、本品記載の 18mm、19mm、20mm、22mm の長さ表示を使用すること。
- (2) ニードル部先端側の孔から洗浄液が一定に吐出するよう、針が自由に動くことを確認すること。
- (3) 洗浄液が漏れていないことを確認すること。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 破損、摩耗、腐食、変形、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌しないこと。
- (4) 洗浄の際は、1 分以上、流水下で十分な量の水を流し通して行うこと。
- (5) 消毒の際は、次亜塩素酸ナトリウム 5.25% 溶液への 1 分間の浸漬および 70% イソプロピルアルコール (IPA) による清拭を行うこと。
- (6) 過度に圧をかけて使用しないこと。
- (7) 安全のため、保護手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- (8) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (9) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (10) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受け