


機械器具 17 血液検査用器具 凝固測定用経過時間タイマ 35505000 一般医療機器 ヘモクロン Jr.シグニチャー+

【形状、構造及び原理等】

製品外観図

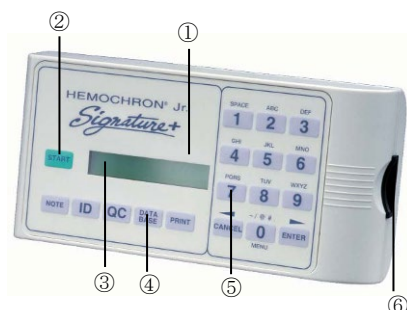

番号	各部名称
①	外装
②	スタートキー
③	液晶ディスプレイ
④	アクションキー
⑤	テンキー／文字入力キー
⑥	専用カートリッジ挿入口

* 1. 構成

本品は、本体と本体付属品から構成される。
本品と専用カートリッジ（販売名：ヘモクロン テストカートリッジ(JACT+ / JACT-LR)、医療機器製造販売届出番号：13B1X00161000014）を用いて、ACT（Activated Clotting Time：活性化凝固時間）を測定することができる。また、専用カートリッジ（販売名：ヘモクロンPTカートリッジ、体外診断用医薬品製造販売承認番号：22400AMX00774000）を用いて、PT（Prothrombin Time：プロトロンビン時間）を測定することができる。

<付属品>

- ・ ACアダプタ
- ・ ヘモクロンJr.点検セット [ヘモクロン温度点検用カートリッジ(TQC)、ヘモクロン電気系統点検用カートリッジ(EQC)：2種]
- ・ 取扱説明書
- ・ モバイルプリンタセット（オプション）

2. 本体寸法及び重量

本体寸法：W 190×L 90×H 50 (mm)

本体重量：0.6 (kg)

3. 電氣的定格及び分類

- 1) 交流電源 AC 100V, 50又は60 Hz
- 2) 電池電源 DC 8.4 V（ニッケルメタル水素電池）
- 3) 電撃に対する保護の形式による分類：
クラスII、内部電源装置
- 4) 電撃に対する保護の程度による装着部分類：非該当

4. 動作原理

血液凝固に伴う粘度変化を物理的抵抗の変化で測定する。全血試料を加えると、正確に15 µLが検査用チャネルに入り、測定に不要な残りの試料は廃棄用チャネルに流れ込む。試料と試薬は混和され自動的に測定が開始される。試薬と混合された後、試料は検査用チャネル内を前後に動き、クロット形成がモニターされる。クロット検出機構はカートリッジ挿入口に並んだLED光センサからなる。光センサの間を移動する速度が測定される。クロット形成が始まると血液の流れが妨げられ移動が

遅くなる。予め設定されたスピードを下回ればクロットが形成されたと判定される。

**5. 電磁両立性 (EMC)

本品は電磁両立性規格(JIS C 1806-1: 2010)に適合する。

6. 動作環境

- 1) 本品の使用環境温度は15～30℃である。
- 2) 本品は、必ず水平な場所に置いて測定すること。

【使用目的又は効果】

本品は、時間の長さを計測・表示するために用いる装置で、全血で凝固に要する時間を自動的に表示、記録するものである。

【使用方法等】

1. スタートキーをしばらく押し続けるか、又はカートリッジを挿入して起動する。
2. 本装置側面の差込口に、カートリッジをサンプルウェルが上になるように挿入する。自動的にカートリッジの種類を判別し、画面に表示される。
3. 装置がカートリッジを 37±1℃ に加温する。
4. 加温中、画面にエラーメッセージが表示されていないことを確認する。
5. 本装置の準備が完了すると、ピープ音を発して知らせる。画面には「Add Sample」、「Press Start」のメッセージが交互に表示され、5 分間のカウントダウンが開始される。
6. 血液検体を採取する。
7. 直ちにカートリッジのサンプルウェルに血液を 1 滴（15 µL 以上）、底から満たす。このとき、注射針を使っても使わなくても構わない。血液の 1 滴が大きく、サンプルウェルから溢れる時には、余分の血液を外側のウェルに移す。
8. スタートキーを押す。ピープ音が鳴り、検査が開始される。画面は経過時間（秒）を表示して、検査が開始したことを示す。
9. 検査が終了すると、装置はピープ音を発して知らせる。
10. 凝固が検知されると、検査の最終結果が画面に表示され、データが保存される（最大 400 件）。
11. 装置の電源を OFF にするには、カートリッジを取り外し、0（ゼロ）を押してメインメニューを表示し、そして 4 を押す。又は、数秒間スタートキーを押し続けること。何も操作しない場合には、5 分後に自動的に電源が OFF になる。

<検体の採取>

組織トロンボプラスチン、留置静脈ライン内(I.V.)の溶液又はアルコール清拭液は血液凝固検査を妨げるので、血液凝固検査に用いる血液検体は、これらが混入しないように採取すること。適切に採取されなかった検体や、凝固や残片が見られる検体は捨てること。シリンジを用いる場合は、23 ゲージ以上の注射針を用いること。注射針を使用して検体を注入する場合、溶血を防ぐためにそつと行うこと。

<使用方法に関連する使用上の注意>

1. 検体採取はガラス製の採血器具を使用しないこと。
2. ヘパリン加アクセスライン、ロックあるいは留置ヘパ

取扱説明書を必ずご参照ください。

リンロックから検体を採取しないこと。〔ヘパリンが混入すると凝固時間が延長するため〕

3. 留置血液ラインより検体を採取する場合は、各施設の手順に従ってアクセスポートをフラッシュすること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 測定値は、血液希釈、心筋保護液、低体温、血小板機能不全、低フィブリンゲン血症、その他の凝固障害及び特定の薬物により影響を受けるので、予想外の値が得られた場合、他の測定方法で充分検討し評価すること。
2. バッテリーのレベルが低下し、装置を充電するときには、AC アダプタを接続して充電すること。
3. AC アダプタが装置に接続されていないときでも、AC アダプタを電源に差し込んだままにしておくことができる。しかし、バッテリー充電時や装置使用時以外は、AC アダプタを電源のコンセントから抜いておくことを推奨する。
4. カートリッジを無理に装置に押し込まないこと。もし、挿入時に抵抗があればカートリッジを静かに取り出し、カートリッジの差込み口を調べ、障害物があれば取り除くこと。
5. スタートキー及びその他のキーを過度の力で押さないこと。
6. しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常かつ安全に動作することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法：

- 1) 結露させないこと。
- 2) 本品を 37℃ 以上の場所に置かないこと。

2. 有効期間：

本品の耐用期間は5年である。
(自己認証【当社データ】による)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 装置が正確で信頼性の高い性能を維持するように、ヘモクロン温度点検用カートリッジ(TQC)、ヘモクロン電気系統点検用カートリッジ(EQC)等を用いて、日常の点検や定期的な点検を実施すること。

**2. 業者による保守点検事項

- 1) 保守点検を 2 年に 1 回に受けること。また、バッテリーは消耗品であるので、2 年に 1 回、定期点検時に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：平和物産株式会社

住所：東京都千代田区丸の内 2-2-1

電話番号：03 (3287) 0731

**製造業者：Accriva Diagnostics, Inc.

(アクリバ ダイアグノスティックス インク)

製造業者国名：アメリカ合衆国

v01