

器17 血液検査用器具
一般医療機器 自動染色装置 70191000

特定保守管理医療機器 **ベンタナ ベンチマーク GX**

【禁忌・禁止】


1. この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
2. 検査を開始する前に、装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実にセットされていることを確認する。
3. 傾斜のある場所では、装置が転倒するおそれがあるため、使用や保管は避ける。
4. 本装置を移動する場合は、電源スイッチを切ってから行うこと。
5. 直射日光があたる場所や空調機吹出し口の真下への設置は避ける。
6. 熱や蒸気の発生源となるものは、近くに置かない。

詳細な使用上の注意は、取扱説明書を参照する。

**【形状・構造及び原理等】

1. 構造

本装置は、本体(染色モジュール、バッファーモジュール、廃液モジュール)と、コントロールシステム(コンピュータ及びディスプレイ)から構成されます。

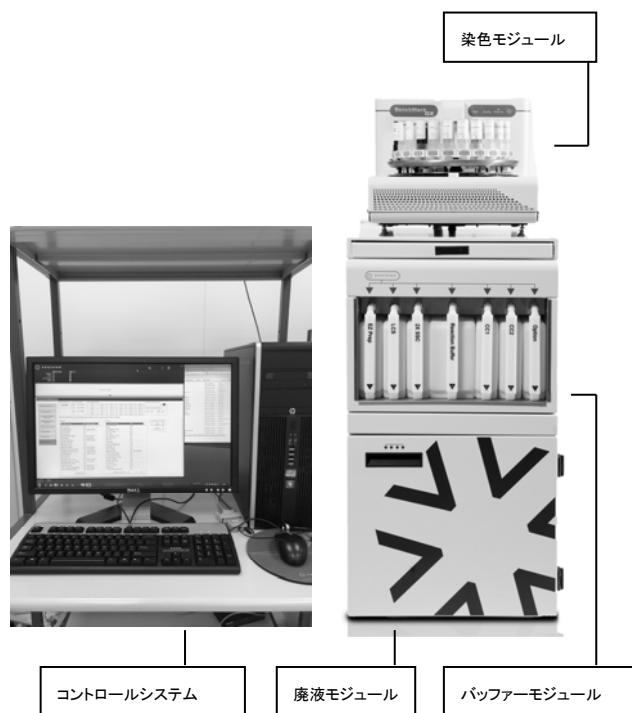

バッファーモジュールは次の 7 種類のバッファータンクからなります。

EZ バッファー (3L)、液体カバースリップ HI (3L)、SSC バッファー (3L)、リアクションバッファー (6L)、CC1 バッファー (3L)、CC2 バッファー (3L)、オプション (3L)

2. 外形寸法・質量

(1) 本体

① 染色モジュール

外形寸法:41.3 cm(幅)×55.9 cm(奥行き)×34.9 cm(高さ)
質量: 25 kg

② バッファーモジュール及び廃液モジュール

外形寸法:50.8 cm(幅)×54.6 cm(奥行き)×96.5 cm(高さ)
質量: 44.6 kg

(2) コントロールシステム

(一般的なラックを使用した場合)

外形寸法:60 cm(幅)×68 cm(奥行き)×150 cm(高さ)
質量: 総計 約 15 kg

3. 電流電圧・消費電力

(1) 本体

定格電圧: AC100 V

周波数: 50/60 Hz

電源入力: 8 A

(2) コントロールシステム

(仕様は変更される場合があります)

定格電圧: AC100~120 V

周波数: 50/60 Hz

電源入力: 6 A


4. 作動・動作原理等

(1) スライドヒーター(スライドの温度管理)

染色モジュール内に 20 個のスライドヒーターが搭載されています。処理温度設定範囲は 37℃~100℃です。20 個のスライドヒーターは個別管理であるため、それぞれ異なったプロトコルをランダムアクセスで処理することが可能です。

(2) 液体カバースリップ HI(反応液の蒸発防止)

免疫染色中は、通常、スライドヒーターを一定の温度に保ち反応させています。このときに、スライド上の反応液表面を液体カバースリップ HI による皮膜でカバーします。その結果、組織の乾燥や反応液の蒸発を防ぐと共に、反応液表面の温度を一定に保つことができます。

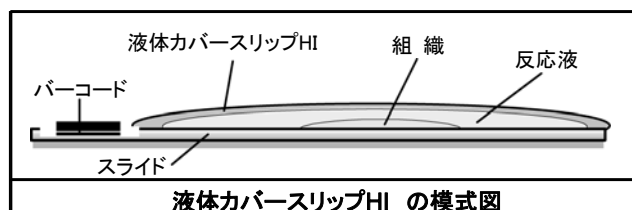

(3) エアーナイフ(ダムの役割)

スライドバーコード上の余分な液体をエアーによって吹き飛ばします。その結果、スライド上から反応液・液体カバースリップが流れ出さないように、スライドバーコードにダムの役割をあたえます。

(4) エアミキサー(反応液の攪拌)

液体カバースリップで覆った反応液に2方向からエアーを噴きつけ反応液を攪拌します。攪拌により、均一な温度分布、抗体分布を得ることができ、染色ムラの防止、反応時間の短縮、高希釈倍率の試薬・抗体を使用することを可能にしました。

(5) ジェット・スライド・ウォッシャー

スライドの洗浄に用います。上下2段の位置から交互に、シャワー状に洗浄液を噴射して、優しく、切片が剥がれないように、少量の洗浄液で効率良く洗浄します。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的又は効果】

病理検査の組織標本や細胞診、血液検査等の標本を作製する装置を言う。染色を行う装置又は塗抹のみを行う装置を含む。

【使用方法等】

詳細については、取扱説明書を参照してください。

1. 染色開始前に必要なバッファー類が、充分量充填されていることを確認し、あらかじめ充填しておいてください。
2. 必要な試薬を装置の試薬トレイにセットします。
3. 廃液タンクから廃液を捨てます。
4. バーコードラベルを印字し、スライドに貼付します。
5. スライドトレイにバーコードラベルを貼ったスライドをセットします。
6. 試薬トレイを装置にセットし、モニター画面上の RUN ボタンをクリックし、スライド枚数等の必要な情報を入力し、ランを開始します。
7. ラン終了後、スライドを装置から取り出し、通常の方法により、脱水・透徹を行ったのち、光学顕微鏡等により鏡検を行います。

*【使用上の注意】

1. 本装置の使用については、専用の試薬を使用してください。
2. 弊社販売品以外及び弊社で認めた以外の試薬、消耗品などを使用した場合、性能を保証できなくなります。
3. 装置に試薬、スライドなどをセットする場合は、清潔な保護用手袋などを着用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
温度:15～30℃(装置が、適切な温度範囲外の環境におかれると正しく動作しないことがあります。)
湿度:10～90%(結露しないこと)
2. 耐用期間
耐用期間は通常の使用、稼動状況において、取扱説明書で定めた定期的な保守・点検、保守部品の交換を実施、さらにその点検結果により必要な修理又は保全措置を行った場合、使用開始(据付)後、7年です。[自己認証(当社データ)による]

*【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項
適正な結果を得るために、本品の使用前、使用後、月に1度及び3ヶ月に1度、定期的に保守点検が必要です。詳細は取扱説明書又はカスタマーソリューションセンターまでお問い合わせ下さい。
2. 業者による保守点検事項
適正な結果を得るために、1年に1回を目安に業者の保守点検を受けることが望ましい。詳細については、カスタマーソリューションセンターまでお問い合わせ下さい。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売: ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
連絡先: ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
カスタマーソリューションセンター
TEL:0120-600-152

