

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 婦人科用剥離子 70955000

サーベックスブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象(患者)＞

- ・妊娠 10 週目以降の妊婦には使用しないこと。[妊娠の継続に支障をきたす恐れがある。]
- ・子宮内避妊器具等の装着者には使用しないこと。[ブラシの先端が器具に引っ掛かり、外れる可能性がある。]

＜使用方法＞

- ・再使用禁止
- ・細胞を採取する際に膣部への潤滑クリーム等の使用は行わないこと。[細胞の採取に影響が出る恐れがある。] なお、詳細は【使用上の注意】の(相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること))を参照のこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・自己採取には使用しないこと。
- ・包装を開封後は本品を速やかに使用すること。
- ・細胞の採取の際、過剰な力を加えないこと。
- ・本品の使用後は、施設の感染性廃棄物処理の方法に従って廃棄すること。


＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)＞

【併用禁忌(併用しないこと)】

医薬品・医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
潤滑クリーム	細胞を採取する際に膣部への潤滑クリーム等の使用は行わないこと。	細胞の採取に影響が出る恐れがある。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

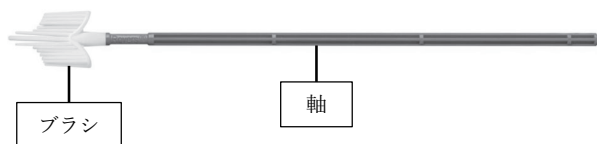

本品は、子宮頸部の細胞採取用ブラシであり、ブラシは軸より取り外すことができる。

＜原材料＞

ブラシ:ポリエチレン

＜作動・動作原理＞

膣内に挿入し、子宮頸部にブラシを押し当てて擦過することで、細胞を採取する。

【使用目的又は効果】

本品は、細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するために用いる器具である。

【使用方法等】

＜使用方法＞

(細胞の採取)

1. 包装から本品を取り出す。
2. ブラシの中央を子宮頸管内に挿入する。
3. 子宮頸部に本品を軽く押し当てながら、時計回りに 5 回転させる。
4. 本品を静かに抜き取る。
5. 所定の方法にて細胞標本の作製を行う。

(細胞診標本の作製)

作製した標本を用いて、細胞診断を行う。

(詳細については、各方法・機器等の取扱説明書に従うこと。)

直接塗抹法

1. スライドガラスにブラシ部分を回しながら細胞を塗抹する。
2. 塗抹した細胞が乾燥しないように市販の固定液で固定する。

液状細胞診法

1. 本品を保存液入りのバイアルに挿入する。
2. ブラシの先端を広げるようにバイアルの底に 10 回押しつける。
3. ブラシの先端をバイアルの固定液の中で数回回転させ、細胞を振落す。
4. ブラシをバイアルから取り出し、蓋をしっかりと閉める。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

常温にて保存すること。

水濡れに注意し、多湿を避けて保存すること。

＜有効期間＞

3 年[自己認証による]

使用期限は外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売:ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

連絡先:ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

カスタマーソリューションセンター

T E L:0120-600-152

