

2026 年 3 月（第 1 版）

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 気腹用チューブ（JMDN：70353000）

再使用禁止

気腹用チューブ

【禁忌・禁止】

<使用方法>


- ・再使用禁止、再滅菌禁止

<適用対象（患者）>

- ・重症心不全、呼吸不全の患者には使用しないこと。[気腹操作が心肺機能に悪影響を与えるおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状（主な形状を以下に示す）

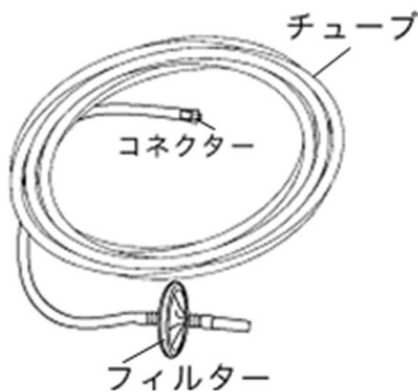

2. 構造及び原理

本製品は、コネクター部、チューブ部、フィルター部より構成される。コネクター、フィルターの附属していないセットもある。気腹装置と気腹針又はトロカールとの接続に用いて、炭酸ガスを送気する。

3. 原材料

チューブ部：塩化ビニール（透明）
嘴管部：プラスチック製

4. 滅菌方法

エチレンオキサイド滅菌済（EOG 滅菌）

【使用目的又は効果】

気腹装置と気腹針又は、トロカールとの接続に用いる柔軟性のあるチューブである。（フィルタを含む場合もある）

【使用方法等】

1. 使用前準備

- (1) 滅菌パック及び本製品を点検する。
- (2) 使用の直前に滅菌パックを開封する。

2. 使用方法

- (1) フィルター側を気腹装置に取り付ける。
- (2) コネクターをトロカール等に接続する。
- (3) 気腹装置を操作して送気を行う。

【使用上の注意】

1. 使用前に、外観上の損傷、汚れや動作不良がないことを確認すること。
2. 使用時に、コネクター部が気腹装置と気腹針又はトロカールと確実に接続され、漏れが無いことを確認すること。
3. 使用中に、フィルターが汚染された場合には、直ちに新品と交換すること。[フィルター内の目詰まり等によるガス流量の減少を避けるため。]
4. チューブの閉塞、屈曲、ねじれ等を発見した場合は、直ちにその状態を改善すること
5. 気腹針又はトロカールへの接続については、それら製品の添付文書を参照のこと。
6. 気腹中は、気腹針又はトロカールが腹壁から抜けていないかを常に確認し、同時に腹腔内圧をモニターすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所で、室温保管すること。
2. 本品の包装に記載の使用期限を参照ください。（自己認証（当社データ）による）。
3. 包装に記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。

【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

TEL：0835-22-3658 FAX：0835-22-3678

製造業者：

Fairmont Medical Products（オーストラリア）

フェアモント メディカル プロダクツ