

2026 年 3 月 (第 1 版)

機械器具 (51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 内視鏡・関節鏡用接続チューブ (JMDN：70267000)

エスディスポーザブルチュービングセット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状 (全長、接続部、先端の形状の違いにより様々な規格がある。以下に代表的な形状を示す)

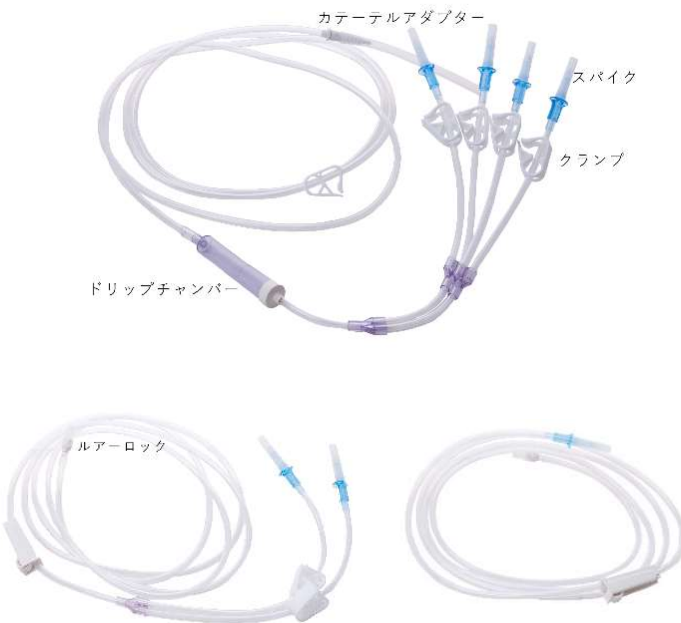

2. 構造及び原理

内視鏡または関節鏡に接続し、灌流液を供給する。

3. 原材料

ポリ塩化ビニール

【使用目的又は効果】

鏡視下手術などの手術及び検査時、内視鏡や吸引器他内視鏡手術システムに関わる機器に接続して使用する。

【使用方法等】

1. 本品を滅菌包装より取り出す。
2. すべてのクランプ及びローラークランプを閉じる。
3. 灌流液容器をスタンド等に吊り下げる。
4. スパイクのカバーを取り外し、灌流液容器の挿入部にスパイクを差し込む。
5. 回路内の空気を除去するため、容器側のクランプを開放し、容器を圧迫したり、ゆるめたりして、ドリップチャンバーの半分ほど灌流液で満たす。
6. ローラークランプを開放し、回路内を洗浄する。
7. 洗浄完了後、ローラークランプを閉じる。
8. カテーテルアダプターを内視鏡・関節鏡に接続する。
9. ローラークランプを開放し、灌流液の流量を調節する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) スパイクに直接手を触れないこと。
 - 2) スパイクを灌流容器の差込口に繰り返し刺さないこと。
 - 3) チューブが折り曲がったり、ねじれた状態で使用しないこと。
 - 4) 灌流液が飛び出す恐れがあるので、使用前にクランプが閉じていることを確認すること。
2. その他の注意
 - 1) 使用前に、包装の汚れや破れていないか点検すること。
 - 2) 本品に、汚れ・破損・変形等が無い、使用前に点検すること。
 - 3) 開封後は直ちに使用し、開封後未使用であっても廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 室温保管すること。
2. 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保存すること
3. 包装に記載されている滅菌期限内 (製造年月より 3 年) に使用し、期限を過ぎたものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 37 号

TEL: 0835-22-3658 FAX: 0835-22-3678

製造業者：

Ace Medical Corporation Ltd. (韓国)