

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 組織収納サック（JMDN：70169000）

ヘイワ T K バッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・原理



回収用の袋部、シャフト、ハンドル部からなり。ハンドル部を操作し袋部を開き組織を入れ回収する。

サイズ	径	口径	容量
HSD-40	10 mm	40 mm	40 ml
HSD-60	10 mm	60 mm	75 ml
HSD-80	10 mm	80 mm	200 ml
HSD-100	10 mm	100 mm	350 ml
HSD-130	10 mm	130 mm	700 ml
HSD-40/S	5 mm	40 mm	40 ml
HSD-60/S	5 mm	60 mm	60 ml

※口径…袋の受口の直径

原材料


ABS 樹脂・ポリプロピレン他

【使用目的又は効果】



内視鏡下の手術で腹腔または胸腔内に挿入する器具で、分離した組織の分散を防ぎ、組織を隔離・収納するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を滅菌包装より取り出し、内側のパイプ、袋の部分が外側のパイプに入っているか確認する。


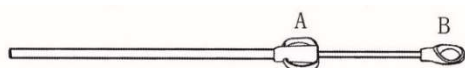


- 2) A 部 B 部にある印字面を上向きにし、トロッカー（別品目）から本品を体腔内に挿入する。
- 3) 挿入した状態で A 部を手で固定したまま、B 部を A 部に向けてゆっくりと押し出し、袋を完全に筒から出す。

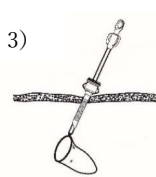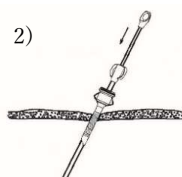

- 4) 目的の組織を鉗子で把持しながら袋に入れる。
- 5) B 部をゆっくり引き、袋の口を閉める。そのまま、トロ

ッカーと一緒に体外に引き抜く。組織等が入った袋がそのままの状態では抜去できない時は、袋が抜去できるように慎重に穿刺部位を拡張する。

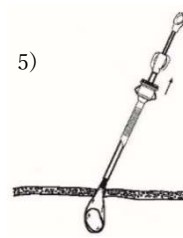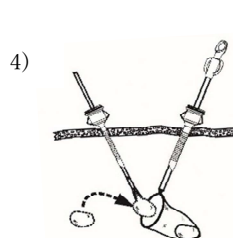

【使用上の注意】

- 1) 再使用及び再滅菌は行わないこと。
- 2) 包装が破損、または汚損している場合は使用しないこと。
- 3) 内容物が漏出する恐れがあるため、容量に合っていない組織又は袋を完全に閉じることができない組織には使用できない。
- 4) 体外に取り出す際、異常な抵抗を感じた場合は無理に取り出さないこと。
- 5) 鋭利な器具や高温の電極は、袋の破損、加えて破損片が脱落する恐れがあるため、本品に接触させないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 室温保管すること。
- 2) 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保存すること。
- 3) 包装に記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 37 号

TEL:0835-22-3658 FAX:0835-22-3658

製造業者：

Guangzhou T.K Medical Instrument Co., Ltd
(中華人民共和国)