


器具器械02 医療用照明器
一般医療機器 汎用歯科用照明器 JMDNコード12351000


プレスタライト

*【形状・構造及び原理等】

形状

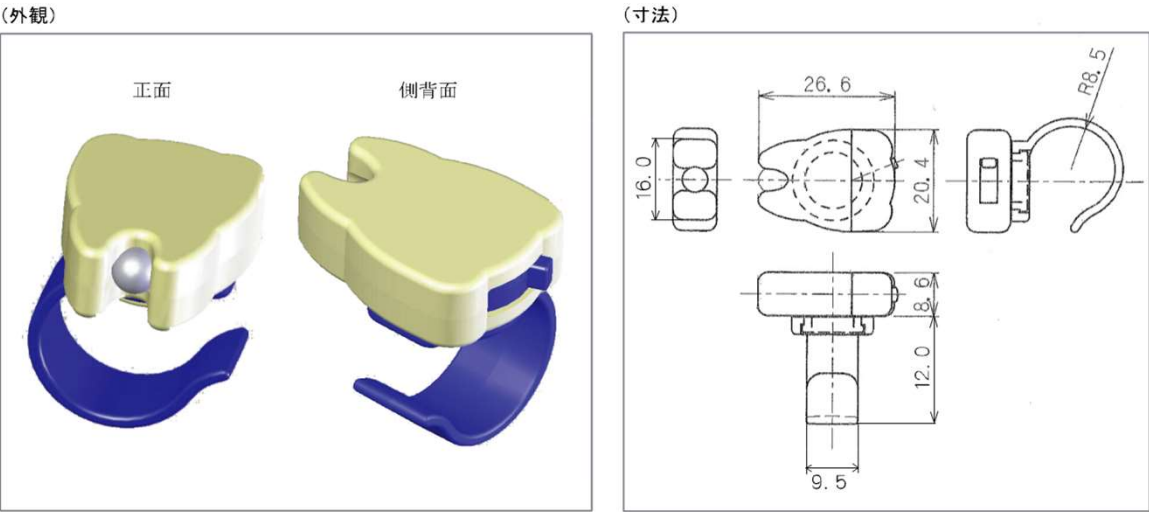

(分解イラスト図及び写真)

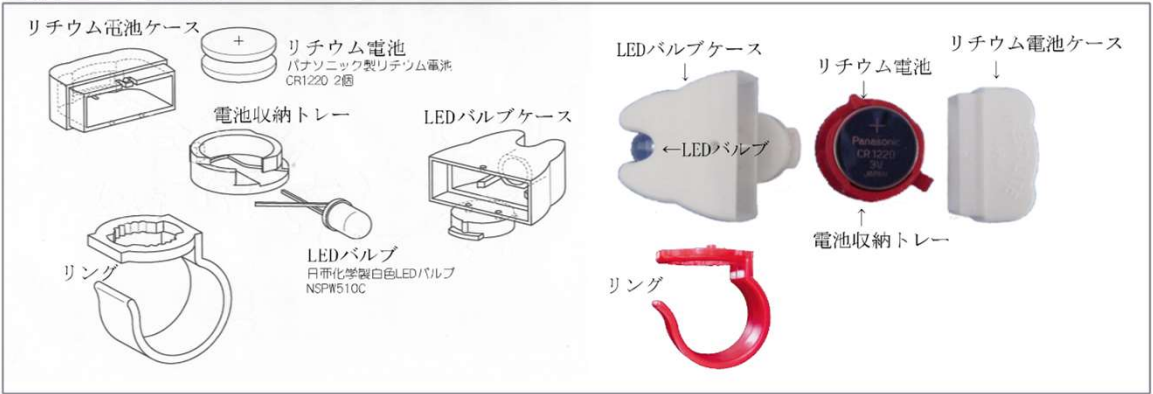

(構成部材の名称仕様、及び原材料又は型番)

構成部材の名称	仕様	原材料、又は型番
LEDバルブケース	成型部品	プラスチック樹脂
リチウム電池ケース	成型部品	プラスチック樹脂
電池収納トレー	成型部品	プラスチック樹脂
LEDバルブ	一般電気部品	(日亜化学製白色LEDバルブ)NSPW510C
リチウム電池	一般電気部品	(パナソニック製リチウム電池)CR1220
リング	成型部品	プラスチック樹脂

原理:リチウム電池を電源とし、スイッチングON/OFF操作によりLEDバルブに通電、点灯させる。

*【使用目的又は効果】

- 口腔内診査での歯石検知
- 隣接面のう触検知
- 臼歯部スクーリング時の照明
- 根管治療時の根管口開口部の探索

5. 集団検診、訪問介護や往診時の照明

*【使用方法等】

- 本体に装着するリングに付与してあるボッチをリチウム電池ケース下面の穴に確実にはめ込むこと。

2. ライトの点灯、消灯はON/OFFスイッチノブをスライドして行う。
LEDバルブを正面に見た時、ON/OFFスイッチノブ右端位置が電源OFF位置、左端が電源ON位置になりLEDバルブが点灯する。
3. LEDライトは診査する歯牙のできる限り近くで照らすこと。
4. リングの径の大きさは指でリング部を数回連続して押すことにより一時的に狭められ、調整は必要な都度行うこと。

***【使用上の注意】**

1. 使用前に、本体にリングが確実にはめ込み固定されておりゆるみやガタがなく本体が回転しないことを確認すること。
2. LEDライト光の明るさは強いので、光を直視しないこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

水ぬれを避け、室温保管のこと。

【取扱い上の注意】

1. 使用後は医療用洗剤などで付着した血液、唾液などの付着物を清拭のこと。
2. 消毒・滅菌については使用する薬液製造元の取り扱い説明書に従って行うこと。薬液の種類によっては製品に影響を及ぼすことがあるので十分に注意すること。
3. オートクレーブ滅菌、又は超音波洗浄を行う場合には必ず本体内蔵のリチウム電池2個とLEDバルブを取り出すこと。
4. 新しい電池と古い電池を混用しないこと。
5. 使用済みリチウム電池は販売店の回収ボックスへ投棄のこと。
6. 廃棄する場合には、医療廃棄物として適切に処分すること。

***【保守・点検に係る事項】**

1. オートクレーブ滅菌、又は超音波洗浄を行う時以外は、製品をむやみに分解してLEDバルブの電極リードに手で触れないこと。
2. 電極リードの(+)極リードや(-)極リードに触れると曲ったり折れたりしてLEDバルブが点灯しなくなるので充分注意のこと。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：有限会社ベルデントサプライ

住 所：〒657-0824

神戸灘区福住通8丁目1番17号

電 話：078-882-1257

製造業者：有限会社ベルデントサプライ

住 所：〒657-0824

神戸灘区福住通8丁目1番17号