

器具器械 02 医療用照明器
一般医療機器 汎用歯科用照明器 JMDN コード 12351000

プレスタライトⅡ

【形状・構造及び原理等】


・形状



・構成部材



・構成部材イラスト及び各名称

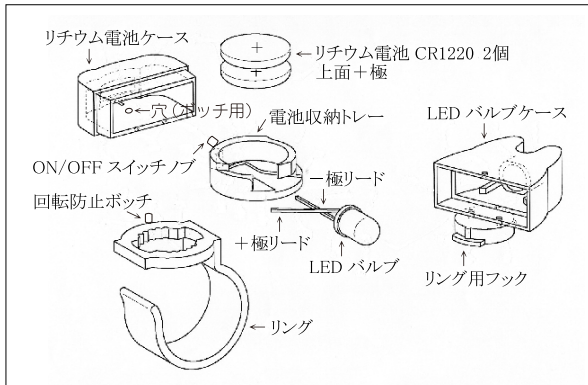

・構成部材

構成部材の名称	仕様	原材料又は、型番
LEDバルブケース	成型部品	プラスチック樹脂
リチウム電池ケース	成型部品	プラスチック樹脂
電池収納トレー	成型部品	プラスチック樹脂
LEDバルブ	一般電気製品	NICHIA NSPW510DS
リチウム電池	一般電気製品	CR1220
リング	成型部品	プラスチック樹脂

原理：リチウム電池を電源とし、スイッチング ON/OFF 操作により LED バルブに通電、点灯させる。

【使用目的又は効果】

- 1.口腔内診査での歯石検知
- 2.隣接面の齲蝕検知
- 3.臼歯部スケーリング時の照明
- 4.根管治療時の根管口開口部の探索
- 5.集団検診、訪問介護や往診時の照明

【使用方法等】

- 1.リングに付与してあるボッチをリチウム電池ケース下面の穴に確実にはめ込むこと。
- 2.ライトの点灯、消灯はON/OFFスイッチノブをスライドして行う。
LEDバルブを正面に見た時に、ON/OFFスイッチノブが右端位置は電源OFF。ON/OFFスイッチノブを左端までスライドして点灯させる。
- 3.LEDライトは診査する歯牙の出来る限り近くで照らすこと。

【使用上の注意】

- 1.使用前にリングが本体に確実にはめ込み固定されていてゆるみやガタがなく、本体が回転しないことを確認のこと。
- 2.使用後は医療用洗剤などで付着した血液、唾液などの付着物を清拭のこと。
- 3.消毒については使用する薬液製造元の取扱説明書に従って行うこと。薬液の種類によっては製品に影響を及ぼすことがあるので充分に注意すること。
- 4.LEDライト光の明るさは強いので光を直視しないこと。
- 5.本製品は幼児の手の届かない場所に保管のこと。
- 6.万一飲み込んだ場合は速やかに医師に相談のこと。
- 7.新しい電池と古い電池を混用しないこと。
- 8.使用済み電池は電極をテープなどで絶縁し、家電量販店などの回収ボックスへ投棄するか各市町村の指示に従ってください。
- 9.廃棄する場合には医療廃棄物として適切に処分すること。
- 10.歯科医師又は歯科衛生士以外が使用しないこと。
- 11.本製品は記載以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.水濡れを避け室温保管のこと。
- 2.幼児の手の届かない場所に保管し、歯科従事者以外が手に触れないように適切に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1.消毒を行う時以外は、製品をむやみに分解してLEDバルブの電極リードに手で触れないこと。
- 2.電極リードの+極リードや-極リードに触れると曲がったり折れたりしてLEDバルブが点灯しなくなるので充分注意のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:有限会社ベルデンタサブライ
住 所:兵庫県神戸市灘区福住通8丁目1番17号
電 話:0120-648-790

製 造 業 者:有限会社ベルデンタサブライ
住 所:兵庫県神戸市灘区福住通8丁目1番17
電 話:078-882-1257