

2026年4月作成（第1版）

機械器具52 医療用拡張器

一般医療機器 医療用拡張器 JMDNコード：70969001

【巻き爪クイット】

【禁忌・禁止】

1. 使用前に必ず洗浄を行うこと。
2. 製品は、本来の使用目的と違う用途で使用しないこと。
3. 本品の加工、改造などは絶対に行わないこと。
4. 幼児、子供が容易に手の届くところに置かないこと。
5. 次の人は使用しないこと。

金属アレルギーの人

爪周辺に出血、化膿、炎症等の異常がある人


【形状・構造及び原理等】

1. 構成及び材質

- ① ツマミ 亜鉛合金 ② 調整ネジ ステンレス鋼 ③ ベース 亜鉛合金
④ アーム 亜鉛合金 ⑤ フック 亜鉛合金 ⑥ ブランジャー 亜鉛合金
⑦ 爪押さえ 樹脂 ⑧ ネジ 鉄 ⑨ ワッシャー 亜鉛合金

2. 形状、構造

〈概観図〉

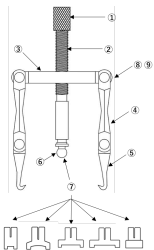

付属品 ⑦爪押さえ：サイズ別 5種類、
ゾンデ（ステンレス鋼）1本

3. 原理

爪の両端にフックを掛け、つまみを回し、調整ネジをねじ込むとブランジャーが落ちます。ブランジャーに装着する爪押さえで爪を押さえつつ、両サイドのフックで爪を持ち上げます。巻き爪の角度を適度に拡張し矯正することができます。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、患部を拡張する為に用いる器具である。(巻き爪・陥入爪の痛みを感じる患者の部位を程よく拡張させるために用いる器具である。)

2. 効能又は効果

巻き爪・陥入爪になった患者の部位を程よく拡張することにより、爪の変形及び痛みを治します。

【使用方法】

巻き爪の状態から、爪押さえ具の最適なサイズを選び、ブランジャーに取り付けます。着脱はワンタッチでできます。ベース部を手を持ち、爪の両端にフックを掛け、つまみを回し、調整ネジをねじ込むとブランジャーが落ちます。つまみを適度な押上力を感じるまで時計方向に回します。本品を装着したまま、お湯(38℃～42℃)で約20分間温浴し、爪を軟化させます。爪が軟化したら、つまみを時計方向に回して爪の両側を持ち上げて矯正します。次に装着した状態で、ドライヤーで乾燥硬化(約10分間)させ、矯正した形状を固めてから、つまみを緩めて本品を外します。

【使用上の注意】

1. 環境条件

施術に適した環境条件の下で使用する。

2. 使用方法

- 1) 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させ、効果を失います。
- 2) 本品を使用する際には、装置と技術に対する適切な理解が必要です。手技には習熟を要するため、無理に使用しないで下さい。
- 3) 本品の使用には、爪と周辺組織の損傷を避けるために、予め知識と配慮が必要です。本品の使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 4) 誤った使用法は本品の損傷を招く恐れがあります。
- 5) 本品を取り扱う際には、思わぬ怪我を避ける為、先端部等に細心の注意を払い、包装から取り出し洗浄を行うこと。
- 6) 洗浄の際、目の粗い磨き粉や金属布で本品の表面を磨かないと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光などを避けて塵や埃のない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用後は速やかに洗浄してください
- 2) 離脱可能なものは取り外し、離脱しないものは可動部分を動かしながら洗浄してください。
- 3) 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けてください。
- 4) 超音波洗浄の際はメーカー指定の適切な洗剤を使用してください。(家庭用洗剤は使用しないで下さい。)
- 5) 洗浄した後、湿った状態で放置しないで下さい。
- 6) しばらく使用しなかった本品を再使用する際に、使用前に必ず本品に異常がないことを確認してください。

【包装】

金属本体1本、爪押さえ5個、ゾンデ1本

【製造販売業者の氏名又は名称等】

名称：ペガサスブランディング株式会社
電話番号：03-4400-2704