

2026年4月作成（第1版）

機械器具52 医療用拡張器

一般医療機器 医療用拡張器 JMDNコード：70969001

【巻き爪クリップ】

【禁忌・禁止】

以下の症状、疾患をお持ちの方は使用しないでください。

- ・ 本品の材料に過敏症またはアレルギーのある方
- ・ 重篤な糖尿病や重度の血行障害のある方
- ・ 爪周辺に出血、化膿、炎症等の異常がある方
- ・ 爪が極度に薄い方
- ・ 爪に感染症の症状がある方


【形状・構造及び原理等】

1. 材質

ステンレス鋼

2. 形状、構造

〈概観図〉

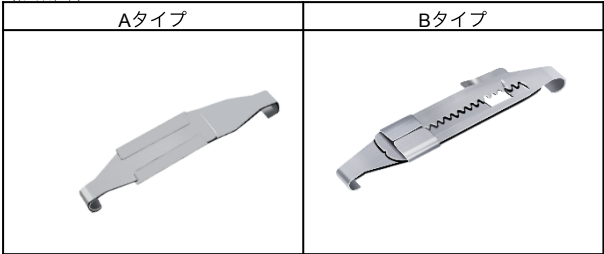

付属品：ゾンデ（ステンレス鋼）、固定テープ

3. 原理

フックが爪の両端を持ち上げる力と、プレートが爪の中央部を押さえる力が同時に作用することで、てこの原理が働き、爪を拡張・矯正します。

【使用目的又は効果】

本品は、巻き爪・陥入爪の矯正を目的とし、爪の両端を持ち上げながら中央部を適切に押さえることで、てこの原理を利用して爪の形状を拡張・矯正します。これにより、巻き爪による痛みや不快感の軽減が期待できます。

【使用方法】

本品の左右のフックを、片方ずつゆっくり爪に差し込み装着します。2つのピースを一緒に押し閉じます。クリップが脱落しないよう、上からテープで固定してください。

【使用上の注意】

〈適用可能な爪について〉

・ 本品は軽～中度の巻き爪の方が対象となっており、食い込みがきつい方・重度の巻き爪の方はフックが引っかからない場合があります。

〈ご使用について〉

- ・ 本品の使用中に、痛み・刺激・違和感・かぶれなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
- ・ 本品を装着した状態で激しい運動を行わないでください。
- ・ 一度で完治を目指すものではありません。最初は15分程度の使用にとどめ、様子を見ながら徐々に使用時間を増やしてください。

〈本体について〉

- ・ 折り曲げすぎると反発力が失われる可能性があります。力加減にご注意ください。
- ・ 金属アレルギーの方は使用をお控えください。
- ・ 本品は巻き爪矯正を目的としたものであり、その他の用途には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 本品は直射日光、高温多湿を避け、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 2) 本品に過度な力が加わらないよう、適切なケースや容器に入れて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用後は速やかに洗浄してください。
- 2) 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けてください。
- 3) 湿気の多い環境を避け、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 4) 使用前に必ず本品に異常がないことを確認してください。
- 5) クリップが劣化した場合や折れた場合は、新しいクリップに交換してください。
- 6) 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

名 称：ペガサスブランディング株式会社
電話番号：03-4400-2704

取扱説明書を必ずご参照ください。