

2026年4月作成（第1版）

器55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 JMDNコード：34630000

【フェミニンプラス】

再使用禁止


【警告】
本品の使用により、体質や体調によってはトキシックショック症候群（Toxic Shock Syndrome：TSS）が発症する可能性があります。以下の事項を必ず守ってください。
・手指を清潔にしてから本品を使用してください。
・個包装は使用直前に開封し、使用前に破れや異常があった場合は使用しないでください。
・以下の症状が現れた場合は、直ちに産婦人科などの専門医にご相談ください。
症状：突然の高熱、発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下等

※TSSについて：黄色ブドウ球菌が産生する毒素によって起こる急性疾患です。黄色ブドウ球菌は鼻腔・皮膚・頭髮・脇の下・陰毛・膣などに存在し、本品の使用の有無に関わらず、切り傷や火傷によっても発症する可能性があります。稀に死に至る重篤な症状を引き起こすことがあります。
使用時に手指が不潔であったり、本品を再使用したりすると、黄色ブドウ球菌が増殖し毒素を産生しやすくなります。添付文書に従って正しく使用することで、TSS発症のリスクを軽減できると考えられます。

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
本品は単回使用品です。再使用による機械的な故障や、常在菌等による感染の発生リスクがあります。
2. 本品は本来の使用目的以外では使用しないでください。
3. 過去にトキシックショック症候群（TSS）を発症したことがある方は、本品を使用しないでください。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造
《内容量：1.7g》

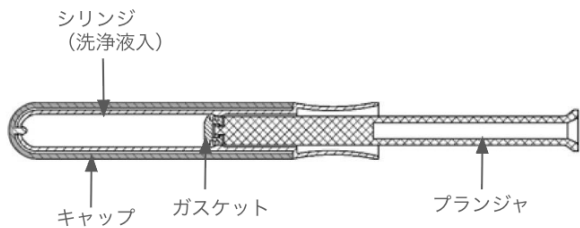

構成部品名と主な原材料

部 品	原 材 料
キャップ	ポリプロピレン
プランジャ	ポリプロピレン
シリンジ	ポリプロピレン
ガスケット	エラストマー
洗浄液	水、ラクトバチルス発酵物、プロパンジオール、1,2-ヘキサジオール、ヒドロキシエチルセルロース、ベンチレングリコール、ヒアルロン酸Na、加水分解スクレロチウムガム、カプリリルグリコール、ナイアシンアミド、アシアチコシド、BG、マデカッソシド、ツボクサエキス、乳酸、オウゴンエキス、イタドリ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、アセチルヘキサペプチド-8、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス


2. 原理

プランジャを押すことで、シリンジ内に保持された洗浄液が圧力によって前方へ移動し、先端ノズルから体内へ噴出される。

【使用目的又は効果】

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動式である。

【使用方法】
1) 手指を洗浄した後、個包装を開封し本体を取り出します。
2) 本体のキャップを真っ直ぐ引き抜いてください。（図1）
3) 挿入しやすい楽な姿勢を取ります。
4) 本体の先端をゆっくりと5～8cm挿入してください。（図2）
5) プランジャをゆっくり押して、洗浄液を注入してください。（図3）
6) 注入が終わったら、本体をゆっくりと抜いてください。
※注入後は、洗浄液が体外に排出されて下着が汚れるため、おりものシートやナプキンを使用してください。
※使用後に個包装や本体をトイレに流さないでください。

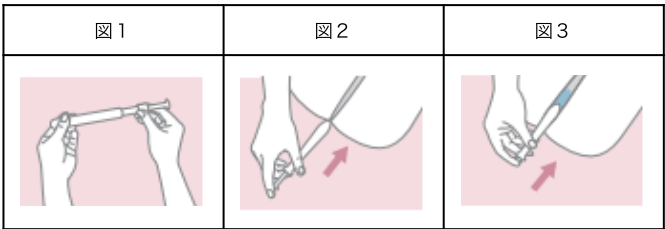

【使用上の注意】
1) 1日1本を目安に使用し、過剰な使用は控えること。
2) ご使用前に手指を清潔にし、個包装を開封後は直ちに使用すること。
3) 以下のいずれかに該当する場合は、本品を使用する前に必ず医師にご相談すること。
・局部に炎症や異常がある方
・妊娠中の方、または妊娠の可能性がある方
・特定の治療や予防のために、医師の管理を受けている方
4) 粘膜などを傷つけないよう、無理な力をかけず楽な姿勢で挿入すること。
5) 手や衣服についたジェルは水で洗い流すこと。

【保管方法及び有効期間等】
1) 保管条件
・本品は直射日光・高温多湿を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
・個包装から本体を出した状態で保管しないこと。
2) 有効期間
・使用期限は個包装に印字された表示を確認すること。
・使用期限を過ぎたものは、使用せずに廃棄すること。

【取扱い上の注意】
1) 本品を落下させたり、衝撃を加えたりする等の乱暴な取扱をしないこと。
2) 本品は、未開封のもののみを使用すること。使用時以前に個包装を開封したもの、使用以前に個包装が破れていたもの、キャップが外れていたもの、本品の本体に傷があるもの、破損したものは使用しないこと。また、保管後に本体から洗浄液の漏れ等異常が発見された場合は使用しないこと。

【製造販売業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：ペガサスブランディング株式会社
電話番号：03-4400-2704