

機械器具 (22) 検眼用器具
管理医療機器 検査用コンタクトレンズ (JMDN コード : 34651010)
「HHV レンズ」「HHV クォーツ」の付属品
HHV シリコンホルダー

再使用禁止


※【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- (1) 再使用禁止。

※【形状・構造及び原理等】

1. 形状

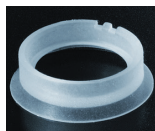

タイプM
(標準サイズ)



タイプS
(Sサイズ)

内径=10.8mm

2. 材質

シリコンゴム

3. 原理



硝子体検査時に検査用コンタクトレンズ(「HHV レンズ」, 「HHV クォーツ」または「HOYA 広角観察レンズ」)に取り付け、レンズ本体を角膜上で保持固定する。

※【使用目的又は効果】

検査用コンタクトレンズに取り付け、眼の前面に装着して眼内の状態を観察し、診断及び治療を支援する。

※【使用方法等】

- 1) 使用する前に、レンズ及び HHV シリコンホルダーを洗浄、滅菌して下さい。
- 2) 眼底観察部位に応じて観察用レンズを選択し、レンズを HHV シリコンホルダーの上方から内側下部先端まで押し込み、装着して下さい。角膜上でレンズを固定した際、レンズのベース面と角膜表面との間に隙間ができないように、レンズを正しく装着して下さい。尚、HHV レンズ、HHV クォーツ、レンズホルダーを装着した HOYA 広角観察レンズ以外のレンズには用いないで下さい。
- 3) 角膜上にヒアルロン酸ナトリウム製剤又はコンドロイチン硫酸ナトリウム製剤等の眼科用粘弾性物質を滴下して下さい。
- 4) HHV シリコンホルダーを取り付けたレンズを角膜中央部に乗せて下さい。

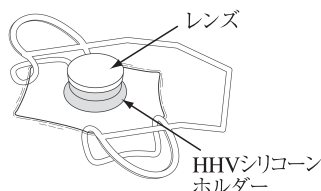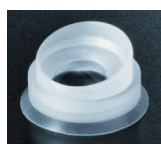

※【使用上の注意】

【その他の注意】

- 1) 本製品は用時滅菌品(未滅菌品)ですので、使用する前に必ず滅菌して下さい。
- 2) 滅菌前には、乾燥が完全であることを充分に確認して下さい。
- 3) レンズと HHV シリコンホルダーの装着は、必ず各々を滅菌した後に行なって下さい。

※【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管して下さい。

【有効期間】

使用期限は、外箱に記載されています。[自己認証(当社データ)による]
(上 4 桁は西暦、下 2 桁は月を示す。)

※【保守・点検に係る事項】

【洗浄方法】

使用前に十分に水洗いして下さい。水洗い後は速やかに乾燥させ、その後、乾燥の状態が完全であることを充分に確認して下さい。

【滅菌】

以下の2つのいずれかの方法で滅菌して下さい。

(1) 高圧蒸気滅菌

使用前に十分に洗浄し、下記に示す滅菌条件等で滅菌を行なって下さい。

①滅菌温度:134℃、滅菌時間:最低 15 分

又は

②滅菌温度:121℃、滅菌時間:最低 30 分

(2) EOG(エチレンオキシドガス)滅菌

使用前に十分に洗浄し、表面に水分が残らないよう乾燥した後、下記条件を参考にEOG滅菌を行なって下さい。

但し、滅菌時間や温度等の滅菌条件は、滅菌器の種類や包装材料等により異なるので、滅菌器の取扱説明書、各施設の滅菌手順等に従って下さい。

(推奨値)

温度 :45℃以上、湿度 :30%以上、

滅菌時間 :90分以上、ガス濃度 :410mg/L以上

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※【製造販売業者】

HOYA 株式会社

【問い合わせ窓口】

HOYA 株式会社メディカル事業部

〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号

中野セントラルパークサウス 6F

電話番号 03-5913-2343