



** 2021 年 2 月改訂(第8版)
* 2018 年 10 月改訂(第 7 版)

機械器具 39 医療用鉗子
管理医療機器 単回使用眼内レンズ挿入器 (JMDN コード : 36061002)
HOYA インジェクターシステム カートリッジ C


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
(1) 再使用禁止。
(2) 再滅菌禁止。

** 【形状・構造及び原理等】

1. 形状

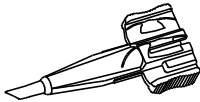

2. 材質

ポリプロピレン系樹脂
コーティング剤(ヒアルロン酸ナトリウム、ウレタン含有アクリル樹脂)

【使用目的又は効果】

眼内に挿入し、眼内レンズの挿入及び配置を導くために使用すること。

【使用方法等】

1. 本製品は、下記の眼内レンズ及び挿入器と組み合わせて使用すること。

販売名		承認番号等	製造販売業者	モデル名
眼内 レ ン ズ	HOYA エイエフ-1 (UV)	21300BZZ 00520000	HOYA 株式会社	適用可能な モデルは、 本製品の 外箱の「適 合モデル一 覧」を参照
	HOYA エイエフ-1 (UY)	21600BZZ 00479000		
挿 入 器	HOYA インジェクター システム ハンドピース	13B1X00253 900001		

2. 滅菌バッグから『HOYA インジェクターシステム カートリッジ C』(以下カートリッジ)を取出し、粘弾性物質(眼科用ヒアルロン酸製剤)を充填する。専用レンズケースで二つ折りにした眼内レンズをループの位置と方向に注意しながらカートリッジに装填する。
3. 『HOYA インジェクターシステム ハンドピース』(以下ハンドピース)に、位置と方向に注意しながらカートリッジを取り付ける。ハンドピースは使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
4. 眼内レンズを眼内に挿入する。挿入の際には、後囊、角膜内皮、創口等の生体組織、眼内レンズの光学部とループ、及びカートリッジとプランジャー、それぞれの位置関係に注意しながら慎重に操作すること。

『HOYA インジェクターシステム』の詳細な操作方法および使用方法については、次頁の「HOYAインジェクターシステム 取扱説明書」をよく読むこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
(1) 使用前に、本製品に変形や破損、異物の付着、その他異常がないことを確認すること。
(2) 開封後は無菌的に取り扱うこと。

『HOYA インジェクターシステム』の詳細な使用上の注意については、次頁の「HOYAインジェクターシステム 取扱説明書」をよく読むこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光や水濡れをさけ、25℃以下で保管すること。

* 【有効期間】

使用期限(Exp.Date)は外箱に記載。[自己認証による]
(上 4 桁は西暦、中 2 桁は月、下 2 桁は日を示す。)

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

HOYA 株式会社

【問い合わせ窓口】

HOYA 株式会社 メディカル事業部

〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号
中野セントラルパークサウス 6F
電話番号 03-5913-2343

取扱説明書を必ずご参照ください。