



\*2021 年 5 月 (第 2 版)  
2018 年 7 月 (第 1 版)

機械器具 39 医療用鉗子  
管理医療機器 単回使用眼内レンズ挿入器 (JMDN コード : 36061002)  
**HOYA インジェクターシステム カートリッジ C**  
**再使用禁止** (モデル : Type-EM7 / Type-CM7)


**【禁忌・禁止】**

## 1. 使用方法

- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状

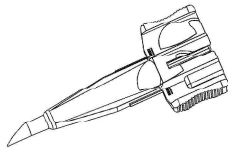

## 2. 材質

ポリプロピレン系樹脂

**【使用目的又は効果】**

眼内に挿入し、眼内レンズの挿入及び配置を導くために使用すること。

**【使用方法等】**

1. 本品は、適合が確認された下記の組み合わせで使用すること。  
詳細な使用方法については、各「添付文書」及び「取扱説明書」に従って、注意深く操作する。

|            | 販売名                               | 承認番号等                | 製造販売業者       | モデル名   |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 眼内<br>レンズ  | HOYA<br>エイエフ-1<br>iMics1          | 22200BZX<br>00614000 | HOYA<br>株式会社 | MP70   |
| ハンド<br>ピース | HOYA<br>インジェクター<br>システム<br>ハンドピース | 13B1X00253<br>900001 |              | ISH005 |

2. 滅菌バッグから「HOYA インジェクターシステム カートリッジ C」(以下「カートリッジ」)を取出し、粘弾性物質(眼科用ヒアルロン酸製剤)を充填する。専用レンズケースで二つ折りにした眼内レンズを、ループの位置と方向に注意しながらカートリッジに装填する。
3. 「HOYA インジェクターシステム ハンドピース」(以下「ハンドピース」)に、位置と方向に注意しながらカートリッジを取り付ける。ハンドピースは使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
4. 眼内レンズを眼内に挿入する。挿入の際には、後囊、角膜内皮、創口等の生体組織、眼内レンズの光学部とループ、及びカートリッジとプランジャー、それぞれの位置関係に注意しながら慎重に操作すること。

詳細な使用方法等については、「取扱説明書」をよく読むこと。

**【使用上の注意】**

## 1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に、本品に変形や破損、異物の付着、その他異常がないことを確認すること。
- (2) 開封後は無菌的に取り扱うこと。

詳細な使用上の注意(注意事項)については、各「添付文書」及び「取扱説明書」をよく読むこと。

**【保管方法及び有効期間等】****【保管方法】**

直射日光や水濡れをさけ、25℃以下で保管すること。

**【有効期間】**

使用期限(Exp.Date)は外箱に記載。[自己認証による]  
(上 4 桁は西暦、中 2 桁は月、下 2 桁は日を示す。)

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】****【製造販売業者】**

HOYA 株式会社

**【問い合わせ窓口】**

HOYA 株式会社 メディカル事業部

〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号

中野セントラルパークサウス 6F

電話番号 03-5913-2343