

** 2017 年 11 月改訂(第 4 版 新記載要領に基づく改訂)

* 2016 年 4 月 1 日改訂(第 3 版)

機械器具 (72) 視力補正用レンズ
管理医療機器 単回使用検査用コンタクトレンズ (JMDN コード : 34651020)
HHV ディスポ

再使用禁止

****【禁忌・禁止】**

1. 使用方法

- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。

****【形状・構造及び原理等】**

本品はレンズとシリコーンホルダーから構成され、レンズには、平凹レンズ、プリズムレンズ、メニスカスレンズ及び両凹レンズがあり、観察する部位によって使い分ける。本品は単回使用である。

1. 形状

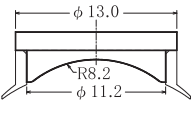
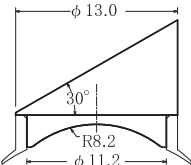
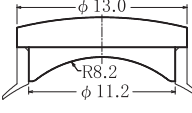
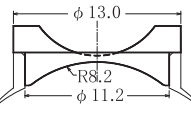
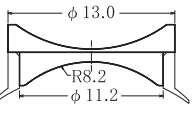
種類、形状と主たる用途は下表のとおり。

2. 材質

レンズ : メタクリル樹脂
 シリコーンホルダー : シリコーンゴム

3. 原理

硝子体手術の際に角膜表面にのせ、硝子体及び網膜を観察する。

	タイプ 1d	タイプ 3d	タイプ 5d	タイプ 6d	タイプ Wd
レンズ 形状					
	平凹レンズ	30° プリズムレンズ	メニスカスレンズ	両凹レンズ	ワイドフィールドレンズ (両凹レンズ)
主たる用途	後極部観察用	周辺部観察用	後極部拡大観察用	液-空気置換 後極部観察用	後極部の 広範な観察用

****【使用目的又は効果】**

眼の前面に装着して眼内の状態を観察し、診断及び治療を支援すること。

****【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管して下さい。

【有効期間】

使用期限は、外箱に記載されています。[自己認証(当社データ)による]
 (上 4 桁は西暦、下 2 桁は月を示す。)

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

***【製造販売業者】**

HOYA 株式会社

【問い合わせ窓口】

HOYA 株式会社 メディカル事業部

〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号
 中野セントラルパークサウス6F
 電話番号 03-5913-2343

