

** 2017 年 11 月改訂(第 7 版 新記載要領に基づく改訂)

* 2016 年 4 月改訂(第 6 版)

機械器具 (36) 医療用ピンセット
管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット (JMDN コード : 16209002)
HOYA 硝子体手術用ディスポマイクロセッシ

再使用禁止

****【禁忌・禁止】**


1. 使用方法

- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。


****【形状・構造及び原理等】**

本品は、単回使用眼科用ピンセットであり、ボディのハンドル部に圧力を加えることにより先端部に設置されている 2 枚のツメ(チップ)が開閉する構造となっている。

1. 形状

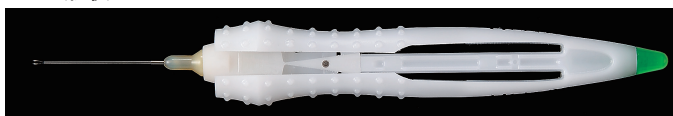

【各部名称】

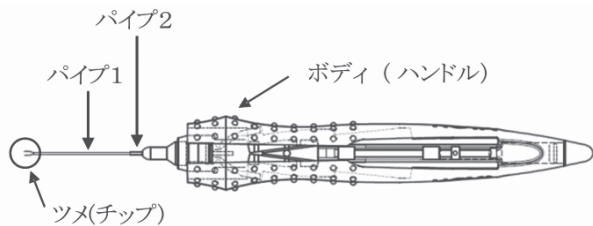

- パイプ 1 径 : 25G
シャフト(パイプ 1 と閉じたツメ(チップ)を合わせた長さ) : 25mm
28mm
ツメ(チップ)の形状 : エイシメトリカルチップ
ラージグリップ
ラウンドチップ
スリムチップ

「シャフト」「ツメ(チップ)」の形状については外箱および外側トレー(プリスタートレー)を参照。

2. 材質

- ボディ(ハンドル) : ポリアセタール
パイプ 1、パイプ 2、ツメ(チップ) : ステンレス鋼

3. 原理

術者は、ボディのハンドル部を把持して先端部を眼組織に接触させ、ハンドル部に圧力を加えることにより眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫又は引っ張りを行う。

【使用目的又は効果】

医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いること。

【使用方法等】

【使用方法】

1. 外側トレー開封前にトレーに表示したツメ(チップ)の形状を確認する。
2. 外側トレーを開封し、内側トレーを無菌的に取り出す。
3. 本体を内部のトレーから先端部が周囲に触れないよう慎重に取り出す。
4. ボディのハンドル部に圧力を加えることにより、先端部に設置されている 2 枚のツメ(チップ)が開閉する構造となっている。術者は、ボディのハンドル部を把持して先端部を眼組織に接触させ、ハンドル部に圧力を加えることにより眼組織を挟む。
5. 使用後は再使用せず、廃棄する。

【使用上の注意】

【その他の注意】

1. トレー開封後は、無菌的に取り扱うこと。
2. 本品は滅菌済製品で、1 回限りの使用である。再滅菌・再使用しないこと。
3. 使用前には、ツメ(チップ)に触れないよう注意して取り扱うこと。
4. カニューレにツメ(チップ)を通過させる際はツメ(チップ)を閉じた状態にて行うこと。
5. 使用前ならびに使用中に、器具の外観及び動作に異常のないことを確認すること。
6. 超音波チップや硝子体カッター等、器具に影響を与える機器との接触を避けること。
7. 鋭利な先端部を有するので取扱いには十分注意すること。
8. ツメ(チップ)及びシャフトには、折損・曲がり等の可能性がある為、使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
9. ツメ(チップ)の滑らかな開閉動作を維持するため、剥離した眼組織は除去しながら使用すること。また、眼組織がツメに絡み付いた場合、速やかに取り除くこと。

****【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管して下さい。

【有効期間】

使用期限は、外箱およびプリスタートレーに記載されています。

[自己認証(当社データ)による]

(上 4 桁は西暦、下 2 桁は月を示す。)

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

***【製造販売業者】**

HOYA 株式会社

【問い合わせ窓口】

HOYA 株式会社メディカル事業部

〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号

中野セントラルパークサウス 6F

電話番号 03-5913-2343