

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 髄内釘ドライバ 35166000

IPT ネイルシステム用手術器械 (IPT-S ターゲットデバイス 125°)

【警告】

本手術器械は未滅菌のため、[保守・点検に係る事項]に定める方法で、使用前に必ず滅菌を行い、使用後は必ず洗浄・滅菌を行い、清潔に保管すること。

【禁忌・禁止】

[併用医療機器]

当製造販売業者製の骨折部固定内副子材料以外の骨接合手術に使用しないこと。(「相互作用」の項参照)

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレススチール、アルミ合金、PEEK


2. 形状・構造・原理

本品は大腿骨転子部骨折等の骨接合手術に用いる IPT ネイルシステム (医療機器承認番号：21600BZZ00127A01) 専用の手動式手術用器械であり、骨への適切な穴あけ、インプラントのサイズ測定、固定及び抜去等を行います。

尚、本手術器械の製品名、カタログ番号については、包装表示ラベル又は製品本体に記載されていますのでご確認ください。

□ Cat. No. IS01-2165

製品名：IPT-S ターゲットデバイス 125°

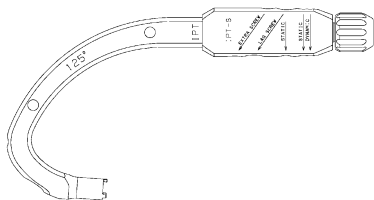

【使用目的又は効果】

髄内釘を組織に挿入するための手持型手術器具をいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前

本手術器械は未滅菌のため、手術前に予め [保守・点検に係る事項] に示す条件にて滅菌を施して下さい。

2. 使用時 (使用例)

基本的な手術手技は IPT ネイルシステム用手術器械の添付文書 [HJ-10N] 又は [HJ-70N] をご参照下さい。

IPT-S ネイル 125° 使用の際に用いる専用器械です。

- 1) ネイルとターゲットデバイスをネイル接続ネジでストレートドライバーLを用いて確実に固定します。(図 1)
- 2) ターゲットデバイスにラグスクリュー用スリーブを装着し、ステップリーマーを通し、ネイルのラグスクリューホールに干渉しないで通過することをチェックします。(図 2)

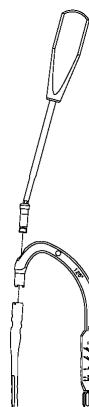


図 1

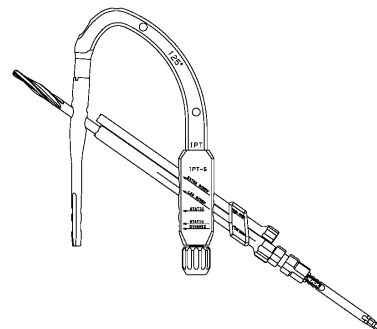


図 2

- 3) ターゲットデバイスにディスタルスクリュー用ドリルスリーブを組付けたディスタルスクリュー用スリーブを装着し、ディスタルスクリュー用ドリルを通し、ネイルのディスタルスクリューホールに干渉しないで通過することをチェックします。(図 3)
- 4) ネイルを髄腔へ挿入します。
挿入が困難な場合、T/D 用ロッドインパクトをターゲットデバイスに接続し、軽く叩き込みます。挿入後、ガイドワイヤーを取り外します。(図 4)
- 5) 各スクリューの挿入後、ストレートドライバーを用いてネイルからネイル接続ネジを取り外し、ターゲットデバイスを取り外します。(図 5)

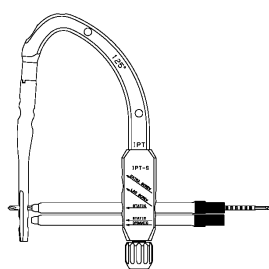


図 3

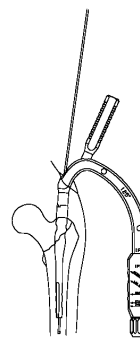


図 4

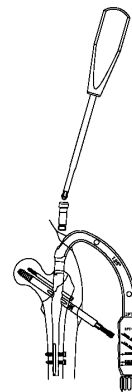


図 5

3. 使用後

使用後は、水ですすぎを完全に行い、[保守・点検に係る事項] に定める滅菌方法にて滅菌を行います。

4. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 使用前に必要な手術器械が揃っているか確認して下さい。
- 2) ターゲットデバイスにラグスクリュー用スリーブを装着し、ステップリーマーを通し、ネイルのラグスクリューホールに干渉しないで通過することを確認して下さい。
- 3) ターゲットデバイスにディスタルスクリュー用ドリルスリーブを組付けたディスタルスクリュー用スリーブを装着し、ディスタルスクリュー用ドリルを通し、ネイルのディスタルスクリューホールに干渉しないで通過することを確認して下さい。

- 4) ターゲットデバイスからネイル接続ネジを取り外す際は、ストレー
トドライバーを使用して下さい。ユニバーサルT レンチを使用する
場合は、ネイル接続ネジの破損を防止する為、ユニバーサルT レン
チの六角レンチ先端側をネイル接続ネジに軸直に確実に取り付けた
上で、ユニバーサルジョイント部を傾斜させる様にして取り外して
下さい。
- 5) ディスタルスクリュー用ドリルでドリリングする際、前後に負荷を
かけないよう慎重にドリリングして下さい。負荷をかけすぎるとタ
ーゲットデバイスがたわみ、ドリリングが適正に行えない恐れがあ
ります。
- 6) ネイルの挿入は慎重に行って下さい。挿入困難場合など、無理な
挿入により二次骨折が生じる恐れがあります。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用後は隙間部分、内管及び中空部分や複雑な構造を有する部分に
血塊等が残らないよう速やかに洗浄後滅菌して下さい。
〔「保守・点検に係る事項」参照〕
〔嵌合部等にある血塊や異物を除去しきれない恐れがあります。〕

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

- 1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・処置方法	機序・危険因子
当製造販売業者製（※1） 以外の骨折部固定内副子 材料	インプラントの緩み、破損 の危険性が高まる恐れがあ る。	インプラントが適 切に埋入できない ため固定力等が不 足する。
当製造販売業者製以外の 手術用機械器具	手術用機械器具の不具合に よる危険性が高まる恐れが ある。	手術用機械器具の 操作が正しく機能 しない。

（※1）IPT ネイルシステム（医療機器承認番号：21600BZZ00127A01）

3. 不具合・有害事象

本製品の使用において、患者の状態、骨折部の形態及び骨癒合の状態
などにより次のような不具合・有害事象がまれに現れることがあるので、
異常が認められた場合は直ちに適切な処置を施して下さい。

- 1) 重大な不具合
 - ・製品の破損、破損片の体内遺残
- 2) 重大な有害事象
 - ・偽関節、変形骨癒合、再骨折（術中／術後）
 - ・二次骨折
 - ・カットアウト、インプラントの脱転
 - ・感染症、血栓症
 - ・骨の短縮、骨壊死、骨密度の低下
 - ・金属アレルギー、異物アレルギー
 - ・手術における神経的損傷、血管損傷及び穿孔時発熱障害
- 3) その他の不具合
 - ・挿入／抜去時の製品／器具の破損
 - ・術後のインプラントの緩み、Z-effect
- 4) その他の有害事象
 - ・痛みや不快感、異物感
 - ・骨癒合不全
 - ・血行再生障害
 - ・挿入／抜去時における破損器具の体内遺残

4. 高齢者への適用

一般的に高齢者は骨量・骨質が十分でないことが多いので、本製品の
使用は慎重に行い、術後の経過にも十分注意して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
直射日光及び高温多湿を避け保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

1. 使用前

- 1) 本手術器械は未滅菌のため、手術前に予め次に示す条件にて滅菌を
施して下さい。

・滅菌方法及び滅菌条件（オートクレーブ滅菌）

熱源	水蒸気	
処理圧力	118 kPa	196 kPa
処理温度	121 ℃	132 ℃
処理時間	20 分以上	5～10 分

- 2) 製品を使用する前に摩耗、キズ、割れ、有害なバリ、錆、接合の
不良等がないか、外観検査を実施して下さい。

2. 使用後

- 1) 使用後は、速やかに洗浄を行い血塊等を除去し、使用前の欄に示
す「滅菌方法及び滅菌条件」で滅菌を行い保管して下さい。
- 2) 洗浄中又は洗浄後の製品を放置すると錆び等が発生する恐れがあ
りますのでむやみに放置しないで下さい。
- 3) 洗浄剤は、医療用中性洗剤等の専用の洗剤を用い、適正な濃度で
使用して下さい。（洗剤の使用説明を参照して下さい。）
- 4) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがある
ので、使用を避けて下さい。やむを得ず使用する際は、製品の状
態を確認し腐食等が発生しないよう洗浄して下さい。
- 5) 洗浄の際、製品の表面等にキズがつかないようブラシ、スポンジ
等を使用し、金属製たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用は避
けて下さい。
- 6) 隙間部分や中空穴を有する製品はブラシ等で隙間部分や中空穴部
分を入念に洗浄し異物を除去し、洗浄後の製品に異物がないこと
を十分確認して下さい。
- 7) 可動部を有するものは可動部分を操作しながら洗浄して下さい。
- 8) 分解可能なもの或いは組み合わせて使用するものは最小単位まで
分解し洗浄を行って下さい。
- 9) ブラシ等で血塊等を除去できない場合は隙間部分等を血液溶解剤
又は蛋白分解酵素剤等を用いて洗浄後、超音波洗浄機を用いて洗
浄し、滅菌して下さい。特に隙間部分は異物が残りやすいので、
異物がないことを十分確認して下さい。
- 10) 血液溶解剤又は蛋白分解酵素剤等の薬剤を使用する場合は取扱い
説明書を参照の上使用して下さい。
- 11) 超音波洗浄機を使用する場合は、取扱い説明書を参照の上使用し、
製品に異物等がなくなるまで洗浄して下さい。
- 12) 超音波洗浄機を使用する際は、ドリル等の刃物が接触し、キズ等
が発生しないよう注意して洗浄して下さい。
- 13) 合成樹脂が使用されている製品に高压蒸気滅菌を行う場合、合成
樹脂部分が滅菌トレー又は滅菌用金網容器等の金属部分に直接触
れないようにして下さい。
- 14) 洗浄、滅菌後可動部分を有する製品がスムーズに可動しない場合
は、必要に応じ水溶性潤滑剤または流動パラフィンを塗布して下
さい。水溶性潤滑剤又は流動パラフィンを使用する場合は取扱い
説明書を参照の上使用して下さい。
- 15) 洗浄後は、水ですすぎを完全に行い、腐食防止のために、直ちに
乾燥させて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ホムズ技研

〒391-0213 長野県茅野市豊平 4734-352

電話番号 0266-76-5881

製造業者

株式会社 ホムズ技研