

機械器具 (58) 整形用機械器具
 一般医療機器 骨手術用器械 70962001

CSP ワイヤリングシステム用手術器械 (2.0 骨孔用パッサー)

【警告】

本手術器械は未滅菌のため、[保守・点検に係る事項]に定める方法で、使用前に必ず滅菌を行い、使用後は必ず洗浄・滅菌を行い、清潔に保管すること。[感染症発症の恐れがあります]

【禁忌・禁止】

【併用医療機器】

- CSP ワイヤリングシステム (Ti) (医療機器承認番号：22500BZX00063000) 及び CSP ワイヤリングシステム (SUS) (医療機器承認番号：22500BZX00064000) による骨接合手術以外に使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレススチール

2. 形状・構造・原理

骨の固定、骨と軟部組織の締結若しくは縫合又は骨とインプラントの固定に用いる手動式手術用器械です。

尚、本手術器械の製品名、カタログ番号については、包装表示ラベル又は製品本体に記載されていますのでご確認ください。

□ Cat. No. HS26-0930

製品名：2.0 骨孔用パッサー



【使用目的又は効果】

骨の固定、骨と軟部組織の締結若しくは縫合又は骨とインプラントの固定に用いる CSP ワイヤリングシステム (Ti) (医療機器承認番号：22500BZX00063000) 及び CSP ワイヤリングシステム (SUS) (医療機器承認番号：22500BZX00064000) 専用の手動式手術用器械である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用時 (使用例)

基本的な手術手技は CSP ワイヤリングシステム用手術器械 (CS ピン器械セット) の添付文書 [HJ-W8N] をご参照下さい。

1-1. 肘頭の場合 (2 穴)

- 骨折部から 30mm 程遠くに 2.0 ドリルで骨孔作製後、骨孔に 2.0 骨孔用パッサーを挿入し、ケーブルを通します。(図 1)

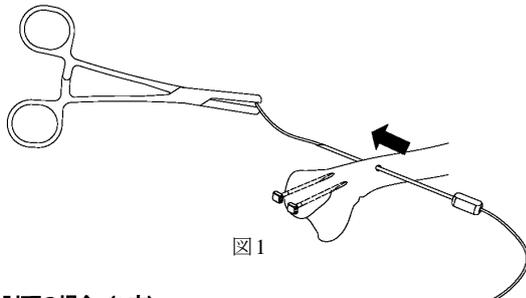


図 1

1-2. 肘頭の場合 (1 穴)

- 骨折部から 30mm 程遠くに 2.0 ドリルで骨孔作製後、骨孔に 2.0 骨孔用パッサーを挿入します。CS ピン (1 穴) のスリーブ穴にケーブルを通した後、ハの字に交差させて、パッサーの先端側からケーブルを数 cm 程通します。(図 2)
- ケーブルと一緒にパッサーを引き抜き、ケーブルを骨孔に通します。(図 3)

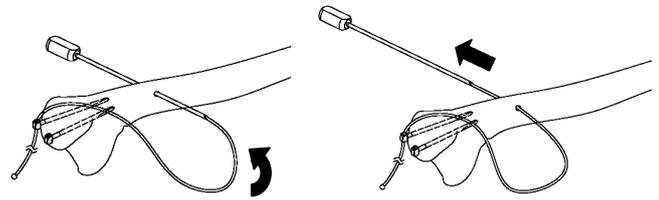


図 2

図 3

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 使用前に必要な手術器械が揃っているか確認して下さい。
- 2.0 骨孔用パッサーは破損、曲がりや及ぼすような過剰な負荷をかけないように適切に使用して下さい。
- 損傷、磨耗、曲がり等が見受けられる 2.0 骨孔用パッサーは、絶対に再使用しないで下さい。
- 先端に変形等が見受けられる 2.0 骨孔用パッサーは、絶対に再使用しないで下さい。
- 術中の 2.0 骨孔用パッサーの折れ曲り等に十分注意して下さい。
- ケーブルを通す際は、2.0 骨孔用パッサーの先端にケーブルを押し付けしないで下さい。[ケーブル破損の恐れがあります。]
- 2.0 骨孔用パッサーを鉗子や爪等で潰すような行為はしないで下さい。
- 中空内に骨屑片等が集積しないよう、中空構造を持つ器具はこれを術中に除去しながら使用して下さい。
- 2.0 骨孔用パッサーの先端からケーブルを通す際は、2.0 骨孔用パッサーの先端に十分注意して下さい。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 使用後は隙間部分、内管及び中空部分や複雑な構造を有する部分に血塊等が残らないよう速やかに洗浄後滅菌して下さい。(「保守・点検に係る事項」参照)
 [嵌合部等にある血塊や異物を除去しきれない恐れがあります。]

2. 相互作用 (他の医療機器等との併用に関すること)

- 併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・処置方法	機序・危険因子
CSP ワイヤリングシステム (Ti) (医療機器承認番号：22500BZX00063000) 及び CSP ワイヤリングシステム (SUS) (医療機器承認番号：22500BZX00064000) 以外の他社製インプラント製品	インプラントの緩み、破損の危険性が高まる恐れがある。	インプラントが適切に埋入できないため固定力等が不足する。
当製造業者製以外の手術用機械器具	手術用機械器具の不具合による危険性が高まる恐れがある。 ケーブルの緩み、脱転等により、不具合・有害事象が発生する恐れがある。	手術用機械器具の操作が正しく機能しない。 ケーブルを確実に締結できず、固定が不確実になる。

手術手技書を必ずご参照下さい

3. 不具合・有害事象

本製品の使用において、患者の状態、骨折部の形態及び骨癒合の状態などにより次のような不具合・有害事象がまれに現れることがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を施して下さい。

- 1) 重大な不具合
 - ・製品の破損、破損片の体内遺残
- 2) 重大な有害事象
 - ・偽関節、変形骨癒合、再骨折（術中／術後）
 - ・インプラントの脱転
 - ・感染症、血栓症
 - ・骨の短縮、骨壊死、骨密度の低下
 - ・金属アレルギー、異物アレルギー
 - ・手術における神経的損傷、穿孔時発熱障害
- 3) その他の不具合
 - ・挿入／抜去時の製品／器具の破損
 - ・術後のインプラントの緩み
- 4) その他の有害事象
 - ・痛みや不快感、異物感
 - ・骨癒合不全
 - ・血行再生障害
 - ・挿入／抜去時における破損器具の体内遺残

4. 高齢者への適用

一般的に高齢者は骨量・骨質が十分でないことが多いので、本製品の使用は慎重に行い、術後の経過にも十分注意して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
直射日光及び高温多湿を避け保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

1.使用前

- 1) 本手術器械は未滅菌のため、手術前に予め次に示す条件にて滅菌を施して下さい。

・滅菌方法及び滅菌条件（オートクレーブ滅菌）

熱源	水蒸気	
処理圧力	118 kPa	196 kPa
処理温度	121 °C	132 °C
処理時間	20分以上	5～10分

- 2) 製品を使用する前に摩耗、キズ、割れ、有害バリ、錆び、接合の不良等がないか、外観検査を実施して下さい。

2.使用後

- 1) 使用後は、速やかに洗浄を行い、血塊等を除去し保守・点検に係る事項に示す「滅菌方法及び滅菌条件」で滅菌を行い保管して下さい。
- 2) 洗浄中又は洗浄後の製品を放置すると錆び等が発生する恐れがありますのでむやみに放置しないで下さい。
- 3) 洗浄剤は、医療用中性洗剤等の専用の洗剤を用い、適正な濃度で使用して下さい。（洗剤の使用説明を参照して下さい。）
- 4) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けて下さい。やむを得ず使用する際は、製品の状態を確認し腐食等が発生しないよう洗浄して下さい。
- 5) 洗浄の際、製品の表面等にキズがつかないようにブラシ、スポンジ等を使用し、金属製たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用は避けて下さい。
- 6) 隙間部分や中空穴を有する製品はブラシ等で隙間部分や中空穴部分を入念に洗浄し異物を除去し、洗浄後の製品に異物がないことを十分確認して下さい。
- 7) 可動部を有するものは可動部分を操作しながら洗浄して下さい。
- 8) 分解可能なもの或いは組み合わせて使用するものは最小単位まで分解し洗浄を行って下さい。

- 9) ブラシ等で血塊等を除去できない場合は隙間部分等を血液溶解剤又は蛋白分解酵素剤等を用いて洗浄後、超音波洗浄機を用いて洗浄し、滅菌して下さい。特に隙間部分は異物が残りやすいので、異物がないことを十分確認して下さい。
- 10) 血液溶解剤又は蛋白分解酵素剤等の薬剤を使用する場合は取扱説明書を参照の上使用して下さい。
- 11) 超音波洗浄機を使用する場合は、取扱説明書を参照の上使用し、製品に異物等がなくなるまで洗浄して下さい。
- 12) 超音波洗浄機を使用する際は、ドリル等の刃物が接触し、キズ等が発生しないよう注意して洗浄して下さい。
- 13) 合成樹脂が使用されている製品に高圧蒸気滅菌を行う場合、合成樹脂部分が滅菌トレー又は滅菌用金網容器等の金属部分に直接触れないようにして下さい。
- 14) 洗浄、滅菌後可動部分を有する製品がスムーズに可動しない場合は、必要に応じ水溶性潤滑剤または流動パラフィンを塗布して下さい。水溶性潤滑剤又は流動パラフィンを使用する場合は取扱説明書を参照の上使用して下さい。
- 15) 洗浄後は、水ですすぎを完全に行い、腐食防止のために、直ちに乾燥させて下さい。
- 16) クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）を含む伝染性海綿状脳症（TSE 又はプリオン病）が疑われる、又は確認された患者に直接接触した若しくは患者の体液等で汚染された製品については、使用を止め、最新の通知等に基づき適切に処理して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

〒391-0213 長野県茅野市豊平 4734-352

電話番号 0266-76-5881

製造元

株式会社 ホムズ技研