

器 25 医療用鏡
70169000 組織収納サック
一般医療機器

HOGY 臓器回収バッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止


【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

製品全体図

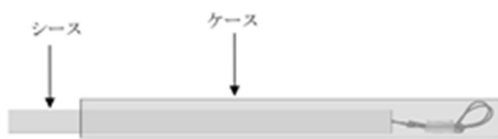

回収バッグ全体図

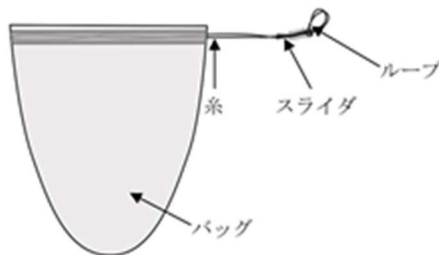

内容量：約 150mL

＜組成＞

バッグ：ポリウレタン
糸：ナイロン
スライダ：フッ素ゴム
シース：ポリプロピレン
ケース：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

・本製品は内視鏡下の手術で腹腔内に挿入する器具で、分離した組織の分散を防ぎ、組織を隔離・収納するために用いる。

【使用方法等】

・ディスプレイ製品であるため、1 回限りの使用で再使用しないください。

以下の使用法は一般的なものであり、実際の臨床使用に際しては、医師の経験に基づき、手順の追加、変更が必要です。

- 1.製品からケースを抜去します。
- 2.バッグが収納されたシースをループ部側からトロッカーに、シース先端がトロッカー先端より突出する程度まで挿入してください。
- 3.鉗子でループ部を把持しシースを抜去してください。
- 4.鉗子を用いてバッグを開口してください。
- 5.鉗子をバッグ内に挿入し、巻き癖を開放してください。

6.回収する組織をバッグに入れてください。

7.鉗子でループ部およびスライダを把持し、スライダを操作しバッグを閉じてください。

8.鉗子でループ部を把持し、バッグ間口を体表面まで誘導してください。

9.手でバッグ本体を把持し、慎重に体外へ取り出してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・鋭利な器具や高温の電極をバッグ本体及び糸に接触させないでください。[バッグ及び糸が破損する恐れがあります。]
- ・併用機器として使用するトロッカーに、予め本品が挿入できることを確認してください。
- ・バッグの口が完全に閉じられない大きな物を入れないでください。[回収する組織が汚損、破損する恐れがあります。]
- ・糸を把持する際は必ずスライダ側のループ部を把持してください。[反対側を把持すると糸が破断する恐れがあります。]
- ・バッグを体外へ取り出す際に過度な力で操作しないでください。[バッグ及び回収組織の破損、回収組織を汚損する恐れがあります。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品は過度な圧力を掛ける、もしくは掛かる状態で使用、保管しないでください。部品が潰れる等、破損する恐れがあります。
- ・開封後、未使用のものは廃棄してください。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように保管してください。

＜有効期間＞

- ・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル
東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス
お問合せ窓口：市販後管理課
TEL：03(6229)1300
0120(85)8120
FAX：03(6229)1350
URL：https://www.hogy.co.jp

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXXXX