

器 30 結紮器及び縫合器
12726020 単回使用持針器
一般医療機器

持針器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

うに保管してください。


- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

＜有効期間＞

- ・有効期間はラベルに記載

【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

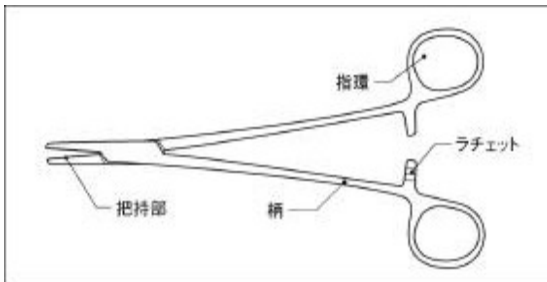

- ・本品は、13 クロム系ステンレスを使用しております。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル
東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス
お問合せ窓口：市販後管理課
TEL：03(6229)1300
0120(85)8120
FAX：03(6229)1350
URL：https://www.hogy.co.jp

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル

【使用目的又は効果】

- ・本品は縫合針を把持するために用いる器具です。

【使用方法等】

- ・本品は指環部（フィンガーリング部）に指を通し柄部（シャンク部）に指を添え、握ることにより、先端の把持部で縫合針を把持します。また、ラチェットでロックすることにより縫合針を把持、固定することができます。
- ・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。
- ・医師の判断にて適宜使用してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・電気メスを直接接触させないでください。[火傷や感電の危険があるため。]
- ・ご使用前に器具が正常に動作することを確認してください。
- ・本品は、使用中に酸や生理食塩液等金属を錆びさせる物質との接触は最小限にとどめてください。
- ・開封後、未使用のものは廃棄してください。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないよう



XXXXXXXXXXXXXXXX