

器 30 結紮器及び縫合器
36129000 縫合糸ガイド
一般医療機器

アスルク

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

・本品は縫合糸等で吻合・縫合する際、縫合糸等を整理、補助する器具です。

＜構造＞

(代表図)

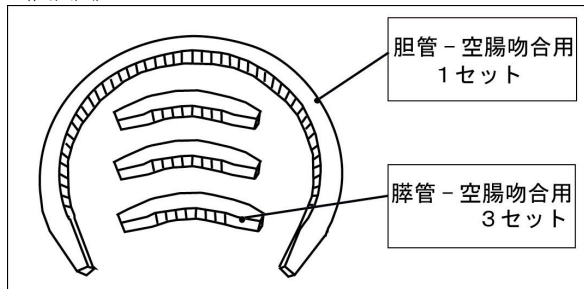

＜組成＞

- ・ポリエチレン発泡体

【使用目的又は効果】

・本品は、外科医の縫合の位置決めを容易にするために開放創の上に配置する器具です。

【使用方法等】

・ディスプレイ製品であるため、1 回限りの使用で再使用しないでください。

- 1.清潔域で滅菌包装を開封し、本品を取り出します。
- 2.外科手術時において、本品を開放創の上に置きます。
- 3.本品を開放創の上に置いて術野周辺に固定・保持する際には、本品の両端を鉗子等を用いて把持・固定してください。
- 4.縫合糸等で吻合・縫合する際、本品のスリット部（ハーフカット部）にて縫合糸等を挟み込み、整理・補助します。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・適切なサイズ選択を行ない、通常の外科手順に従って使用してください。
- ・本品は、縫合糸等の吻合・縫合時による縫合糸等の整理、補助用途に使用するものです。縫合糸等の保持は、通常、鉗子等を用いて行ってください。本品のみで縫合糸等の保持を行う場合は、保持具合を確認し使用上問題のないことを確認してからご使用ください。

・本品は、体外使用が適応となります。体腔内での使用はしないでください。

・汚染あるいは感染した創傷部に使用する場合は、適切な外科的処置を行なってください。

- ・開封後、未使用のものは廃棄してください。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないでください。

＜有効期間＞

- ・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル
東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス
お問合せ窓口：市販後管理課
TEL：03(6229)1300
0120(85)8120
FAX：03(6229)1350
URL：https://www.hogy.co.jp

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX