

器 51 医療用嘴管及び体液誘導管

70353000 気腹用チューブ

一般医療機器

HOGY 気腹チューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表図）>

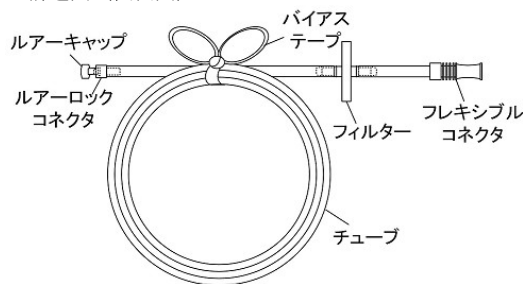

・本品のチューブ及びフレキシブルコネクタに使用されるポリ塩化ビニルは、可塑剤としてフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用しています。

【使用目的又は効果】

・気腹装置と気腹針又はトロカールとの接続に用いる柔軟性のあるチューブで、フィルターが付いています。

【使用方法等】

- ・本品は、気腹装置と気腹針又はトロカールとの接続に使用します。
 - ・ディスプレイ製品であるため、1回限りの使用で再使用しないでください。
1. ルアーキャップを取外します。
 2. フレキシブルコネクタを気腹装置のガス送気口に接続します。
 3. ルアーロックコネクタを気腹針又はトロカール等に接続します。
 4. 気腹装置を操作し、気腹を行います。
 5. 使用後は本品を取り外します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・予め医療機関で接続可能であることを確認した気腹装置と接続して使用してください。
- ・接続部を汚染させないでください。
- ・接続抜けがないように確実に差し込んでください。また、本品が引っ張られた状態や、接続部に負荷がかかる状態とならないように注意してください。[接続緩みや外れ、破損によりガス漏れが生じる可能性があるため。]
- ・本品が身体の下等に挟まれたり、チューブが折れ曲がった状態とならないように注意してください。[チューブの閉塞、破損等が生じる可能性があるため。]

・流量は最大で 45L/min としてください。[フィルターが破損する可能性があるため。]

- ・腹腔内の感染性ミストがチューブ及びフィルター内に逆流した場合は、直ちに使用を止め、新品と交換してください。
- ・開封後、未使用のものは廃棄してください。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないでください。

<有効期間>

- ・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル
東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス
お問合せ窓口：市販後管理課
TEL：03(6229)1300
0120(85)8120
FAX：03(6229)1350
URL：https://www.hogy.co.jp

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXXX