

医 04 整形用品
13695000 医療用スポンジ
一般医療機器

タフポンジV

再使用禁止

【禁忌・禁止】


<使用方法>

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造>

・代表図

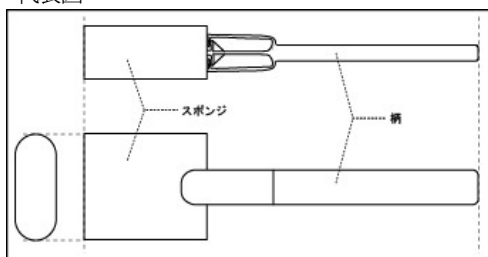

<組成>

- スポンジ：親水性ポリウレタンスポンジ
- 柄：ポリプロピレン

<原理>

- ・本品はリントが発生せず、自発的に吸収した後の保水性並びに柔軟性に富みます。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は体液、薬液等を除去するために用いるディスポーザブル製品です。本品は、手術部位、創部、縫合部位等への消毒薬の塗布及び液体の除去に使用できます。

【使用方法等】

- ・ディスポーザブル製品であるため、1 回限りの使用で再使用しないでください。

- ・医師の判断にて適宜使用してください。

<使用方法等に関する使用上の注意>

○使用前の準備事項

- 1.必要に応じて、手袋を着用してください。
- 2.包装から本品を取り出す場合は、汚染に十分注意し、本品を取り出してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・70%以上の高濃度アルコールを含む薬液を使用する場合、本品はやや膨潤しますが、機能に影響ありません。
- ・開封後、未使用のものは廃棄してください。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

<相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）>

〔併用禁忌〕（併用しないこと）

- ・pH3 以下のポビドンヨード液は使用しないでください。〔浸漬すると素材が劣化するため。〕

〔併用注意〕（併用に注意すること）

- ・グルコン酸クロルヘキシジン液、塩化ベンザルコニウム液、塩化ベンゼトニウム液などに長時間浸漬した場合、濃度管理のため新しい薬液を補給して使用してください。本品には綿球やガーゼを使用した場合と同程度の薬効成分の吸着が起こります。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。
- ・本品はウレタンスポンジであるため、光や紫外線に暴露されることにより黄色く変色することがありますが、品質、機能には影響ありません

<有効期間>

- ・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル
東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス
お問合せ窓口：市販後管理課
TEL：03(6229)1300
0120(85)8120
FAX：03(6229)1350
URL：https://www.hogy.co.jp

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX