

医 04 整形用品
34655000 医療用不織布
一般医療機器

スパーテルカバーN

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

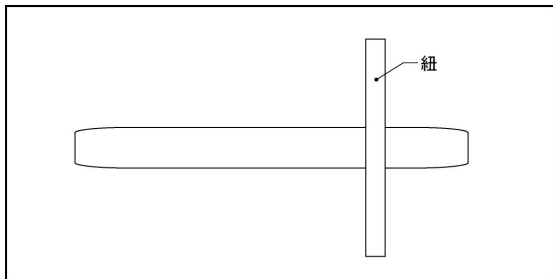

＜原理＞

- ・不織布を縫製して筒状にすることで、器具などを入れます。
- ・さらに抜けないように紐を取り付けた製品もあります。

＜組成＞

- ・ウッドパルプ、ポリエステル

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

- ・開腹手術などで腸などの臓器を愛護的に圧排するときの器具用のカバーとして使用します。

＜効果＞

- ・本品を使用することで器具の直接接触を防ぎ、臓器の損傷を防ぐことができます。

【使用方法等】

- ・ディスポーザブル製品であるため、1 回限りの使用で再使用しないでください。

- ・本品は器具などに装着して使用してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・本品は未滅菌製品であるため、用時滅菌を行ってから使用してください。
- ・滅菌にはエチレンオキシドガス滅菌を推奨します。
- ・滅菌条件については、滅菌装置の使用方法を考慮の上、適切な条件を設定してください。
- ・滅菌した後、全ての操作は無菌的に行ってください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品は未滅菌品です。

- ・本品を装着する器具などは滅菌済のものを使用してください。

- ・開封後、未使用のものは廃棄してください。

- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

＜有効期間＞

- ・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル
東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス
お問合せ窓口：市販後管理課
TEL：03(6229)1300
0120(85)8120
FAX：03(6229)1350
URL：https://www.hogy.co.jp

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX