


機械器具 30 結紮器及び縫合器
32192000 臍帯閉鎖術用クリップ
管理医療機器

臍帯クリップ（ホギ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
＜構造＞

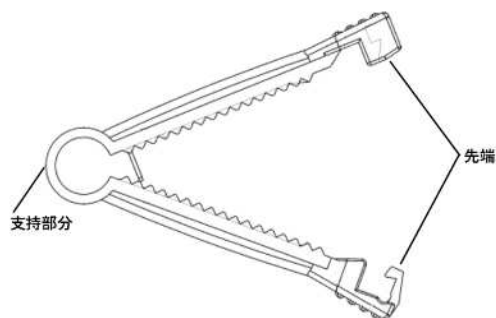

＜組成＞
PBT（ポリブチレンテレフタレート）

【使用目的又は効果】
・本製品は分娩時に、臍帯を圧迫し結紮を行う。

【使用方法等】
＜使用方法＞
1. 本製品に破損・汚損等の異常がないか確認する。
2. 臍帯の適度な位置を本製品の中央で挟む。この時、本製品の先端を締め付けパチンと音をさせ、確実に嵌合する。
3. 確実に結紮されているかを確認する。
4. 臍帯を結紮して 24 時間以上経過してから本製品の支持部分を剪刀により切断してはまず。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
・臍帯結紮以外の目的で使用しないでください。
・臍帯は本製品の中央で結紮してください。
・結紮後は確実に結紮されているのを確認するなど、常に児の状態を監視してください。特に結紮・切断の約 30 分～1 時間後には、臍帯から出血のないことを確認してください。
・本製品は 24 時間以上経過してからはずしてください。
・滅菌方法、条件によっては変色することがありますが、使用期限内であれば問題なく使用できます。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
・本品は無菌操作を熟知した医療従事者が使用してください。
・使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
・包装が破損、汚損していたり、製品に異常が見られるものは使用しないでください。
・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。
・再滅菌禁止

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞
・過度な圧力を掛ける、もしくは掛かる状態を避けて保管してください。
・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

＜使用の期限＞
・使用期限はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
株式会社 ホギメディカル
*東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス
*お問合せ窓口：市販後管理課
TEL：03(6229)1300
0120(85)8120
FAX：03(6229)1350
*URL：https://www.hogy.co.jp

＜製造業者＞
株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXXXX