


機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器 35424000

ホシザキ ウォッシャー ディスインフェクター MWD-80UA2

※【形状・構造及び原理等】

外観図

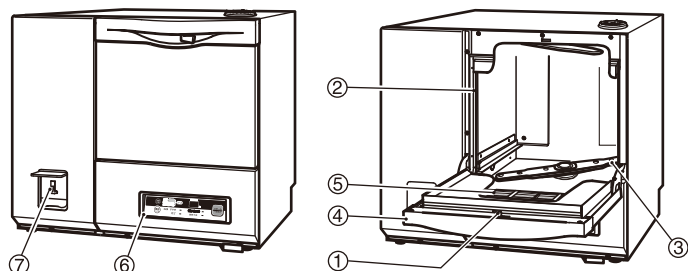

- ①ドアロック ②ドアパッキン ③スプレイノズル
④ドア ⑤フィルター ⑥オペレーションパネル
⑦電源スイッチ(漏電遮断器)

●器具に合わせた付属のラック類及びオプション品は、補充のために単体で製造販売されることがあります。

形状

1. 寸法：幅620mm×奥行450mm×高さ580mm
2. 質量：45kg
3. 洗浄槽容量：約32L
4. 接続口 給水：G1/2
給湯：G1/2
5. 排水口 内径φ28mmホース
内径φ9mmホース

電気的定格

1. 電源：単相200V
2. 交流・直流の別：交流
3. 周波数：50/60Hz
4. 最大電流：15.8A
5. 消費電力：3200W

機器の分類

1. 電撃に対する保護の形式
クラスⅠ機器
2. 保護接地方式
保護接地線による接地

作動・動作原理

選択されたプログラムにしたがい、自動的に予備洗浄、洗剤による洗浄、すすぎ、熱水消毒の工程を行い、ラックにセットされた被洗浄物を除染する。
コースの選択により、アルカリ洗剤、酵素入り洗剤等の指定が可能です。

1. 消費水量
最大42L/回
2. 排水量
最大15.6L/min

※【使用目的又は効果】

再使用可能な手術器具及び、他の手術器具の除染・消毒のために用いる洗浄器。

※【使用方法等】

設置方法

1. 電源は交流200Vを使用のこと。
2. アースを確実に接続すること。
3. 給水の水道水圧は0.05～0.34MPaの範囲で使用のこと。
4. 設置場所の室温が10℃～35℃の場所に設置のこと。

使用方法

1. 被洗浄物を本製品のラックに重ならないように入れる。
2. ラックを押し込み、ドアを閉め、ドアロックをする。
3. 電源スイッチをON(入)にして運転ボタンを押す。
4. コースボタンで希望のコースを選択する。
5. スタートボタンを押すと自動的に運転開始する。
6. 運転が終了するとブザー音によって知らせる。

※【使用上の注意】

1. 本製品は医療機器用の洗浄器です。乾燥、消毒、滅菌処理に必要な器材は、洗浄後に必ず行うこと。
2. 運転終了後は、庫内が高温になっているので、庫内が冷めてからドアを開けること。
3. 排水は、高温になることがあるので手で触れないこと。

※【保管方法及び有効期間等】

使用環境

周囲温度：10～35℃
相対湿度：85%以下
設置場所：屋内

耐用期間

6年間「自己認証(当社データ)による」
※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

※【保守・点検に係る事項】

保守点検事項は、『取扱説明書』に記載されている内容をよく読み、正しく実施のこと。
なお、補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の販売終了後9年です。補修用性能部品とは、本製品の性能を維持するために必要な部品です。

日常の保守点検事項

1. 運転前の点検(毎日)：洗剤、洗浄庫内
2. お手入れと点検
 - 1) 毎日の点検：フィルター
 - 2) 1週間に1回の点検：スプレイノズル、ポンプフィルター、ヒータ、水位センサ、外装
 - 3) 1か月に1回の点検：電源コード、電源プラグ、漏電遮断器アース線、給水配管、給湯配管、洗剤供給ホース、排水ホース

定期点検

本製品には、使用頻度にあわせて機能低下や劣化する部位がありますので定期点検による保守と安全性確認が必要です。
保守点検は、医療機器修理業者などの有資格者に、外部依頼することが認められています。定期点検実施に関するご相談は、取扱店または当社にご連絡ください。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売元：ホシザキ株式会社
電話 番 号：0854-42-1311

取扱説明書を必ずご参照ください