

**機械器具(34)医療用刀**  
**単回使用手術式角膜トレパン(14148012)**  
**ヘスバーグ バロン氏 真空トレパン**


**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**

- ・本品を使用目的以外に使用しないこと。
- ・劣化や異常が見られたときは、機器を使用しないこと。
- ・熟練した者以外は本品を使用しないこと。

**【形状・構造等】**

本品は、角膜移植をするために患者の角膜を切開するのに用いられるトレパンで、角膜を保持しながら完全に垂直切開が可能な構造になっている。また、本品は用途に応じて11種類がある。

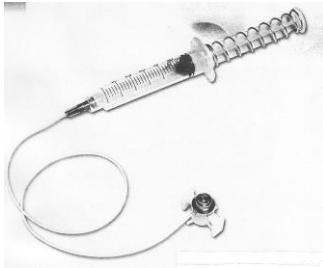

(構成品) 下記の構成品がセットされている。

- ①トレパン
- ②チャンバー
- ③ブレード
- ④スポーク
- ⑤チューブ
- ⑥ハンドル

トレパン材質: ステンレススチール

**【滅菌方法】** エチレンオキシドガス滅菌

**【使用目的、効能又は効果】**

本品は角膜移植をするための器具で、角膜を保持しながら、垂直に切開をすることができるものである。

**【操作方法又は使用方法等】**

- 1.トレパンを角膜に設置する前にブレードを角膜湾曲に合わせる(バキューム チャンバー内)確認する。
- 2.シリンジのプランガーを押す。
- 3.トレパンを角膜上の定位置に設定するため、クロスヘアが中心にくるようにする。
- 4.角膜にゆっくりトレパンをおき、そしてプランガーをはなす。
- 5.吸引を十分にするために約 30 秒待ちます。

6.吸引によって角膜が保持されているか、トレパンを離してみる。角膜が保持されていたらブレードを回転させる。

ブレード回転について、スポークを 1/4 回転(1クリック)させると 0.0635m/m 下向に回転する。そしてスポークを1回転(4 クリック)すると 0.254m/m した向に回転する。

7.全層角膜移植の場合は、通常房水が見えたら回転をストップする。

8.プランガーをはなす。

\* 本品はディスポーザブル製品であるので、再使用できない。

**【使用上の注意】**

- ・熟練した者以外は本品を使用しないこと。
- ・万一破損している場合は使用しないこと。
- ・包装に破損のあるものは使用しないこと。
- ・本品は、滅菌品であるので再使用しないこと。

**【貯蔵・保管方法及び使用期限等】**

- ・高温・多湿をさけ、水分のかからないところに保管すること。
- ・結露しないこと。
- ・本製品の使用期限は滅菌日から 3 年間とすること。

**【包装】**

単品: 1セット入り

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者: 株式会社 ホワイトメディカル

東京都荒川区東日暮里5丁目48番2号 第一ビル

tel:03(3802)0655 fax:03(3802)0688

製造業者 JEDMED Instrument Co.

5416 Jedmed Ct., Saint Louis MO 63129-2221, USA