

機械器具(34)医療用刀
単回使用手動式角膜トレパン(14148012)
販売名: パロン氏マーキングドナー角膜パンチ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品を使用目的以外に使用しないこと。
- ・劣化や異常が見られたときは、機器を使用しないこと。
- ・熟練した者以外は本品を使用しないこと。

【形状・構造等】

本品は、角膜移植用にドナーの移植片(角膜)を正確に切り出すためのトレパンで、ブレードの径は用途に合わせて 12 種類がある。

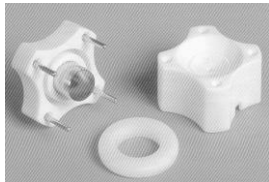

(構成品) 下記の構成品がセットされている。

- ①トレパンブレード
- ②ブロック
- ③リング(刃止め)

トレパンブレード材質: ステンレススチール

【使用目的、効能又は効果】

本品は角膜移植に際し、角膜を正確に切り出すことを目的としたものである。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.トレパンブレードにはめてあるブレード保護用リングを取り、そしてブロックをはずします。
- 2.保管されている強角膜切片をピンセットで強膜縁をつかみ、取り出して、そして繊維性スポンジで前房表面をドライにする。
- 3.内皮表面を上にして角膜をブロックにおきます。
- 4.ブロックにトレパンブレードをはめ込み、ブレードが角膜に接触するまで軽く押しあてる。
- 5.ブロック底部にある 4 つのちいさな穴へマーキングパンを差し込み主要な縫合位置をマークする。
- 6.角膜を十分に切り出すために、平坦な面でトレパンブレードをブロックに一気に打ち抜く。
- 7.ブロックには角膜が残り、ブレードに角膜移植片及び強膜縁が残る。

* 本品は Disposable 製品であるので、再使用できない。

【使用上の注意】

- ・熟練した者以外は本品を使用しないこと。
- ・万一破損している場合は使用しないこと。
- ・包装に破損のあるものは使用しないこと。
- ・本品は、滅菌品であるので再使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

- ・高温・多湿をさけ、水分のかからないところに保管すること。
- ・結露しないこと。
- ・本製品の使用期限は滅菌日から 3 年間とすること。

【包装】

単品: 1 セット入り

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 株式会社 ホワイトメディカル

東京都荒川区東日暮里 5 丁目 48 番 2 号 第一ビル

tel: 03(3802)0655 fax: 03(3802)0688

製造業者 JEDMED Instrument Co. (U.S.A)

5416 Jedmed Ct., Saint Louis Mo 63129-2221, USA