

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 圧力モニタリング用チューブセット 35529000

## ホスピーラモニタリングライン


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 脳せき(脊)髄液圧測定に用いている圧力モニタリング用チューブセットの流路切替えを行って他の圧力測定に用いてはならない。また、他の圧力測定に用いている圧力モニタリング用チューブセットの流路切替えを行って脳せき(脊)髄液圧測定に用いてはならない。

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、導管・雄嵌合部・雌嵌合部・保護キャップから構成されており、圧トランスデューサと組み合わせて使用する圧力モニタリング用チューブである。

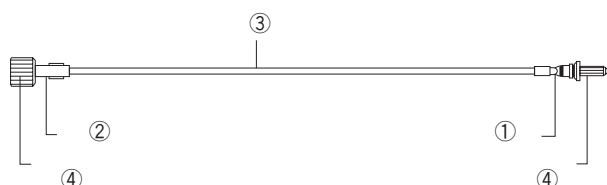

- ① スピンカラー付き雄嵌合部
- ② 雌嵌合部
- ③ 導管
- ④ 保護キャップ（使用時は外す）

- 本品は、ポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を使用している。

以下の 8 種類の長さがある。

| カタログNo. | 長さ    |
|---------|-------|
| 042962  | 15cm  |
| 042964  | 30cm  |
| 042966  | 60cm  |
| 042968  | 90cm  |
| 042970  | 120cm |
| 042972  | 150cm |
| 042974  | 180cm |
| 042976  | 210cm |

#### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、カテーテルに接続することによる観血的血圧測定に使用する圧トランスデューサと組み合わせて使用する。

#### 【品目仕様等】

本品は、圧力モニタリング用ラインに接続した際、気密性を維持することができること。

#### 【操作方法又は使用方法等】

1. 無菌的操作で包装を開封し、本品を取り出す。
2. 汚染に十分注意した上で、保護キャップを外し、圧力モニタリング用ラインに接続する。
3. 圧力モニタリング用ラインをフラッシュして、気泡を完全に除去する。
4. 使用後は、本品を含む圧力モニタリング用ラインを患者から取り外す。
5. 本品は、1 回限りの使い捨て製品（ディスposable）であるので、使用後、院内規定に従い、本品を廃棄する。

#### 使用方法に関連する使用上の注意

- 接続の際には、すべての接続部（特にスピンカラー部分）が締まっていることを確認すること。
- システム内に空気が入っていないことを十分に確認すること。システム内に空気が入っていると、モニタリング装置が最大限の性能を発揮することが出来ず、最良のダイナミックレスポンスを得ることが出来ない。
- 本品を観血的血圧測定以外の目的で使用した場合、液漏れが生じる或いは導管と嵌合部が外れるおそれがある。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

1. 包装が破損しているものは使用しないこと。
2. 使用する医薬品等の添付文書を確認後、使用すること。
3. 脂溶性の医薬品等ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する恐れがあるので注意すること。
4. 使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
5. 接合部の過度の締め過ぎは、接合部の破損、緩みや外れ等が生じる恐れがあるので注意すること。
6. ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法：水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
2. 使用期限：製品包装上に記載。（自己認証（当社データ）による）

#### 【包装】

1 箱 50 個入り

**【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】**

製造販売業者：

ホスピーラ・ジャパン株式会社

〒540-6026 大阪市中央区城見 1-2-27

電話：0120-999-256

外国製造所：

Hospira Ltd., ドミニカ共和国