

添付文書

2025年11月作成(第1版)

医療機器製造販売届出番号：28B2X10010H01001

医療用品04整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

healogy リカバリーウェア（リカパSD）

【禁忌・禁止】

- ・ 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は、使用しないこと。
- ・ 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】


1. 形状、構造 (寸法単位:cm、公差:±10%)

◆クールネック長袖シャツ



	M	L	XL
着丈	72	74	76
肩幅	64	66	68
身幅	58	60	62
袖丈	44.5	45.5	46.5

◆ジョガーパンツ

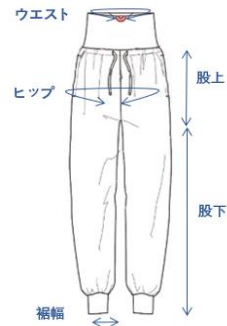

	M	L	XL
ウエスト	62	68	73
ヒップ	98	103	108
股上	25	25.5	26
股下	72	73	74
裾幅	24	26	28

◆クールネック半袖シャツ



	M	L	XL
着丈	72	74	76
肩幅	64	66	68
身幅	58	60	62
袖丈	14	14.5	15

◆ハーフパンツ



	M	L	XL
ウエスト	62	68	73
股上	25	25.5	26
股下	27	28	29
裾幅	50	52	54

2. 原理

本品は肌面にプリントした鉱物が遠赤外線を輻射し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善します。

【使用目的又は効果】

【遠赤外線による血行促進作用】

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉のこりの改善・軽減・緩和

【使用方法等】

本品は繰り返し使用可能です。

- ・ 本品に破損がないことを確認してください。
- ・ 衣類として着用してください。
- ・ 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能です。
- ・ 本品の効果には個人差があるため、長期間の着用が望ましいです。
- ・ 本品は素肌の上に直接ご着用ください。
- ・ 上下セットの着用をおすすめします。

【使用上の注意】

- ・ 使用中に体に異常（発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状を含む）を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・ 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は、使用しないでください。
- ・ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方、持病のある方、体温38度以上（有熱期）の方は、ご使用前に医師に相談してください。
- ・ 洗濯する際は、洗濯絵表示に従ってください。
- ・ 蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。
- ・ 濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。
- ・ 濡れた状態での放置やつけ置き洗いは避けてください。
- ・ アイロンの使用は避けください。
- ・ もみ洗いや摩擦により、色落ち、色移り、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ タンブラー乾燥機の使用は避けてください。
- ・ 湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- ・ しばらく使用しない時は、一度干してから湿気のない場所で保管してください。

【耐用期間】

2年（使用状態、保管状態による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ボディーオーラ株式会社

住所：〒674-0082

兵庫県明石市魚住町中尾1032番地

電話：078-946-8055

許可番号：28B2X10010

ご使用前に必ずこの文書をお読みください。