

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 皮膚接合用テープ（70438000）

DCフレックス

再使用禁止

【警告】

- 本品を剥がすときに皮膚の異常（皮膚表皮の剥離、水泡、痛み等）が発生することがある。
- 人によってはまれに、本品の使用により皮膚の異常（腫れ、水泡、発赤、発疹等）が発生することがある。


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止 [品質の低下や汚染の可能性がある。]
- 本品を貼付する皮膚に、血液、油分、水分などが付着している場合や、体毛が濃い部位には、そのままから貼付しないこと。[そのまま貼付すると、十分に粘着せず貼付中に剥がれてしまうおそれがある。]
- 本品を剥離する際、傷口から出血したり、損傷したりするおそれがあるので、ゆっくり丁寧に剥がすこと。

【形状、構造及び原理等】

本品には4,8,12,16及び20cmのサイズがある。

20cmサイズの本品を下図に示す。

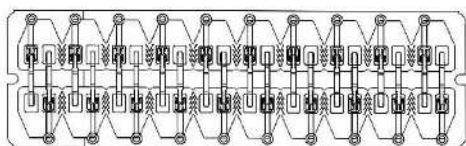

人体に接触する部分の組成:アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

皮膚創部の閉鎖、接合又は補強等に用いる、片面を粘着剤でコーティングしたプラスチック製のテープである。

【使用方法等】

1. 使用前

- 1) 本品は滅菌済製品のため、開封後、直ちに使用できる。
- 2) 本品はディスプレイ製品のため、1回限りの使用のみで再使用できない。
- 3) 貼付部位及びその周辺の皮膚を洗浄し、十分に乾燥させておくこと。

2. 使用方法

- 1) 本品の包装を無菌的に開封する。
- 2) 本品を包装より取り出し、短い側の剥離フィルムを剥がす。
- 3) 皮切が本品の中央にくるようにして、両端が覆いつくされる1cmほど広めに残りの剥離フィルムを剥がしながら貼付する。
- 4) 貼付後、本品をしっかり押え皮膚に密着させる。
- 5) 両方向からストラップを引いて、創部の締付を行う。
- 6) 創部締結が完了したら、ストラップの端を切除する。
- 7) もし、締付し過ぎた場合、以下の手順で修正を行うことができる。
ロック部を押さえてストラップを上方へ引張り、締付前の位置で指で押しつけてセットして再締付を行う。

3. 使用後

- 1) 本品を剥がす際には、以下の手順で実施する。
本品の片端を持ち上げ約180° 方向へ折り返し、皮膚を押さえながら切開創に沿ってゆっくりと剥がす。
剥がすことが困難な場合、無理に剥がそうとせず、水や石鹸水を使用すると粘着性が弱まり剥がれやすくなる。
- 2) 本品は単回使用製品であるため、適切に廃棄する。

4. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 使用前に本品に汚れ、破損、変形、傷、かき傷や動作の異常が無いことを確認すること。
- 2) 本品使用後は、医療廃棄物として適正に処理すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的事項

- ・ 本品の使用方法を熟知し、経験のある医師のみが使用すること。
- ・ 本品は滅菌済製品のため、使用前に包装が開封又は破損していないことを確認すること。無菌包装に欠陥のある製品は使用せず、廃棄又は返品すること。再滅菌は行わないこと。
- ・ 本品の使用目的(手術、処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。
- ・ 本品を貼付する際には、皮膚にしわが寄らないように注意すること。
- ・ 本品は皮膚刺激性試験を実施済みですが、全てのアレルギーが起らないというわけではありません。
- ・ 不測の事態に備え、常に代替品を用意しておくこと。

【保管方法及び有効期限等】

貯蔵方法: 以下の条件下で保管および使用すること。

温度:10～40℃, 湿度:30～70%RH, 気圧:700～1060hPa

有効期限: 使用の期限。外箱の表示を参考（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社豊栄工業

住 所:〒441-1346 愛知県新城市川田字新間平1-369

電話番号:0536-22-0696

取扱説明書を必ず参照すること