

販売名：マニーアイド縫合針

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象＞

本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

＜使用方法＞


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.原材料

ステンレス（ニッケル、クロム含有）・シリコーン

*2.形状

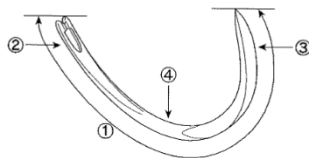

①わん曲：0° ～225°

直とわん曲を組み合わせた形状のものがある。

②孔形状：普通孔、弾機孔

ひとつの縫合針に双方の孔を共有するものもある。

③刃形形状：鈍刃、丸刃、角刃、逆角刃、トロッカー

④中央部形状：円、扁平

【使用目的又は効果】

組織に縫合糸を挿入したり、引き抜いたりするために用いる針である。
本品は単回使用である。

【使用方法等】

*本品に縫合糸を取り付け、持針器で把持し、組織を通過させる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1.本製品は未滅菌品であるので、必ず滅菌作業を行い、滅菌されていることを確認してから使用すること。滅菌は製品を滅菌バッグ等に入れて行なうこと。

2.滅菌条件は下記、又は各施設において器具類の滅菌の有効性が確認された滅菌条件で行なうこと。

滅菌方法	温度	時間
高圧蒸気滅菌	121～124℃	20 分

3. 糸孔部（弾機孔：バネ）付近や針先を持針器で把持すると、針折れ、糸切れ等のおそれがあるので、糸孔部分の端から針先までの 1/3 から 1/2 の部分を把持すること。



- 変形した針、傷ついた針は針折れの原因になるので使用しないこと。
- 縫合時、針で創縁を寄せたり合わせたりしないこと。
- 持針器は使用針にあったサイズ、機能のものを使用すること。

【使用上の注意】

＜不具合・有害事象＞

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

不具合

1.不適切な取り扱い、管理による破損、変形、腐食

*2.不注意による針刺し事故

*3.金属疲労による破損

有害事象

1.不適切な取り扱い、使用方法による血管、神経、軟部組織の損傷

2.破損した器械器具の破片の体内留置

*3.創部の感染症、炎症

*4.構成金属に対するアレルギー反応

＜その他の注意＞

心臓や中枢神経系には使用しないこと。[使用経験がなく、安全性が確立されていないため]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

*＜有効期間＞

使用期限は外装ラベルに表示のとおり。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

マニー株式会社

〒321-3231

栃木県宇都宮市清原工業団地 8-3

営業部

電話番号：028-667-1117 FAX 番号：028-667-4964