

類別：機械器具 3 4 医療用刀
 管理医療機器 一般の名称：単回使用メス
 JMDNコード：3 5 1 3 0 0 0 2

販売名：マニー®ENT ナイフ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

1) 本品に感作又は金属アレルギーを示す患者には使用しないこと。

＜使用方法＞

1) 本品ブレードを対象部位以外に接触、ぶつけたものは使用しないこと。[刃が損傷して極端に切れ味が低下するため]


2) 本品を再滅菌、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 本品はハンドル付きのナイフで滅菌済み品である。

2. 形状

NKT35(上)、NKT35C(下)

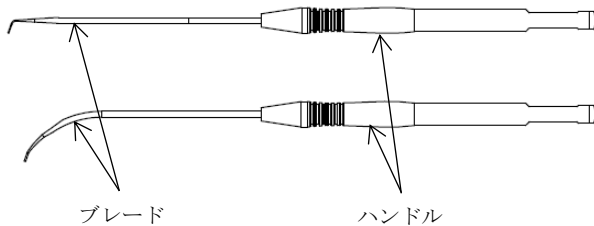

3. 構造及び原理

ハンドル部で操作し、ブレード先端で切開を行うことができる。

4. 原材料

ブレード：ステンレス鋼（ニッケル・クロム含有）

コーティング：シリコーン

ハンドル：PBT 樹脂

【使用目的又は効果】

耳鼻咽喉科手術時に、身体組織の切断及び切離に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 一般的な切開方法等による。


2. ケースの取扱い方法

1) 取り出し方法

刃が何処にも触れない様に細心の注意を払いながら、下図①の部分をつまみ、持ち上げる。


2) 収納方法

刃先を下向きにして、下図②の部分を完全に奥まで刺し込む。次に、ハンドルがケース③の部分に固定されるまで、①の部分を押す。

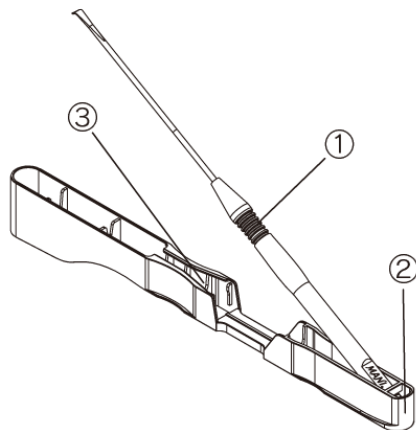

3) その他

下図矢印の溝の部分（2ヶ所）は、箸置きイメージでナイフを立てかける事が出来る。

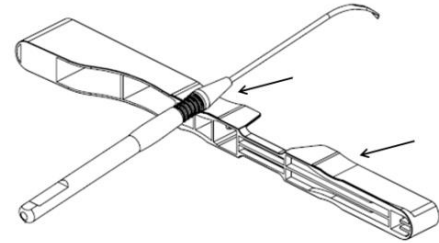

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 本品は鋭利なブレードを有するため、取り扱いには細心の注意を払うこと。汚染されたブレードで不注意によって外傷事故が起こると、血液性疾患の病原体の伝染につながる可能性がある。
- 2) ケースから取り出したナイフは、ナイフケースを使用する等して、刃がどこにも触れないように注意して取り扱うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 2) 使用目的に応じて適切な品種を選択して使用すること。
- 3) ナイフの受け渡しはケースに収納して行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間

適切な方法で保管した場合の使用期限は、個装及び外箱ラベルに記載。[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：マニー株式会社

TEL：028-667-9911 FAX：028-667-6177