

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 単回使用関節手術用器械 70964012
(単回使用整形外科用バー 36249002)

上肢用単回使用手術器械 (滅菌)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

(使用方法)

・ 再使用禁止

・ 再滅菌禁止

(併用医療機器)

・ 他社製品 (指定製品以外)、専用以外の機械器具との併用
(「相互作用」の項参照)

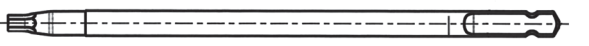
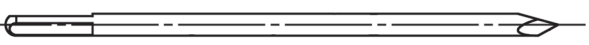
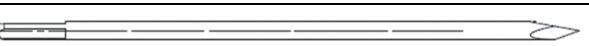

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

- * ステンレス鋼、コバルトクロム合金、ニッケルチタン合金
★ステンレス鋼、コバルトクロム合金、ニッケルチタン合金には
ニッケルが含まれている。

2. 形状・構造及び原理等

本添付文書に該当する製品の製品名、製品 (カタログ) 番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

製品名: COCR 製ガイドワイヤー	
製品名: 3mm ドリル先 (A タイプ)	
製品名: パイロットドリル	
製品名: アライメントピン スレッドチップ	
製品名: スクリュードライバー先 3.5mm	
製品名: アラインメントピン スムース S	
製品名: 3×75mm ガイドピン	
製品名: ガイドワイヤー	
製品名: ガイドワイヤー	
製品名: 3.5mm ドリル先	
製品名: ドリル先 パフォーマンス用	
製品名: 3×100 MM ガイドピン	
製品名: PERFORM FRACTURE ドリル	
* 製品名: ニチノールガイドワイヤー	
** 製品名: SHOULDER ID トランジションガイドピン	

【原理】

関節手術に用いる単回使用の手術器械及び骨手術時に骨組織の孔あけ、整形等に用いるバーである。

【使用目的又は効果】

関節手術に用いる単回使用の手術器械及び骨手術時に骨組織の孔あけ、整形等に用いるバーである。

【使用方法等】

1. 使用方法 (詳細な手術手技については手技書を参照すること)

- 1) COCR 製ガイドワイヤー
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- 2) 3mm ドリル先 (A タイプ)
骨に孔を開ける。
- 3) パイロットドリル
骨に孔を開ける。
- 4) アライメントピン スレッドチップ
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- 5) スクリュードライバー先 3.5mm
スクリュー★を挿入する。
- 6) アラインメントピン スムース S
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- 7) 3×75mm ガイドピン
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- 8) ガイドワイヤー
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- 9) ガイドワイヤー
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- 10) 3.5mm ドリル先
骨に孔を開ける。
- 11) ドリル先 パフォーマンス用
骨に孔を開ける。
- 12) 3×100 MM ガイドピン
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- 13) PERFORM FRACTURE ドリル
骨に孔を開ける。
- * 14) ニチノールガイドワイヤー
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。
- ** 15) SHOULDER ID トランジションガイドピン
インプラント★の設置位置のガイドとして用いる。

★本品外

本品と組み合わせて使用する機器は、自社指定製品を用いること。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 表面の損傷や機械器具形状の変更を防ぐ為、各機械器具は丁寧に取り扱うこと。
- 2) ドリルや切断用の機械器具は鋭利であること、締結用機械器具はその締結部が摩耗していないこと、計測機能付き機械器具は目盛が視認可能であることを確認する。
- 3) 術前に、手術に必要な各機械器具が組み合わせて機能することを確認すること。
- 4) 術中、インプラントと機械器具又は機械器具同士がしっかりと接続されていることを繰り返し確認すること。
- 5) ドリルで金属インプラントをドリリングしないこと。[インプラントの強度が低下し、負荷で破損するおそれがある。また、ドリルが損傷を受ける]
- 6) 術野内で整備する際に機械器具に対して治療部位以外が損傷を受ける原因になるような過度な力をかけないようにすること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の原材料はインプラントを目的としたものではない。
本品が破損した場合、術後合併症が起こる可能性があるため、破片が体内に残らないようにすること。
- 2) 生命の維持に必要な不可欠な重要臓器、神経、血管の近くで機械器具を使用する場合は特に注意すること。

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の 名称等	臨床症状 措置方法	機序・危険因子
・他社製品（指 定製品以外） ・専用以外の 機械器具	摩耗、破損、変 形等の有害事 象が発生する 可 能 性 が あ る。	意図した使用がで きず、インプラント を正確に骨に設置 できない。

3. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

(1) 不具合

〔その他の不具合〕

- 1) 本品の破損、変形、分解

(2) 有害事象

〔その他の有害事象〕

- 1) 本品の不適切な使用又は不具合による神経障害、神経損傷、
血行障害及び異所性骨形成
- 2) 感染症
- 3) 本品の不適切な使用又は不具合による手術時間の延長
- 4) 骨の亀裂、骨折、穿孔
- 5) 破損した本品破片の体内遺残による、アレルギー、感染症、
生物学的性質の合併症、破片除去のための再手術（X 線不透
過性コンポーネント等と記載されていない限り、非金属材料
製の器具およびその破片は X 線透視画像等では見えない
ことがある。）

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。

4. 高齢者への適用

高齢者は、骨粗鬆化している場合が多く、術中に過度の力を加えることにより骨折する可能性があるので慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけて保管

有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ストライカー株式会社

連絡先電話：03-6894-0000（代表）

製造業者：トルニエ サス（モンボノ）

TORNIER S.A.S. (Montbonnot)（フランス）

トルニエ インク（コロンビア シティ）

Tornier, Inc. (Columbia City)（アメリカ）