



文書番号 JJ-02

*2022 年 5 月改訂（第 2 版）
2022 年 3 月作成（第 1 版）

医療機器承認番号：30400BZX00061000

医療用品 4 整形用品
高度管理医療機器 全人工膝関節 35667000

トライアスロン人工膝関節システム

再使用禁止

【警告】

（使用方法）

骨セメントを使用する際には、術前に使用する骨セメントの使用上の注意を熟読すること〔骨セメントによる重篤な有害事象の報告がある〕。

【禁忌・禁止】

（使用方法）

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
（併用医療機器）
- ・他社製品（指定製品以外）、専用以外の機械器具との併用（「相互作用」の項参照）
（適用対象（患者））
- ・膝関節内又は周囲に、急性もしくは慢性の感染が疑われる場合
〔感染巣の転移や敗血症等の併発のおそれがある〕
- ・骨成長の終了前の症例〔成長板を傷付け、骨成長を阻害するおそれがある〕
- ・側副靭帯の完全性及び機能の欠損による二次性の重篤な膝関節の不安定性がある場合〔インプラントに過度の負荷がかかり、緩み、摩耗の促進、インプラントの亜脱臼、不安定性、および可動域の減少等につながるおそれがある〕
- ・インプラントの不安定化や固定の失敗あるいは手術後の合併症をきたす精神疾患や神経筋疾患を認める場合〔インプラントの破損や再手術のおそれがある〕
- ・インプラントを支持、固定できない母床骨の疾病や前回のインプラント設置による骨の脆弱化が認められる場合〔母床が損なわれ、緩みにつながるおそれがある〕
- ・材料に含まれている金属成分によるアレルギーがあると確認された場合

【形状・構造及び原理等】

1. 組成


トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント及びトライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント
：コバルトクロム合金
トライアスロン CR 脛骨インサート X3
：超高分子量ポリエチレン及びコバルトクロム合金
トライアスロン 膝蓋骨コンポーネント X3
：超高分子量ポリエチレン
★コバルトクロム合金にはニッケルが含まれている。

2. 形状・構造及び原理等

本システムの構成は以下のとおり。
本添付文書に該当する製品の製品名、製品（カタログ）番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

トライアスロン CR 大腿骨コンポーネント	
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネント	
トライアスロン CR 脛骨インサート X3	

トライアスロン 膝蓋骨コンポーネント X3

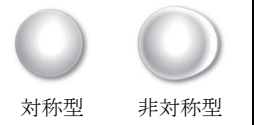

対称型

非対称型

【原理】

変形性関節症、外傷性関節症、無血管性壊死を含めた非炎症性変形性関節症、関節リウマチ又は外傷後関節症に続発した膝関節疾患で疼痛があり関節機能に障害のある場合、外傷後、正常な膝関節アライメントが失われた場合、関節機能不全の場合、中等度の内外反、屈曲変形であるが、靭帯構造は機能し安定を保てるよう回復し得る場合、以前に行われた人工膝関節置換術、その他手術の再手術、非回復性の膝骨折、靭帯構造が不安定で、人工関節面における安定性として抑制が強い表面形状をしたインプラントが必要な場合（★）、後十字靭帯の欠損又は機能不全（★）、膝関節の前後方向における重度の不安定性がある場合（★）に、膝関節内に埋め込むことで膝関節の代用として機能する。

★ PS タイプのコンポーネントを併用する場合に限る。
用時には他の人工膝関節コンポーネントと組み合わせて使用される。脛骨インサート及び膝蓋骨コンポーネントの原材料である超高分子量ポリエチレンには耐摩耗性の向上を目的とした架橋処理が施されている。

【使用目的又は効果】

本品は、関節機能再建のために人工膝関節置換術において使用される。

【使用方法等】

1. 使用方法（詳細な手術手技については手技書を参照すること）

- 1) 大腿骨遠位、大腿骨前後チャンファの骨切りを行う。
- 2) 脛骨近位の骨切りを行う。
- 3) 症例に応じて膝蓋骨の骨切りを行う。
- 4) 各部にトライアル★を設置し、試調整を行う。
- 5) 脛骨近位部に骨セメント★を使用して脛骨ベースプレートを設置する。専用の打込み器具★を用いて、脛骨ベースプレートを脛骨近位部に打込み、脛骨インサートを前方からスライドさせ、脛骨ベースプレートの装着部に合うように挿入する。その後脛骨インサートを専用の器具★で軽くたたきしっかりと固定する。
- 6) 大腿骨遠位に骨セメント★を使用して大腿骨コンポーネントを設置する。専用の打込み器具★を用いて、大腿骨コンポーネントを大腿骨遠位部に打込む。
- 7) 症例に応じて膝蓋骨コンポーネントを設置し、位置を元に戻し、膝関節の可動域、安定性、膝蓋骨のトラッキングを確認する。
★自社指定品

* ＜併用される他の人工膝関節コンポーネント＞

トライアスロン CR 大腿骨コンポーネントの併用品		
承認番号	販売名	構成品
22300BZX00093000	トライアスロン CS X3 脛骨インサート	脛骨インサート
22400BZX00326000	トライアスロン ビーズ PA セメントレス人工膝関節システム	膝蓋骨コンポーネント
22600BZX00540000	トライアスロン トライタニウム 膝蓋骨コンポーネント	膝蓋骨コンポーネント
トライアスロン 脛骨プライマリーコンポーネントの併用品		
承認番号	販売名	構成品
22300BZX00093000	トライアスロン CS X3 脛骨インサート	脛骨インサート

30200BZX00376000	トリアスロン 人工膝関節システム PS	脛骨インサート PS 及び PSR
トリアスロン CR 脛骨インサート X3 の併用品		
承認番号	販売名	構成品
22200BZX00575000	トリアスロン ロープロファイル脛骨トレイ	脛骨トレイ
22200BZX00886000	トリアスロン TS 人工膝関節システム	脛骨トレイ
22400BZX00326000	トリアスロン ビーズ PA セメントレス人工膝関節システム	大腿骨コンポーネント CR 型 脛骨ベースプレート (ノーマル型及びスクリュー固定型)
22500BZX00476000	トリアスロン トライタニウム 脛骨ベースプレート	脛骨ベースプレート
トリアスロン 膝蓋骨コンポーネント X3 の併用品		
承認番号	販売名	構成品
20400BZY00563000	DURACON 人工膝関節システム	大腿骨コンポーネント
21300BZY00223000	トータルスタビライザー人工膝関節システム	大腿骨コンポーネント
22200BZX00886000	トリアスロン TS 人工膝関節システム	大腿骨コンポーネント
22400BZX00326000	トリアスロン ビーズ PA セメントレス人工膝関節システム	大腿骨コンポーネント CR 型
22400BZX00333000	トリアスロン PS 大腿骨 ビーズ PA セメントレス	大腿骨コンポーネント PS 型
30200BZX00376000	トリアスロン 人工膝関節システム PS	大腿骨コンポーネント PS

大腿骨コンポーネントと脛骨インサートは、同サイズ、ワンサイズアップ及びワンサイズダウンの組み合わせで使用できる。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 手術及び抜去手術には専用の機械器具を使用すること。
- 専用の機械器具は使用前に摩耗や損傷がないことを確認すること。
- X 線テンプレートを使用时、術前にインプラントする製品のサイズや型を予測すること。
- トリアルを使用してサイズの決定、試験整備及び可動域の再評価を行うこと [製品を開封する必要があるため、製品の滅菌状態を保つことができる]。
- インプラントはラベルとインプラント上の刻印でサイズ等を確認すること。
- 組立て前のインプラントの摺動面を常に清潔に保つこと。
- 脛骨インサートの保持ワイヤーは触ったり取り外したりしないこと [脛骨ベースプレートへの正常な保持ができなくなる]。誤って触ったり外してしまったりした場合は使用しないこと。
- インプラント摺動面の研磨部分が堅い表面やざらざらした表面に触れないように注意すること。
- 術後、インプラント部位を完全に清浄にすること [関節面の摩耗の原因となりうる骨片、骨セメント片等を除去する]。
- 脛骨インサートを取り外す際、脛骨ベースプレートの表面に傷をつけないよう注意すること。
- 脛骨インサートを脛骨ベースプレートに組み込んだ後で取り外すと脛骨インサートは破損する。
- 脛骨インサート及び脛骨ベースプレートのロッキングを強固で確実にするため、脛骨ベースプレートの上の骨片、軟部組織、及びセメントの除去、並びに脛骨インサートの後方スロットの脛骨ベースプレート内側への装着確認を行うこと。
- 抜去が必要な合併症、不具合の処置を行う際は、抜去手術は困難であることを考慮すること (インプラントの変位や

軟部組織等の癒着による)。

【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

- BMI 25 以上の体重過剰、BMI 30 以上の肥満 [インプラントへの過剰な荷重がかかり、インプラントの固定不良、緩み、脱臼、インプラント自体の破損を招く可能性がある]
- 以前に人工関節置換術等の既往歴がある場合 [手術及び術後に関して予想される予後を慎重に話し合う必要がある]
- 感染症の既往歴がある患者 [感染症が起こることがある]
- 大きな衝撃・荷重の加わる職業や活動を行う患者 [衝撃や荷重が治療の経過に悪影響を与えることがある]

2. 重要な基本的注意

- 期限切れ又は無菌包装に欠陥のあるパッケージは再滅菌を行わず、使用しないこと。
- 医師は、患者に対し、以下の点について予め十分に説明を与えること。
 - インプラントは、健康な骨と同じレベルにまで機能を回復させる機能を持つものではないこと
 - リハビリテーションの計画に沿って治療を受け、適切な装具等を使用すること
 - 全身に負荷のかかる動作については医師の指示に従うこと (荷重をかけるのが早すぎた場合や、活動性が高すぎた場合に問題が発生する可能性があること、またその場合に再手術が必要となる可能性があること)
 - 患者が術部に何らかの異変を感じた場合は直ちに医療機関を受診すること
- 医師は、インプラント周囲の骨の状況のみならず、インプラントの位置と状態を記録するため、定期的な経過観察を実施することを推奨する。
- 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されている。本品を埋植した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である [自己認証による]：
 - 静磁場強度：1.5T、3.0T のみ
 - 静磁場強度の勾配：3000 gauss/cm (30 T/m)
 - MR 装置が示す全身最大 SAR：2 W/kg (通常操作モード)
注) MR 検査時に患者の膝をテーブルから持ち上げないこと。上記条件で 15 分のスキャン時間において本品に生じ得る最大の温度上昇は 4.5℃以下である。本品が 3.0T の MR 装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像からおおよそ 90mm である。

3. 相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

(1) 併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状措置方法	機序・危険因子
・他社製品 (指定製品以外) ・専用以外の機械器具	摩耗、緩み、破損等の有害事象が発現する可能性がある。	形状、強度が異なり、インプラントを正確に骨に設置できないことで緩みおよび摩耗が発生し、材質の違いによりインプラントが腐食する可能性がある。

4. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

(1) 不具合

【重大な不具合】

- インプラントの脱臼、亜脱臼 [患者の不適切な活動や外傷、インプラントの不適切なアライメントや設置、軟部組織の弛緩等の生体力学的諸条件によって起こることがある]
- インプラントの破損、緩み、又は移動 [転倒等による外傷や、不十分な固定により生じることがある。早期の緩みは不十分な初期固定、潜伏性感染、早期のインプラントへの荷重又は外傷から生じる。中長期の緩みは外傷、感染、生理的又は力学的な問題 (高い応力集中等) 等から発生し、その後の骨溶解や疼痛を生じる可能性がある]
- インプラントの疲労破損 [体重の重い活動的な患者に起こりがちである。反対側の関節に障害がある場合や、手術側への不均衡な荷重により生じることがある。骨や軟部組織の切除量により生じることがある。脛骨インサートのポストへの過荷重、過度な運動や外傷、不適切なインプラント

- の配置、長期にわたる使用期間が原因となる場合がある]
- 4) 超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) の摩耗 [インプラントの
のアライメント不良、靱帯バランス不良、骨の吸収、イン
プラントの緩み及び感染、骨片・骨セメント片の介在、患
者の不適切な活動、肥満等によって起こることがある]

(2) 有害事象

【重大な有害事象】

- 1) 金属への過敏反応
- 2) 脂肪塞栓から派生する成人性呼吸窮迫症候群、出血による
血管の虚脱、心筋梗塞、死亡等（これらに限定されるもの
ではない）
- 3) 骨セメント使用時の血圧低下
- 4) 泌尿器生殖器障害（例：尿路感染）、胃腸障害（例：胆嚢
炎、潰瘍、麻痺性イレウス）、血管障害（例：血栓性静脈
炎）（これらに限定されるものではない）
- 5) 大腿骨、脛骨、膝蓋骨の骨折
- 6) 不適切な可動域 [インプラントの不適切な選択・設置、イン
プラントへの衝撃又は関節周辺における石灰化・ジスト
ロフィーが原因で起こることがある]
- 7) 屈曲域の拘縮、可動域の狭まり及び下肢の延長ないしは短
縮
- 8) 脚長差による患肢及び健常肢への影響 [不均衡なバランス
によって起こることがある]
- 9) 術後の靱帯等周囲組織の不安定性
- 10) インプラント周囲の骨溶解・骨吸収 [関節置換術の結果、
骨リモデリングによる骨吸収が発生することがある。骨リ
モデリングはインプラントによる骨への応力分布の変化
によって生じる。骨溶解は骨セメント、金属、超高分子量
ポリエチレン等の粒子に対する異物反応の結果である。粒
子は各インプラント間、インプラントと骨の間の相互作用
によって生じ、主に癒着、剥離及び疲労等の摩耗メカニズ
ムによるものである。骨吸収・骨溶解は将来的にインプラ
ントの弛み等の問題を引き起こしインプラントの摘出が
必要になることがある]
- 11) 金属・ポリエチレンコンポーネントの微粒子による体への
影響 [リンパ節、組織・臓器への蓄積が報告されている。
しかし、この蓄積における体への影響、発癌性及び全身性
疾患への影響については現在臨床的な証明はない]
- 12) 金属コンポーネント成分による体への影響 [特殊な環境条
件下で組織培養物あるいは組織・臓器への発癌性を示す金
属化合物を含む合金が使用される場合がある。しかし、合
金自体が発癌性を示すことについては現在臨床的な証明
はない]
- 13) 一過性菌血症の可能性

【その他の有害事象】

- 1) 一時的又は永久的損傷により影響を受けた四肢の疼痛・痺
れ等の末梢神経障害、血腫や深部静脈塞栓等の血行障害、
関節周辺における異所骨形成及び石灰化、また、臨床的に
問題とならない程度の軽度な神経障害 [手術時の侵襲に起
因する]
- 2) 創深部及び周囲での感染症
- 3) 創部治癒の遅れ
- 4) 金属製インプラントの内在に起因する X 線や MRI 及び CT
画像へのハレーション等の干渉、又は MRI による発熱
- 5) 肺動脈塞栓症又は心筋梗塞を含む心臓血管障害

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。

5. 高齢者への適用

- 1) インプラント使用についての必要な一定の制限及び注意
事項を無視し、固定不良又は他の合併症に至る可能性があ
るため、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけて保管
有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ストライカー株式会社
連絡先電話：03-6894-0000（代表）
製造業者：ハウメディカ オステオニクス コーポレーション
Howmedica Osteonics Corp.（アメリカ）