

機械器具（76） 医療用吸入器
一般的名称：超音波ネブライザ JMDNコード：12719000

ポケットネブ

【警告】

1. 薬液の種類、用量、用法、使用時間・間隔については、必ず医師の指導に従ってください。
2. 吸入以外の目的には、絶対に使用しないで下さい。
3. ご購入後、初回使用、又は長時間使用していない時は、薬液カップ、吸入マスクを洗浄して下さい。
4. 薬液カップ、吸入マスクなどは、使用後に洗浄して下さい。洗浄したパーツは、必ず速やかに乾燥させた上、再汚染がないように保管して下さい。
5. 本品は、同一患者使用のこと。
6. 乳幼児やお子様の手が届くところに置かないで下さい。

【禁忌・禁止】


1. 本製品を改造、分解することは、折損等の原因となるので絶対に行わないで下さい。
2. 規定量を超える量の薬剤（最小1mL、最高8mL）を入れないで下さい。
3. 本製品の機能を損なうおそれがありますので、本製品を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
4. 薬液カップ、吸入マスクなどは、使用後に洗浄して下さい。洗浄したパーツは、必ず速やかに乾燥させた上、再汚染がないように保管して下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
(1) 各部の名称




①本体

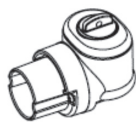

②薬液カップ



*③単4形アルカリ乾電池

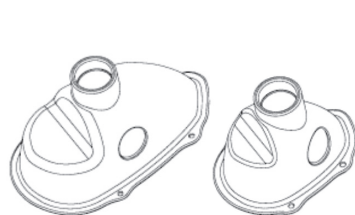

④吸入マスク（大）⑤吸入マスク（小）⑥計量カップ（10mL）



⑦専用ポーチ

- (2) 仕様

本体寸法：約35（幅）× 約26（奥行）× 約98（高さ）mm
質量：約48g（電池含まず）

2. 電気的定格

(1) 定格電源：DC 3V（*単4形アルカリ乾電池2本）

(2) 消費電力：約0.6W

3. 機器の分類

(1) 電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器

(2) 電撃に対する保護の程度による分類：BF形装着部

(3) 水の有害な浸入又は微粒子状物質の有害な浸入に対する保護：IP22

4. 原理

ホーン振動子の超音波振動エネルギーを薬剤カップ内の薬液に伝えます。薬液は、噴霧メッシュの作用で霧状になり外部に噴霧されます。

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、患者に吸入させるため、エアロゾル化した医薬品を供給するために用いる装置をいう。

【操作方法又は使用方法等】

※詳細は、本品添付の取扱説明書を参照して下さい。

1. 薬液カップを本体に取付けます。
2. 吸入マスクを薬液カップのノズルに取り付けます。
3. 電池を取付けます。
4. 薬液を薬液カップに入れ、電源スイッチを押して起動します。
5. 患者は、本体を手で持ち、吸入マスクを鼻と口に当てて吸入を開始します。
6. 再度、電源スイッチを押して、吸入を終了させます。

【使用上の注意】

※詳細は、本品添付の取扱説明書を参照して下さい。

1. 薬液カップは、本体にきちんと固定させてご使用ください。
2. 吸入マスクは、薬液カップのノズルの奥までしっかり取り付けてご使用ください。
3. ご購入後、初回使用、又は長時間使用していない時は、薬液カップ、吸入マスクを洗浄して下さい。洗浄したパーツは、必ず速やかに乾燥させた上、再汚染がないように保管して下さい。
4. 薬液カップは煮沸消毒しないで下さい。
5. 本体は、水洗いをしないで下さい。きれいな布で清潔にして下さい。
6. 薬液カップ（蓋を含む）、吸入マスクは常に清潔にして下さい。
7. 長期間使用しない時は、電池を取り外しておいて下さい。
8. メッシュが詰まったり、汚れた場合、先ず蓋を外して薬液カップにある薬剤を捨て、薬液カップを清潔な水に浸して下さい。直接、メッシュを拭かないで下さい。
9. 本体を洗浄する場合、有機溶剤は使わないで下さい。

【保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 保管する前に、薬液カップの中の薬剤が残留していないことを必ず確認して下さい。
- (2) 保管する前に、必ず本体の電源を切して下さい。
- (3) 直射日光、高温、多湿を避けた場所で、適切に保管して下さい。

2. 使用期間

- (1) 薬液カップは、消耗品ですので、3か月間の使用期限が目安になります。
- (2) 保証期間
本体、吸入マスク（1年）
〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に各パーツの破損、変形、変色等の損傷がないか、各接続部がしっかりと接続されているか確認して下さい。
2. 使用後は、薬液カップ、吸入マスクなどを洗浄・乾燥し、ちりやほこりが入らないように清潔に保管して下さい。
3. 本体や薬液カップの電極は清潔に保って下さい。

【包装】

1台／外箱（化粧箱）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

Pioneer Medical Instrument Technology(PMI)Co.,Ltd.(台湾)